

С повышением качества растет доверие!

Передовые технологии

Вот уже более 60 лет со дня со дня основания, компания YDM следует своим главным принципам: использование новейшего оборудования и передовых технологий!

Постоянное развитие!

На основе мнений и пожеланий наших клиентов, мы постоянно работаем над освоением, доработкой и внедрением новых материалов для производства превосходных по функциональности, долговечности и удобству в работе инструментов!

Контроль качества!

Продукция компании подвергается жесточайшему контролю качества, и только после тщательного тестирования мы предлагаем Вам готовый товар!

ДИАГНОСТИКА (Fundamentals)

Зонды	1
Зонды с шариком на конце	1
Диагностический инструмент	2
Экспандеры с наконечниками в виде лопатки	3
Сменные насадки для экспандеров	4

Экспандеры с круглым наконечником	5
Пинцеты	5
Зеркала	7
Ручки для зеркал	8
Слюноотсосы	10

Шприц для временного пломбировочного материала	10
Лотки из нержавеющей стали	11
Базовые наборы	11
Блюдца из нержавеющей стали	12

ПАРОДОНТОЛОГИЯ (Periodontics)

Скалеры односторонние	13
Сменные наконечники и ручки для скалеров	14
Скалеры двухсторонние	16
Скалеры универсальные	20

Кюреты типа KK	20
Кюреты Gracey	21
Система цвето-кодирования кюрет	22
Сменные насадки для кюрет Gracey и ручки для них	23

Зонды стоматологические градуированные	24
Сменные насадки для зондов и ручки для них	26
Аппликаторы для лекарственных препаратов	27
Аппарат для заточки инструментов	27

ТЕРАПИЯ (Conservative treatment)

Инструмент для пломбировки	29
Держатели для матриц	35
Инструмент для амальгамы	35
Штопфер - гладилки	37

Система коффердам	38
Инструмент для лечения корневых каналов	41
Резак для стекловолоконных штифтов	48
Набор для установки коронок	

на штифтово-культевую вкладку	49
Автоматический молоточек	49
Насадки из дерева и ручка для них	49

ХИРУРГИЯ (Dental surgery)

Щипцы для удаления зубов	51
Щипцы для удаления молочных зубов	53
Щипцы для удаления корней	55
Зажимы кровоостанавливающие	57
Кюретажные ложки	58
Щипцы для удаления корней и мягких тканей из лунки удаленного зуба	59
Элеваторы	60

Распаторы	64
Карпульные шприцы	66
Иглодержатель	67
Скальпели	71
Долото для кости	73
Молотки	74
Костные скребки	75
Роторасширители	76

Ретракторы	76
Ножницы для снятия швов	78
Ножницы для мягких тканей	79
Зажимы для салфеток	81
Пинцеты хирургические	82
Аспираторы	85
Переходник для слюноотсоса	86
Зонды/нити хирургические	86

ИМПЛАНТОЛОГИЯ (Implantology)

Костная ловушка (коллектор)	87
Костные скребки	87
Костные мельницы	87
Шприц для введения аутокости и остеопластических материалов	89
Ложки костные	89
Пакеры для укладки остеопластических материалов и аутокости	89
Кюреты для синус лифтинга	90

Остеотомы для закрытого синус-лифтинга и расширения альвеолярного гребня	91
Долото для расщепления альвеолярного отростка	92
Перфоратор для мягких тканей (панчер)	93
Щипцы для удаления мягких тканей после перфорации	93
Пинцеты для внесения мембран	93
Переотом	94
Измерительные инструменты для кости	94

Линейка для рентгеновских снимков	95
Щипцы для отделения костных блоков	95
Долото и кусачки для кости	95
Диссектор	96
Пинцет стоматологический из титана с насечками	97
Зонд градуированный из титана	97
Скалеры и кюреты титановые	97
Слепочные ложки и кусачки для их корректировки	97

МИКРОХИРУРГИЯ (Micro surgery)

Иглодержатели	99
Ножницы для мягких тканей	101
Пинцеты	103
Зонд для ретроградного пломбирования	104

Коагулятор	104
Карверы	104
Кюреты	104
Распаторы	105

Долото для костной пластики	105
Микрозеркала	106

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (Prosthetics)

Слепочные ложки	107
Шпатели для работы с альгинатными массами	110
Шпатели для работы с гипсом и силиконом	110
Шпатель для гидроколлоидных материалов и силиконовых масс	111
Прикусная ложка	112
Пакеры (укладчики ретракционной нити)	112
Шпатели для изготовления гипсовых моделей	

и альгинатных слепков	113
Стойка для слепочных ложек и герметичный бокс для них	113
Шпатели для замешивания цемента	114
Ножницы для снятия ортопедических конструкций	115
Ножницы для фольги и универсальные	115
Зажимы и держатели артикуляционной бумаги	116
Измерители межзубных промежутков	117

Инструменты для снятия коронок	118
Щипцы для удаления штифтов	118
Коронкосниматели	119
Щипцы для удаления вкладок	121
Щипцы для разжимания коронок	121
Щипцы для снятия временных коронок	121
Держатели штрипсов	122
Инструменты для удаления избытков цемента	122

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Laboratory techniques)

Щипцы для работы с лигатурной проволокой	123
Держатели коронок	126
Кусачки для лигатурной проволоки	127
Щипцы лабораторные	128
Артикуляторы и комплектующие к ним	129
Устройство для перебазировки съёмных протезов	135

Инструмент для работы с пластмассой, воском и композитом ручные	136
Молоточек деревянный	143
Сетка лабораторная защитная	143
Щипцы для гипса	144
Лобзик для гипсу	145

Нож по гипсу	145
Пинцеты для работы с моделями	146
Измерительные приборы	147
Прессы винтовые для кювет и кюветы	149
Горелки газовые	150
Стойка для пайки	150

РАЗНОЕ (Others)

Инструмент для диагностики	151
Сепараторы	151
Роторасширители	152, 154
Зеркала и контрастеры для съёмки ротовой полости	153
Блокираторы	155
Подставки для боров	156

Камни и принадлежности для заточки инструментов	159
Масло для заточки инструментов	160
Очищающее средство	161
Щипцы с бороздками и пинцет хирургический	161
Боксы для тампонов и растворов	162
Резервуары для жидкостей и подставки для них	164

Шприцы ирригационные	164
Стойки для инструментов и щипцов	165
Силиконовые насадки на инструмент	165
Щеточки для очистки	165
Цветная маркировочная лента и кольца	166
Лотки и кейсы для стерилизации	167
Колпачки для стерилизации	170

Ортодонтия (Orthodontics)

Щипцы ортодонтические	171
Кусачки лигатурные	173
Щипцы для обрезки концов проволоки	173
Кусачки для проволоки	174

Щипцы для шовного материала	175
Щипцы модульные	175
Инструмент для установки брекетов	176
Артикуляторы для моделирования и коррекции	

прикуса и принадлежности к ним	178
Макеты зубов для формирования моделей	178
Измерительные приборы ортодонтические	179
Горелка и стойка для пайки	180

Прочее

Способы дезинфекции и стерилизации инструмента	181
---	-----

Способ заточки	183
----------------------	-----

Зонды односторонние

1/1



№3

Арт. 01-003



№5

Арт. 01-005



№9

Арт. 01-009



№18

Арт. 01-018



№23

Арт. 01-023



№25

Арт. 01-025



Multi


Арт. 01-030

Имеют повышенную прочность, благодаря утолщенным наконечникам



№23BS


Арт. 01-024

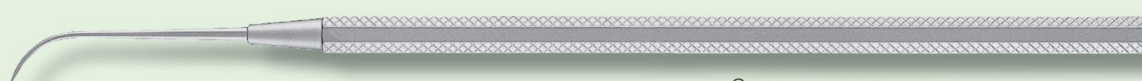

№9

Арт. 01-109

Стандартная рукоятка

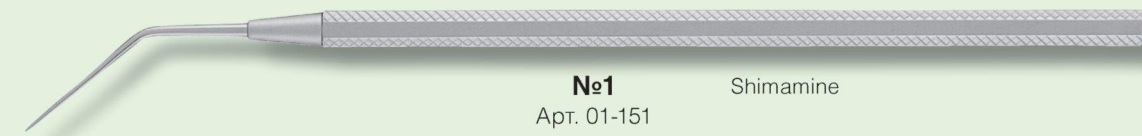

№1

Арт. 01-151


Shimamine



№1

Арт. 01-221

С шариком на конце

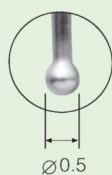

С шариком на конце



№2

Арт. 01-222



№3

Арт. 01-220

С шариком на конце

Наличие шарика на конце позволяет не травмировать ткани
Так же подходят для работы с пломбировочным материалом


Зонды двухсторонние

1/1




№5

Арт. 01-205

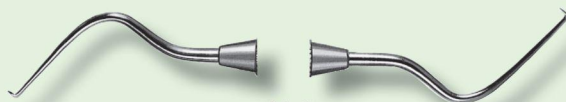

№6

Арт. 01-206

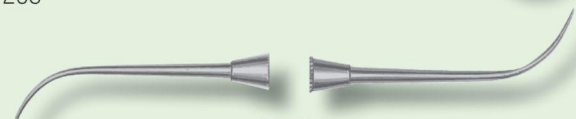

№8

Арт. 01-208



№3-9

Арт. 01-209

Replaceable Explorer Tips



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm
Арт. 10-201



P-F 6 mm
Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm
Арт. 10-202



P-C 6 mm
Арт. 10-203

2/3

Насадки

Комплект по 3 шт



№3
Арт. 23-103



№9
Арт. 23-109



№18
Арт. 23-118



№18A
Арт. 23-119



№23
Арт. 23-123



№25
Арт. 23-125



№S1
Арт. 23-151

1/1

Инструмент диагностический

Комбинации наиболее часто востребованных инструментов



Зонд + периоскоп

№1
Арт. 09-221



Зонд + скалер

№2
Арт. 09-222



Периоскоп + скалер

№3
Арт. 09-223



Благодаря идеально подобранной гибкости и длине наконечников, они отлично подходят для работ с пломбами, зубным камнем и т. д. Зонды совпадают с кюретами Грейси под номерами 11 и 12

№4
Арт. 09-224

С наконечниками в виде лопатки



№1

Арт. 01-501



№2

Арт. 01-502



№3

Арт. 01-503



№4

Арт. 01-504



№5

Арт. 01-505



№6

Арт. 01-506

С наконечниками в виде лопатки



Номер	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Арт.	01-511	01-512	01-513	01-514	01-515	01-516



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент, достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm
Арт. 10-201



P-F 6 mm
Арт. 10-205

Двусторонняя

2/3



P-B 8 mm
Арт. 10-202



P-C 6 mm
Арт. 10-203

Насадки

Комплект по 3 шт

1/1



№17
Арт. 23-217



№18
Арт. 23-218



№19
Арт. 23-219



№20
Арт. 23-220



№21
Арт. 23-221



№22
Арт. 23-222



№63
Арт. 23-263



№64
Арт. 23-264





№65
Арт. 23-265



№66
Арт. 23-266

Экскаваторы с круглым наконечником

1/1

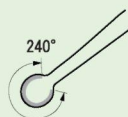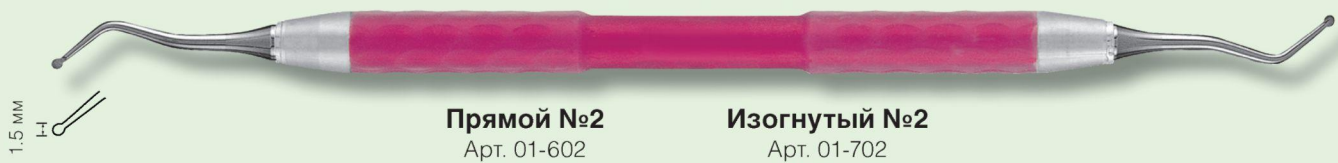


Отлично подходит для проделывания отверстий, размягчения и удаления дентина. Имеет заточку по краям лопатки.



Ручка выдерживает до 260°C


Пинцеты

1/1

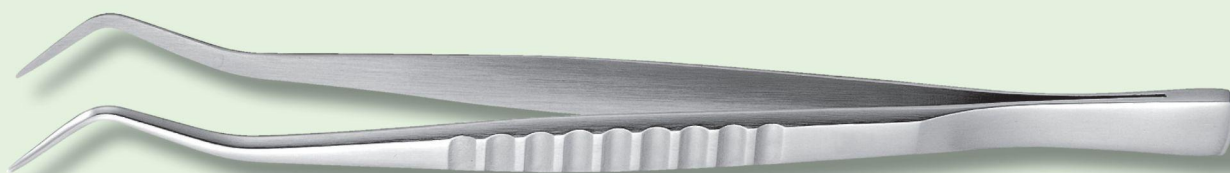


Длина 160 мм

№18
Арт. 11-301

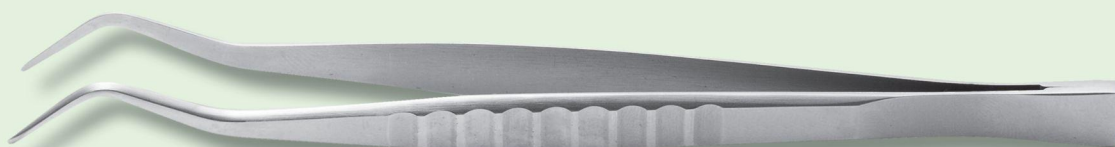


Длина 145 мм

Mini №18
Арт. 11-308

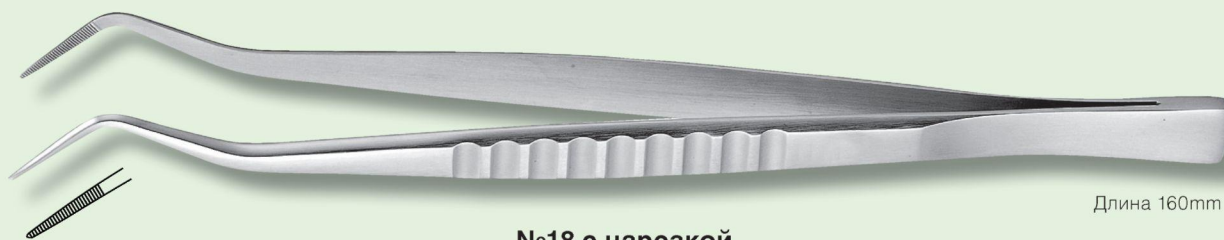

№18 с нарезкой
Арт. 11-302

Длина 160mm

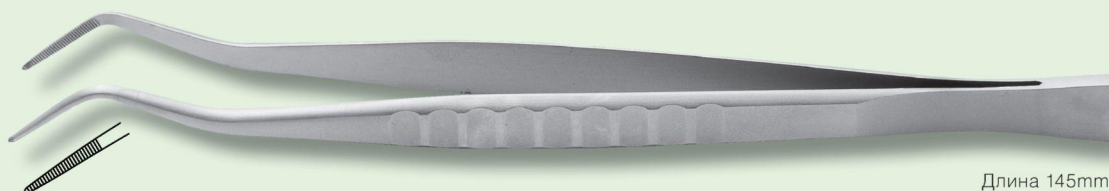


Mini №18 с нарезкой
Арт. 11-309

Длина 145mm



№18 С алмазным напылением
Арт. 11-303

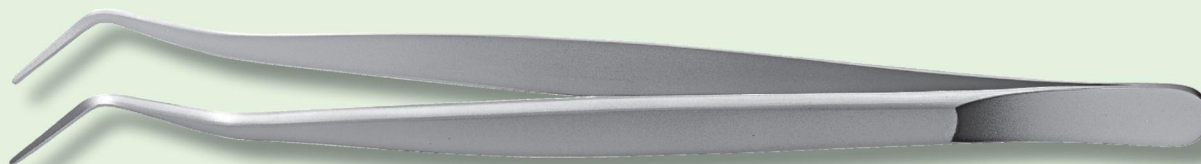

Premium
Арт. 11-019

Пинцет с гладкой поверхностью для деликатных операций




Koshi
Арт. 11-020

Clear 2


Упаковка - 20 шт
Благодаря голубоватому стеклу, формируется более четкое изображение

1/1

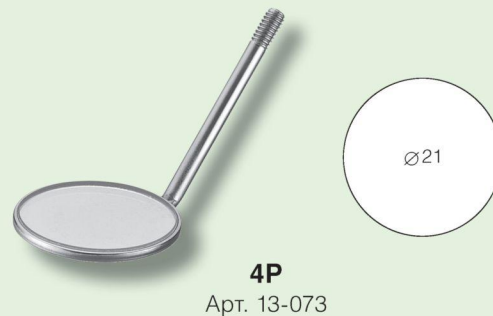

Толщина 1,5мм
Выдерживают до 140°C

Имеют прямую поверхность (вровень с краями)
Титановое напыление
Комплект - 12 шт
Изображение не удваивается

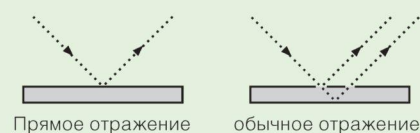


Выдерживают до 200°C

Зеркало металлическое двухстороннее

Арт.13-131
Комплект - 6 шт

1/1

В детской стоматологии удобно в использовании при нарушении прикуса и неправильном развитии зубов
Цельнометаллическая конструкция исключает возможность разбиться

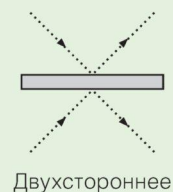


Толщина 1.1 мм

Силиконовые накладки на рукоятки облегчают работу
На конце имеется выступ для простукивания

Выступ в виде шарика



№1 Желтая
Арт. 13-081

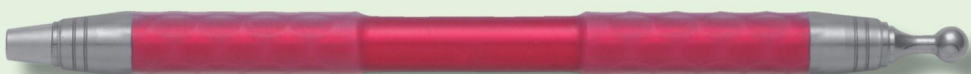

№2 Красная
Арт. 13-082



№3 Голубая
Арт. 13-083

В состав ручки входит кремний
Выдерживает до 260°C



Зеленая
Арт. 13-151



Синяя
Арт. 13-152



Серая
Арт. 13-153

Материал POM, до 162°C
Избегайте ультрафиолета



Восьмигранная

Арт. 13-121



SC

Арт. 13-127



YS

Арт. 13-128




Ajial

Арт. 13-122



Титановая с измерительной шкалой

Арт. 13-129

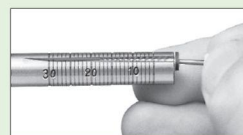

Для измерения глубины
корневого канала



Титановая


Арт. 13-130

Слюноотсосы универсальные

Комплект - 5 шт

Цельная конструкция без дополнительных клапанов облегчает чистку
Клапаны и насадки продаются отдельно

2/3

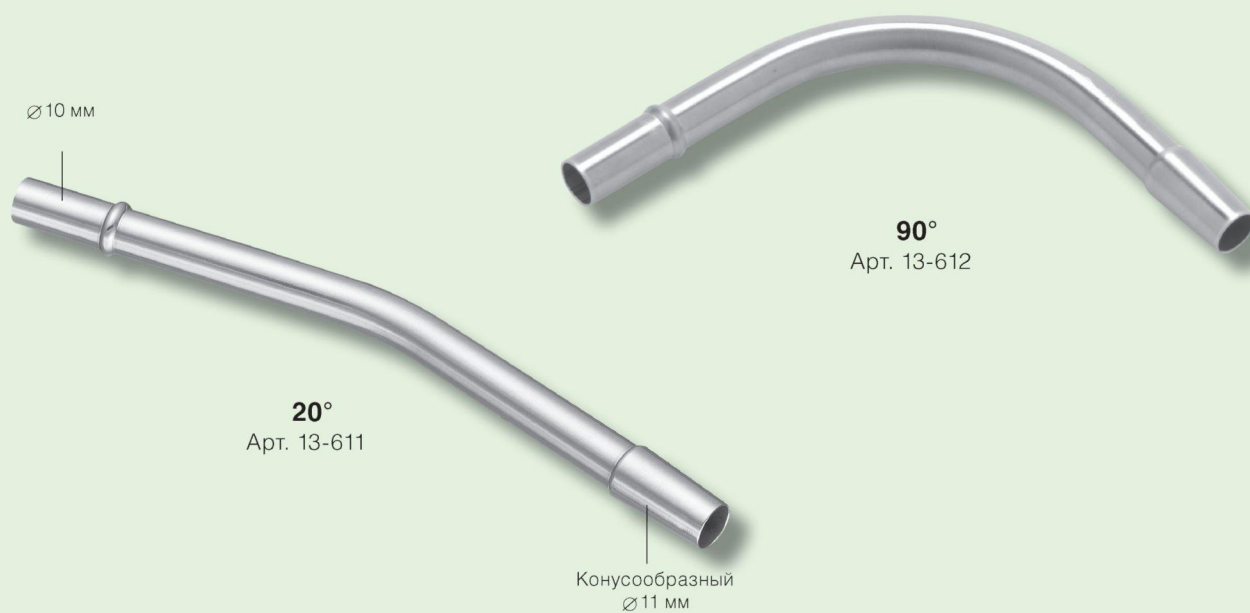

20°
Арт. 13-611

90°
Арт. 13-612

Конусообразный
Ø 11 мм

Щетка для чистки

Ø 12
Арт. 13-653



Длина 180 мм

Резиновая насадка

Арт. 13-613
Комплект - 5 шт

2/3



Длина 40mm

Выдерживает до 260°C

Переходник для слюноотсоса

Арт. 13-614

1/1

Подходит для европейских насадок
Ø 16




Материал PTFE, до 260°C

Шприц для временного пломбировочного материала

Арт. 13-200

1/1

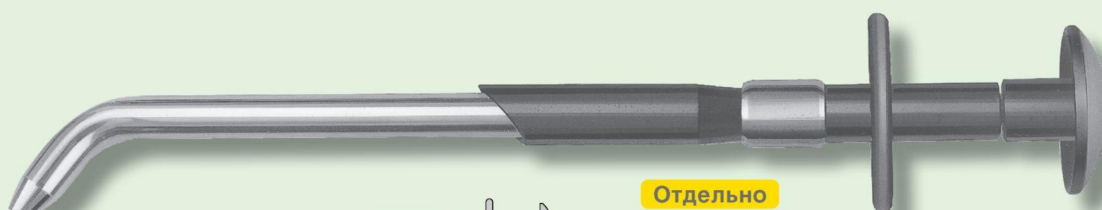


Не дезинфицировать в автоклаве

Крышка

Отдельно

Черная крышка
Арт. 90-010

M
Арт. 13-413

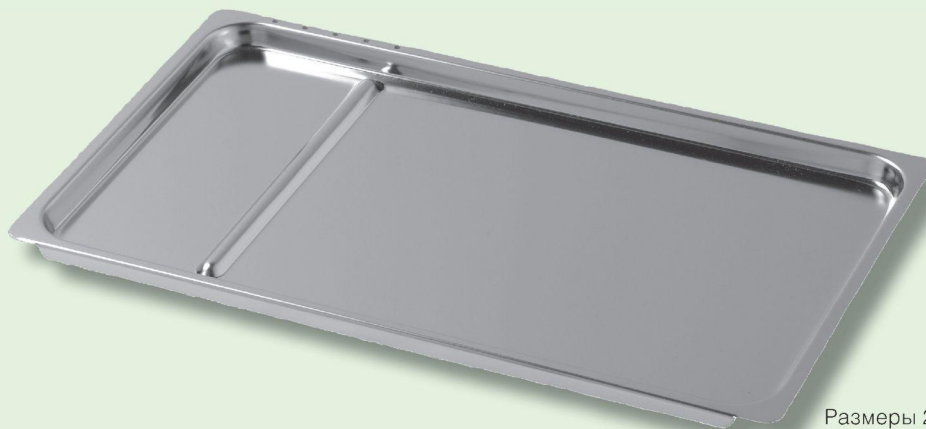

Размеры 245x146x8

S
Арт. 13-410



Размеры 245x73x8



На одну полку шкафчика помещаются 2 подноса

Базовый набор

Арт. 13-991

В комплект входят следующие предметы:


Пинцет 18	10 шт
Зеркала	10 шт
Лотки из нержавеющей стали M	10 шт
Зеркала 4P без рукояток	20 шт



Арт. 13-670

Комплект – 5 шт

Идеально подходят для замешивания маленьких порций пломбировочного материала, для местной анестезии и т. д. Так же удобны при работе с самоотверждающейся пластмассой

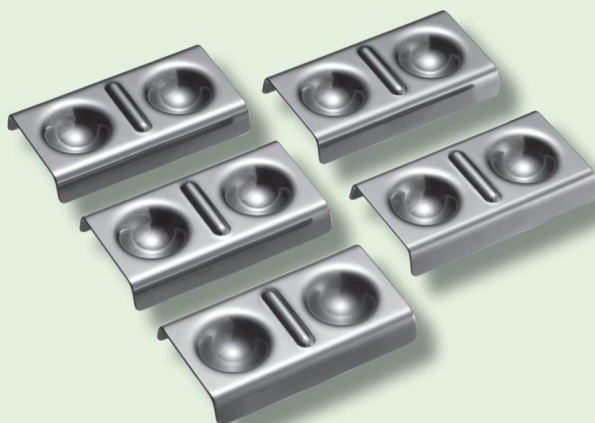

Размеры 56x31x8,5
Диаметр 16 мм

1/2

Используются для снятия твердых над и поддесневых отложений.

Вариабельность рабочих частей позволяет работать со всеми группами зубов.

1/1



№1

Арт. 09-001



№2

Арт. 09-002



№3

Арт. 09-003



№B

Арт. 09-035



№2

2 Язычный
Арт.09-052



№2S

Язычный
Арт.09-053



№11DA

Арт. 09-040



№11DB

Арт. 09-041



№11SA

Арт. 09-042



№11SB

Арт. 09-043



№11 Slim

Арт. 09-044



№T1

Арт. 09-057




№J1

Арт. 09-111



№J4

Арт. 09-054

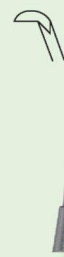

№J5

Арт. 09-055

Сменные наконечники и ручки для скалеров

В разобранном виде



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. Достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии.

Односторонняя



P-A 8 mm

Арт. 10-201



P-F 6 mm

Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm

Арт. 10-202



P-C 6 mm

Арт. 10-203

2/3

Наконечники

Комплекты по 3 шт.



slim№1A

Арт. 23-076



slim№2A

Арт. 23-077



slim№2B

Арт. 23-078



№1

Арт. 23-001



№2

Арт. 23-002



№3

Арт. 23-003



№B

Арт. 23-035



№11DA

Арт. 23-040



№11DB

Арт. 23-041



№11SA

Арт. 23-042



№11SB

Арт. 23-043



№11DAS

Арт. 23-068



№11DBS

Арт. 23-069



№T1

Арт. 23-057



№2

Язычный
Арт. 23-052

1/1

В разобранном виде



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. Достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии.

2/3

Односторонняя



P-A 8 mm

Арт. 10-201



P-F 6 mm

Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm

Арт. 10-202



P-C 6 mm

Арт. 10-203

Наконечники

Комплекты по 3 шт.

1/1



№2S

Язычный
Арт. 23-053



№2

Kawasaki
Арт. 23-622




№H5

Арт. 23-072




№H33

Арт. 23-073

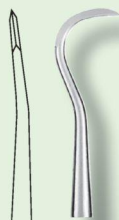

№H6

Арт. 23-074

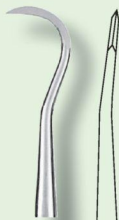

№H7

Арт. 23-075



№1

Большой
Арт. 23-601



№3A

Большой
Арт. 23-603



№3B

Большой
Арт. 23-604



№J1

Арт. 23-036



№J4A

Арт. 23-058



№J5A

Арт. 23-059



№J4B

Арт. 23-060



№J5B

Арт. 23-061

Скалеры двусторонние

Skeleton

Конфигурация рабочей части позволяет работать в области всех поверхностей шеек зубов.

Арт. 09-626
Комплект – 2 шт.

1/1



№1

Для межзубных промежутков и пришеечных поверхностей передних зубов
Арт. 09-627



№2

Для медиальных и дистальных поверхностей фронтальной и жевательной группы зубов
Арт. 09-628

Покрывание из прозрачного силикона обеспечивает удобство в работе. Не скользит в руках.
Материал – силикон, до 260°C


Круглая рукоятка Sakura

Арт. 09-430
Комплект – 2 шт.



№1

Арт. 09-431

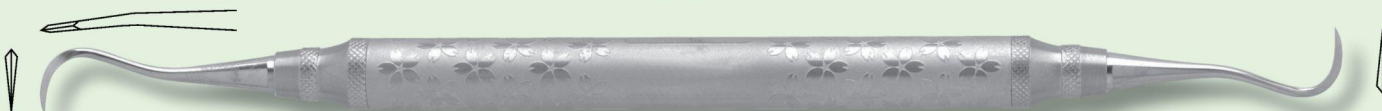

№2

Арт. 09-432


Круглая рукоятка

Арт. 09-623
Комплект – 2 шт.



№1

Арт. 09-624

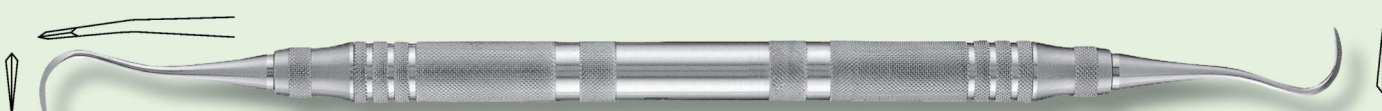

№2

Арт. 09-625

Стандартная рукоятка

Арт. 09-620
Комплект – 2 шт.



№1

Арт. 09-621



№2

Арт. 09-622

Скалеры Slim

Применяются для удаления зубного камня. Наконечники выполнены максимально тонкими, что позволяет проводить манипуляции даже при скученности зубов.


1/1



Скалеры Clinical


Арт. 09-150
Комплект – 3 шт.

1/1

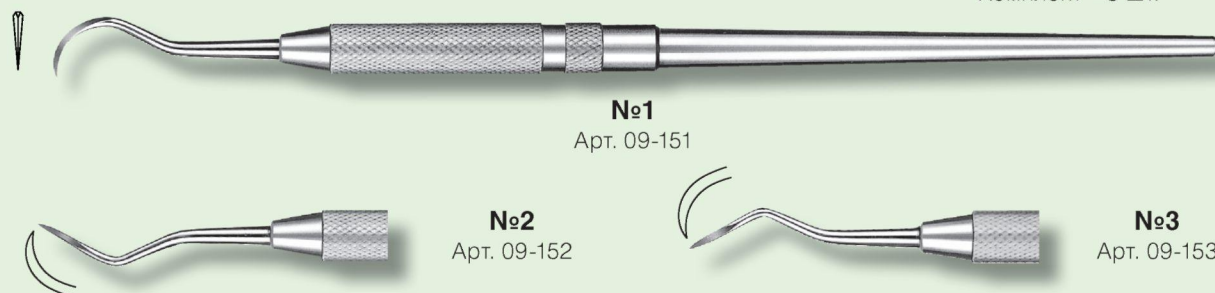

Скалеры YB

1/1

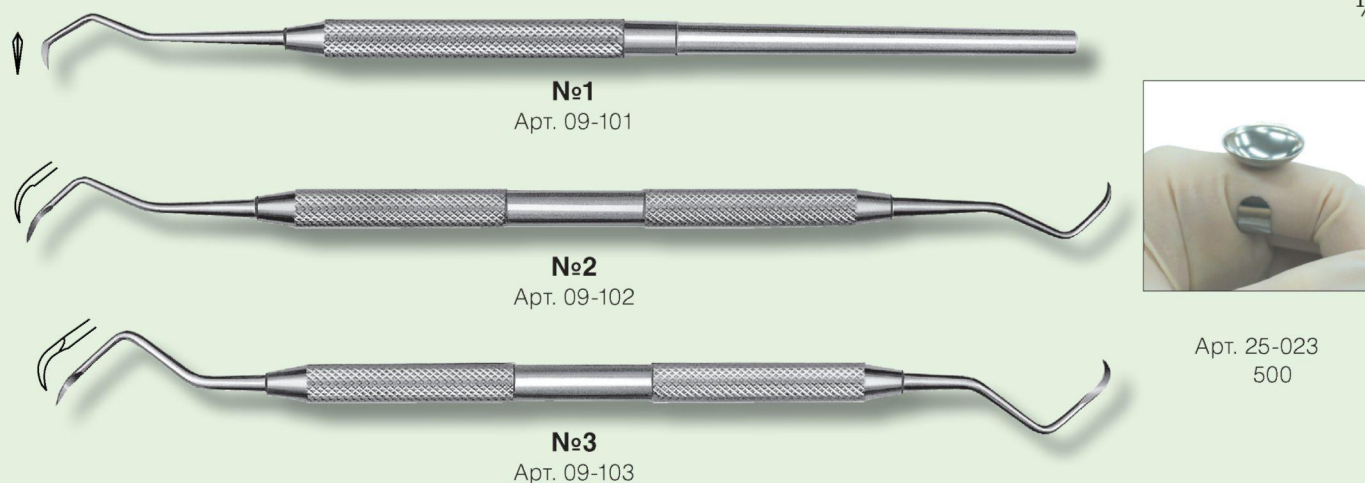

Скалеры для фронтальной группы зубов

Арт. 09-461

1/1



Скалеры для чистки корней и межкорневых перегородок

Хорошо подходит для чистки между корней, удаления зубного камня и выравнивания поверхности корней зуба и межкорневой перегородки. Легко проникает в глубокие полости.


1/1



№F1

Для фронтальных и жевательных зубов


Арт. 09-471

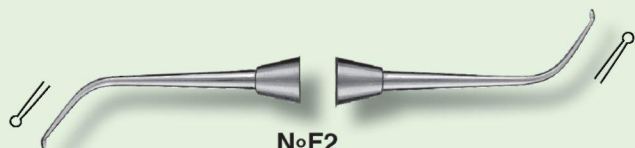

№F2

Для фуркаций (нижняя челюсть)

Арт. 09-472

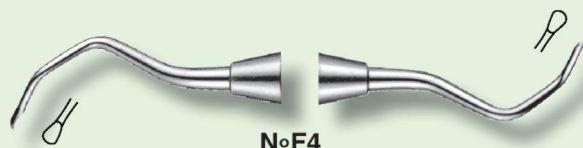

№F4

Для фуркаций (верхняя челюсть)

Арт. 09-492

Скалеры Partner


3,600

1/1




№1

Арт. 09-301

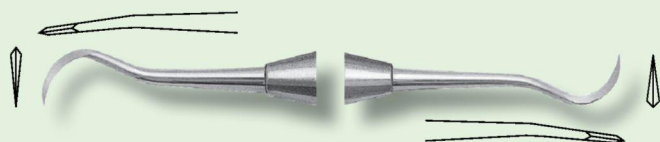

№2

Арт. 09-302

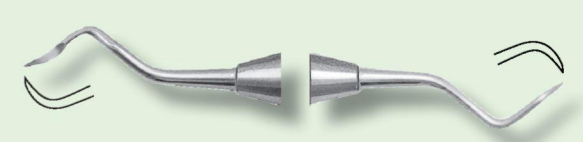

№3

Арт. 09-303

Скалеры Ergonomics MK

1/1



№2

Арт. 09-352



№3

Арт. 09-353

Скалеры двусторонние

Skeleton Арт. 09-417



Покрытие ручки – силикон, до 260°C

Sakura Арт. 09-418



Шестигранная рукоятка

Арт. 09-416




Изгиб скалера позволяет проникать в межзубные промежутки. А длина позволяет работать с жевательной группой зубов.

Скалеры для выравнивания поверхности корней




№R1

Для пришеечных областей фронтальной и жевательной группы зубов верхней и нижней челюсти
Арт. 09-475

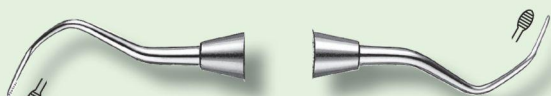

№R2

Для язычной стороны жевательной и фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти
Арт. 09-476

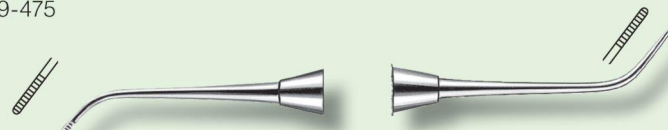

№R3

Для щечной стороны жевательной и фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти
Арт. 09-477



№R4

Для глубоких пародонтальных карманов
Арт. 09-479

Скалер для осмотра/диагностики SC

Арт. 09-478

Применяется для диагностики перед проведением лоскутных операций



Skeleton Арт. 09-423

1/1





Силиконовая ручка придает удобство в работе. Выдерживает до 260°C

Sakura Арт. 09-422



Шестигранная рукоятка Арт. 09-421

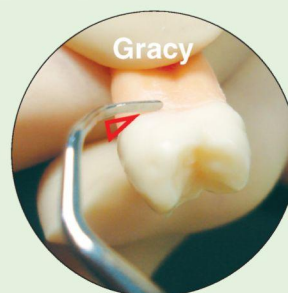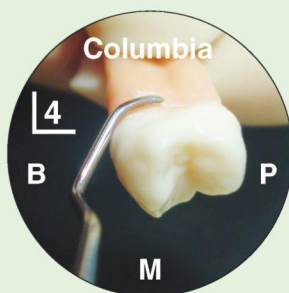

Угол прилегания составляет 20 градусов и обеспечивает наиболее плотный контакт с корнем и пришеечной областью

Кюреты КК

Форма кюрет облегчает работу специалиста. При проведении SRP, можно использовать один из концов для выскабливания, обходясь одним инструментом. Одна кюрета подходит для работы с медиальными, мезиальными и дистальными поверхностями, благодаря двум сторонам.

Набор из 4-х штук (с цветными кольцами: красное, розовое, желтое, белое)




1/1



Standard №1
Арт. 09-305

(Для фронтальной группы зубов)

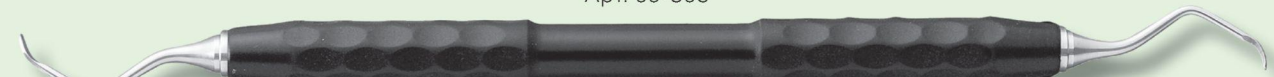

Standard №2
Арт. 09-306

(Для жевательной группы зубов)



Standard №3
Арт. 09-307

(Для глубоких карманов фронтальной группы зубов)



Standard №4
Арт. 09-308

(Для глубоких карманов жевательных зубов)

Жесткая (H), Мягкая (S)



№G1-2

Для резцов и клыков



№G3-4

Для резцов и клыков



№G5-6

Для резцов, клыков и премоляров



№G7-8

Для щечной и язычной поверхности жевательных зубов



№G9-10

Для щечной и язычной поверхности жевательных зубов. А также для фуркаций



№G11-12

Для мезиальной поверхности жевательных зубов



№G13-14

Для дистальной поверхности жевательных зубов



№G15-16

Для мезиальной поверхности жевательных зубов



#G11-12



#G15-16

G15-16 имеет более усовершенствованный хвостовик по сравнению с G11-12, который не задевает зубы антагонисты у пациентов, которым тяжело широко открывать рот.



Mini



№G1-2

Для резцов и клыков



№G3-4

Для резцов и клыков



№G5-6

Для резцов, клыков и премоляров



№G7-8

Для щечной и язычной поверхности жевательных зубов

Жесткая (H)

Для удаления среднего и большого количества твердого зубного камня

Мягкая (S)

Для удаления малого и среднего количества зубного камня, а также для выравнивания поверхности корней

Mini

Благодаря тонкому и длинному хвостовику, позволяет проникать в сложные карманы для удаления зубного камня, и для выравнивания поверхности корней



№G11-12

Для мезиальной поверхности жевательных зубов




№G13-14

Для дистальной поверхности жевательных зубов




№G15-16

Для мезиальной поверхности жевательных зубов

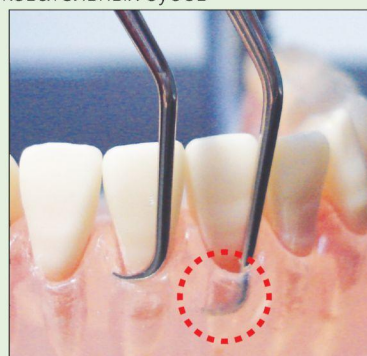

Длинная шейка и маленький крючок позволяют проникать в глубокие и мелкие карманы

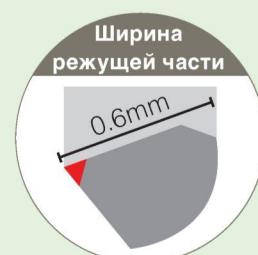


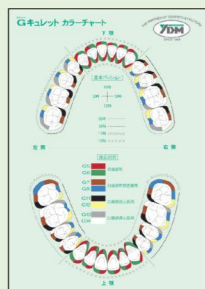


Таблица применения цветных колец
Арт. 09-395

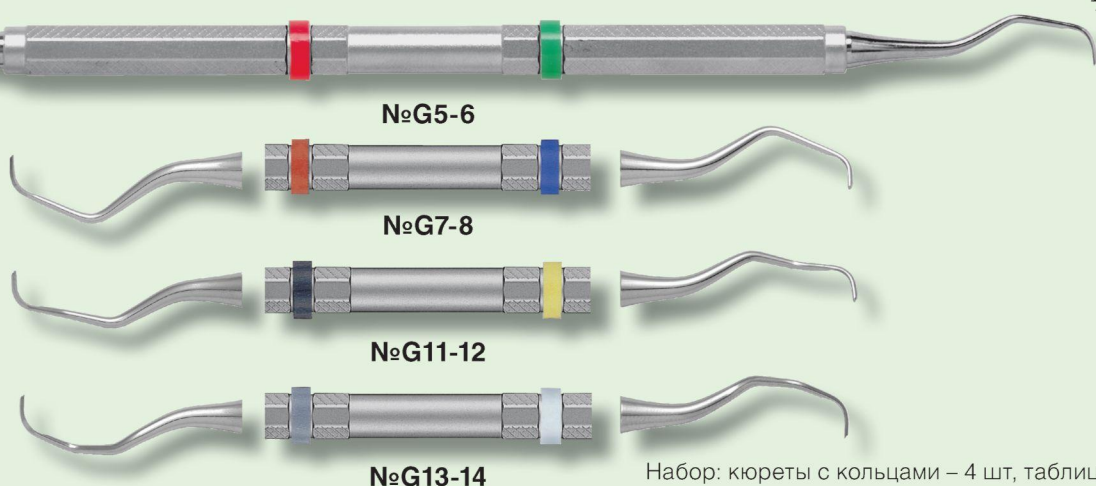

Набор: кюреты с кольцами – 4 шт, таблица

	набор	#G5-6	#G7-8	#G11-12	#G13-14
Жесткие (H)	09-690	09-691	09-692	09-693	09-694
Мягкие (S)	09-695	09-696	09-697	09-698	09-699


Кольца из силикона, до 260°C

Выбор цвета рукоятки

Skeleton

Мягкое покрытие рукоятки из силикона обеспечивает удобство и продолжительность работы

Диаметр рукоятки – 9мм,
покрытие из силикона (до 260°C)

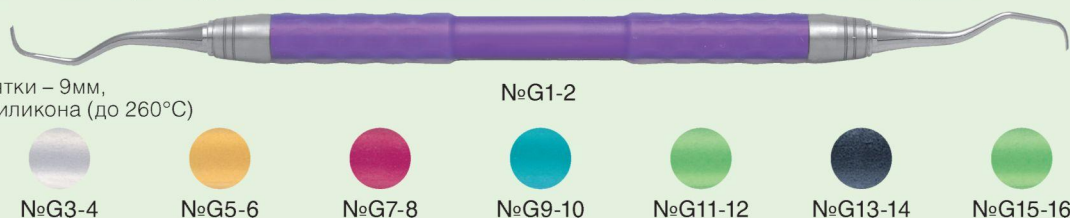

	7 шт	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16
Жесткие (H)	09-670	09-671	09-672	09-673	09-674	09-675	09-676	09-677	09-678
Мягкие (S)	09-680	09-681	09-682	09-683	09-684	09-685	09-686	09-687	09-688
Mini	–	09-771	09-772	09-773	09-774	–	09-776	09-777	09-778

Sakura

Снижает усталость при работе, благодаря антискользящему покрытию и специально подобранной толщине рукоятки, которая наилучшим образом передает усилие.

Диаметр рукоятки – 9,5 мм



	7 шт	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16
Жесткие (H)	09-740	09-741	09-742	09-743	09-744	09-745	09-746	09-747	09-748
Мягкие (S)	09-750	09-751	09-752	09-753	09-754	09-755	09-756	09-757	09-758
Mini	–	09-781	09-782	09-783	09-784	–	09-786	09-787	09-788

Шестигранная рукоятка

Тонкая рукоятка обеспечивает высокую чувствительность

Диаметр рукоятки – 6,5 мм



	7 шт	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16
Жесткие (H)	09-630	09-631	09-632	09-633	09-634	09-635	09-636	09-637	09-638
Мягкие (S)	09-640	09-641	09-642	09-643	09-644	09-645	09-646	09-647	09-648
Mini	–	09-761	09-762	09-763	09-764	–	09-766	09-767	09-768

Сменные насадки для кюрет Gracey

В разобранном виде



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm

Арт. 10-201



P-F 6 mm

Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm

Арт. 10-202



P-C 6 mm

Арт. 10-203

2/3

Насадки

Комплекты по 3 штуки



№G1

Арт. 23-301



№G2

Арт. 23-302



№G3

Арт. 23-303




№G4

Арт. 23-304



№G5

Арт. 23-305

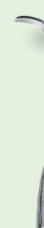

№G6

Арт. 23-306



№G7

Арт. 23-307



№G8

Арт. 23-308



№G9

Арт. 23-309




№G10

Арт. 23-310



№G11

Арт. 23-311

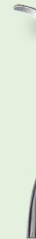

№G12

Арт. 23-312



№G13

Арт. 23-313



№G14

Арт. 23-314

1/4


Инструмент используется для измерения глубины зубо-десневого кармана

1/1




Может использоваться в качестве измерителя глубины ложа, при установке имплантатов



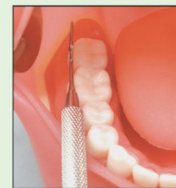

Восстанавливает форму,
имеет долгий срок службы

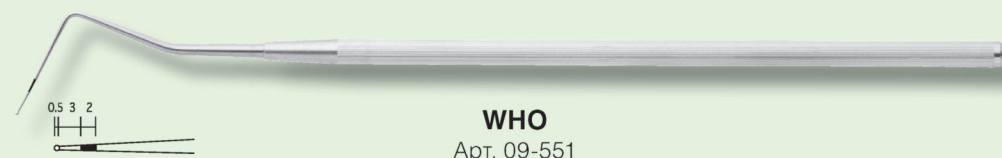

Идеален при осмотре корней

Сменные насадки и рукоятки для стоматологических зондов

В разобранном виде



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. Достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm

Арт. 10-201



P-F 6 mm

Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm

Арт. 10-202




P-C 6 mm

Арт. 10-203


2/3

Насадки

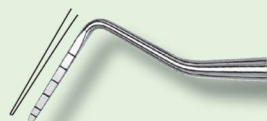

Плоская №А

Арт. 23-500

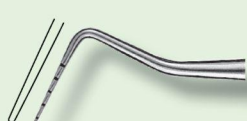

Плоская №В

Арт. 23-501



№1

Арт. 23-510



№5


Арт. 23-515

1/1

Зонд диагностический


При нагрузке в 20-25 грамм, шарик прикасается к краям зонда, что позволяет наиболее точно и атравматично определить глубину пародонтального кармана

1/1

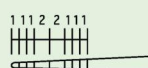


№2

Арт. 09-204

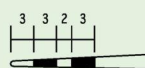



№5

Арт. 09-203

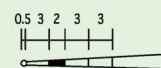

CPITN-C

Арт. 09-205

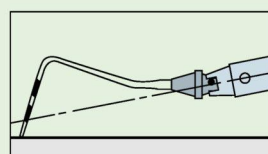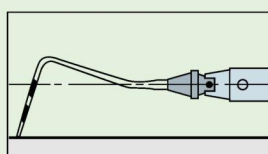



Двусторонний
Арт. 09-174



С держателем
Арт. 15-010

Арт.	Наименование
15-011	Насадка
15-022	Держатель

Аппарат для заточки инструментов Re Born

Арт. 13-060

Удобно использовать в любом месте,
т. к. станок помещается на ладони

Point 1

Камни для заточки обрели
новый вид – Re Born
Точильный камень установлен
под углом 70 градусов.
Правильный способ заточки
указан на рисунках.

Point 2

Удобен в использовании
Упрощенная конструкция
экономит время и
освобождает
от долгих настроек.

Point 3

Особенности конструкции
и угол постановки камня
позволяют сохранять
режущую кромку
инструмента ровной
и острой

Корпус (материал-пластик)
С диском в дне
Батарейки
Размеры: 58x107x55
Вес 170 г. (без батареек)
Не дезинфицировать в автоклаве

Камни: Керамический, Алмазный
(не требуют применения воды
или масла). Допускается
автоклавирование.
4 поверхности для заточки.



**Керамический
камень**



Мелкая и средняя
зернистость. Подходит
для ежедневного
использования


**Алмазный
камень**




Крупная зернистость.
Для затупившегося
инструмента



Установите юркету на подставку,
плоской частью

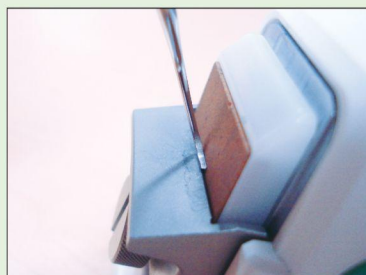


Придвиньте поверхность для
заточки к точильному камню

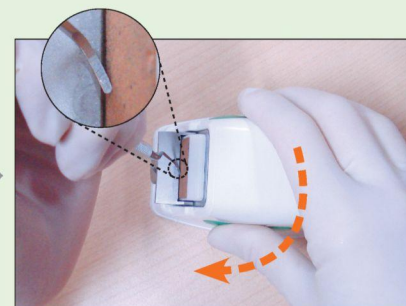

Заточите острие, поворачивая корпус
станка



Инструмент для работы с композитами

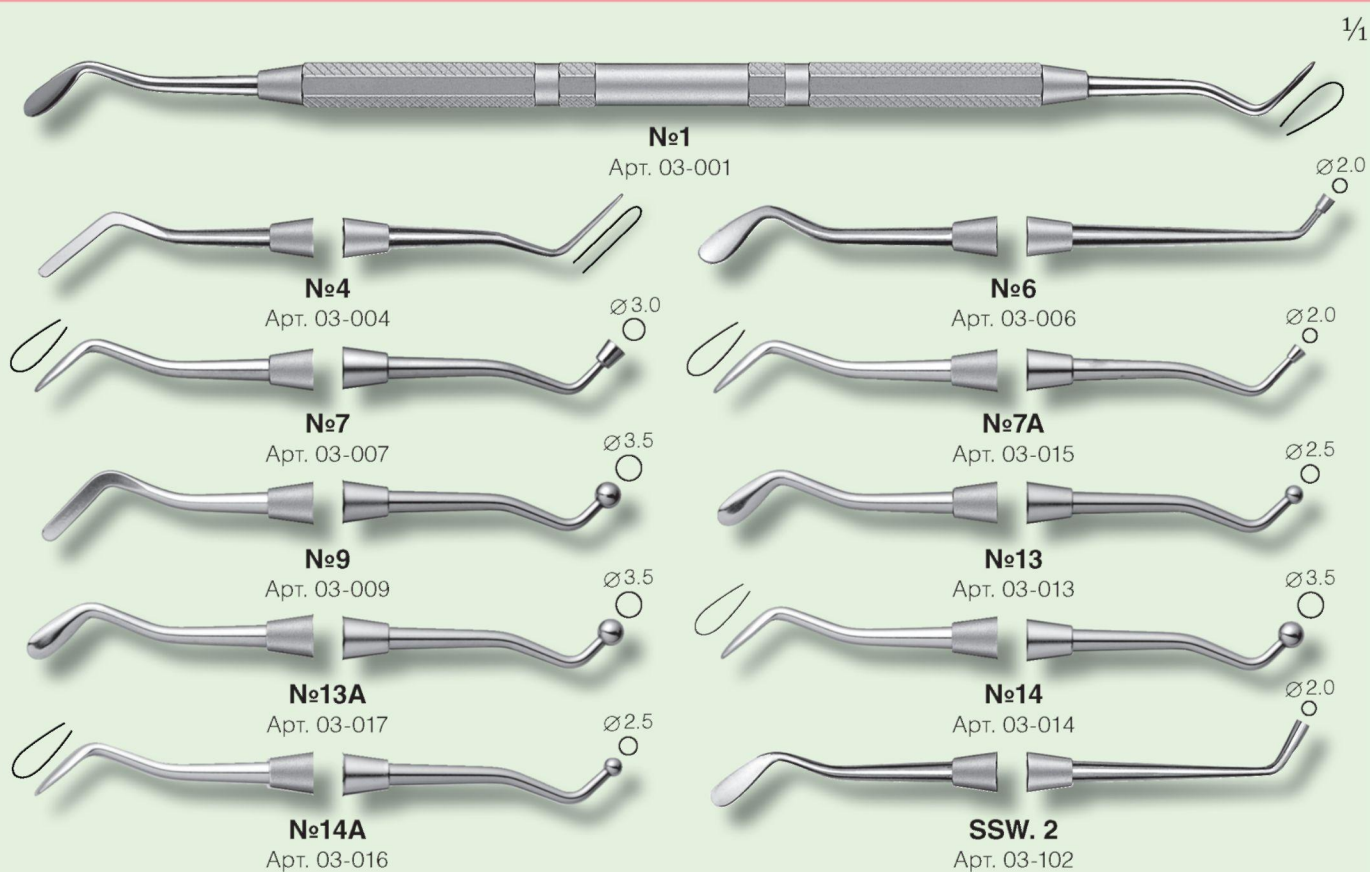

Инструмент для удаления временного пломбировочного материала

Арт. 03-010



Удобен при удалении пломбировочного материала с жевательных поверхностей зубов

Инструмент для работы с медиальными поверхностями зубов



Для передних зубов

Арт. 03-231



Для задних зубов

Арт. 03-232


Инструмент для работы с цементами

Арт. 03-241




Инструмент дает возможность вносить пломбировочный материал, избегая возможного контакта с образованиями и средой полости рта. Имеет сменные насадки. Благодаря разборной конструкции легко стерилизуется.

Комплект: шприц, насадки – 100 шт.

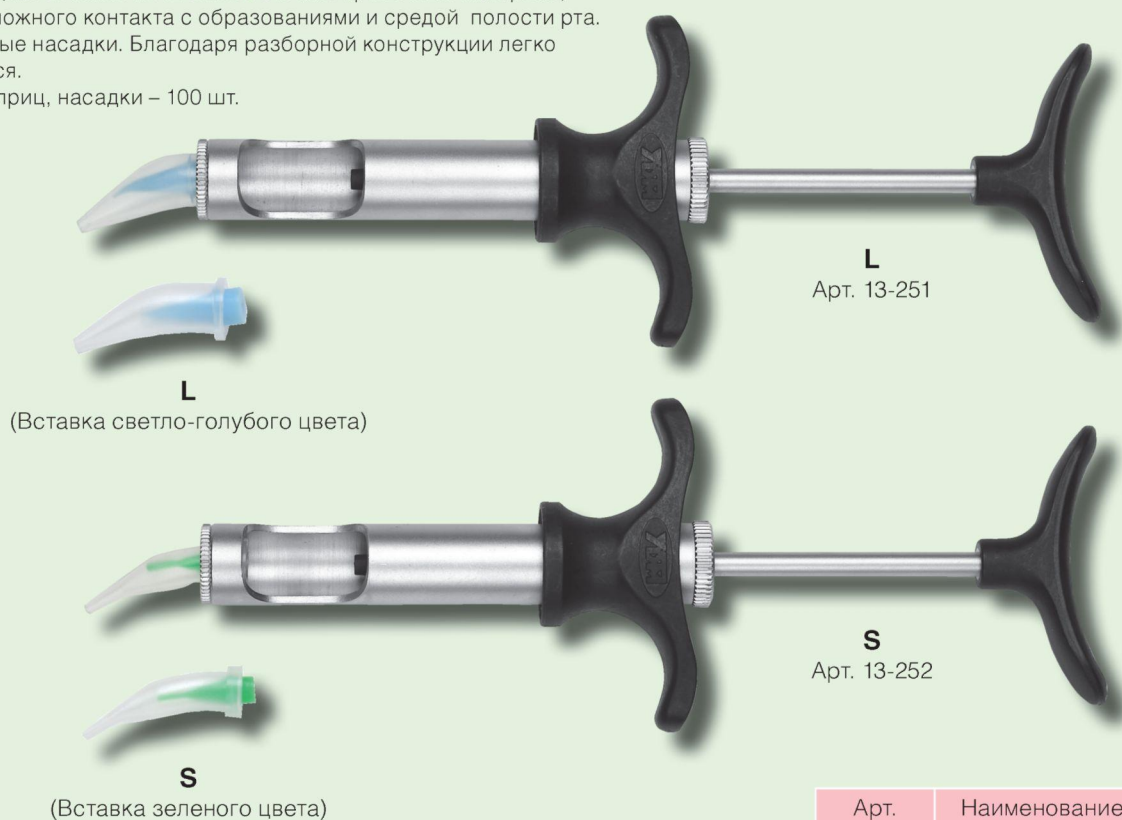

Пример

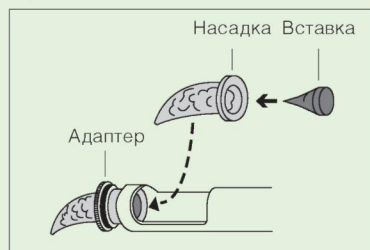

Возьмите необходимое количество материала, поместите его в насадку и закройте заглушкой. После чего вставьте в шприц и приступайте к работе. Адаптер подходит как для насадки S, так и для насадки L.


Черные части из PPS, до 260°C
Не дезинфицировать насадки в автоклаве

Арт.	Наименование
13-255	Шприц L
13-256	Шприц S
13-188	Насадки L 100 шт
13-190	Насадки S 100 шт
13-193	Насадки L 500 шт
13-194	Насадки S 500 шт
90-370	Адаптер L
90-371	Адаптер S

Инструмент серии TANC, для работы с композитами

Покрытие из титана и нитрида алюминия придает износостойкость и прочность. Во время работы материал не прилипает к инструменту, упрощая пломбирование.

1/1

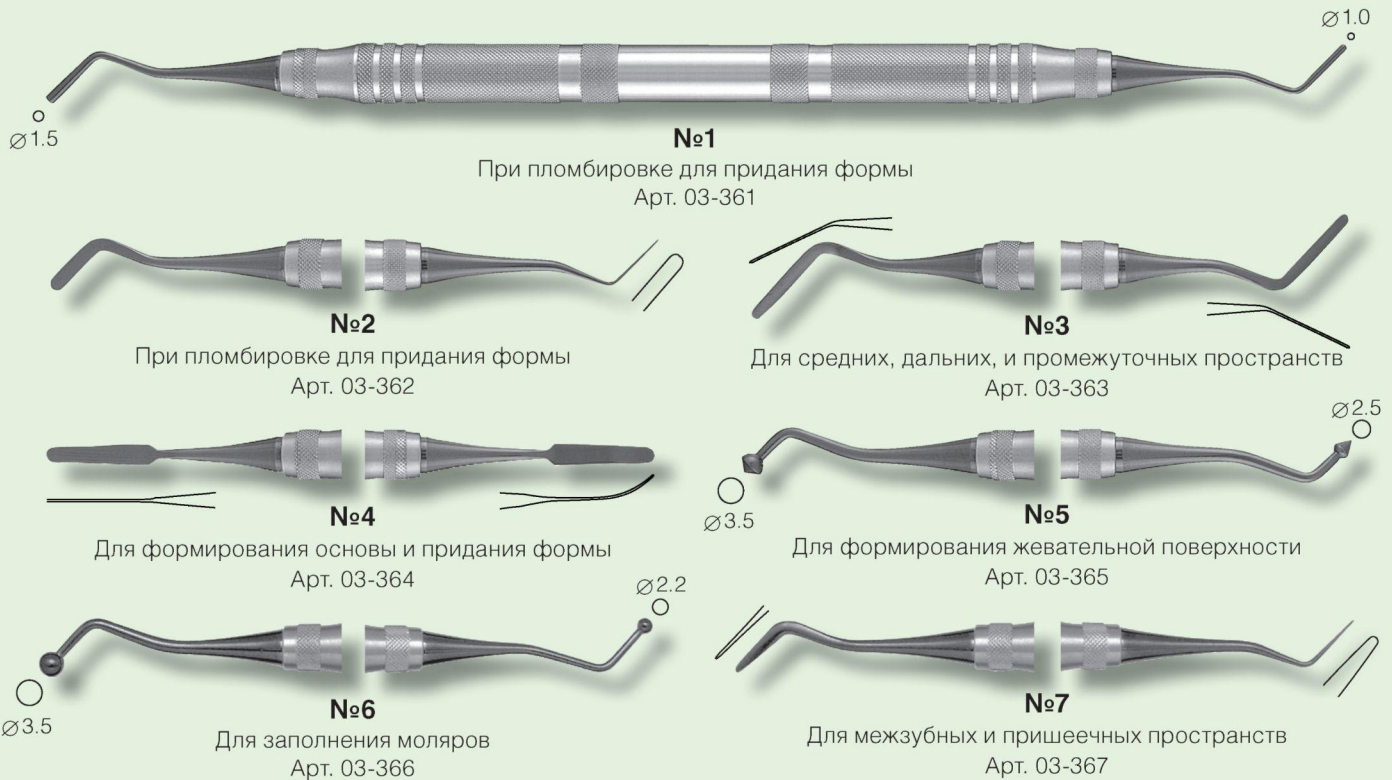

Инструмент серии TMDU для работы с композитами

Гибкий металл для удобства работы. Покрытие из титана и нитрида алюминия. Пломбировочный материал не адгезирует с поверхностью инструмента.

1/1



Толщина №1 и №3 – 0,2 мм



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm

Арт. 10-201



P-F 6 mm

Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm

Арт. 10-202



P-C 6 mm

Арт. 10-203

2/3

Насадки

С покрытием из титана и нитрида алюминия.

Покрывтие предотвращает прилипание материала к поверхности инструмента.

Комплекты по 3 шт

1/1

Ø1.5



№1A

Арт. 23-411

Ø1.0



№1B

Арт. 23-412



№2A

Арт. 23-413



№2B

Арт. 23-414



№3A

Арт. 23-415



№3B

Арт. 23-416



№4A

Арт. 23-417



№4B

Арт. 23-418

Ø3.5



№5A

Арт. 23-419

Ø2.5



№5B

Арт. 23-420

Ø3.5



№6A

Арт. 23-421

Ø2.2



№6B

Арт. 23-422



№7A

Арт. 23-423



№7B

Арт. 23-424



Насадки можно легко комбинировать. При износе насадки, нет необходимости менять весь инструмент. достаточно просто заказать новую, что экономит средства. При дезинфекции или стерилизации снимайте насадки, во избежание появления коррозии

Односторонняя



P-A 8 mm
Арт. 10-201



P-F 6 mm
Арт. 10-205

Двусторонняя



P-B 8 mm
Арт. 10-202



P-C 6 mm
Арт. 10-203

2/3

Насадки

Комплекты по 3шт
Имеют тефлоновое покрытие, что облегчает работу и чистку инструмента

1/1



№CP1
Арт. 03-331



№CP2
Арт. 03-332



№CP3
Арт. 03-333




№CP4
Арт. 03-334



Держатель матриц

Держатель, пластины 10 шт
Арт. 13-170

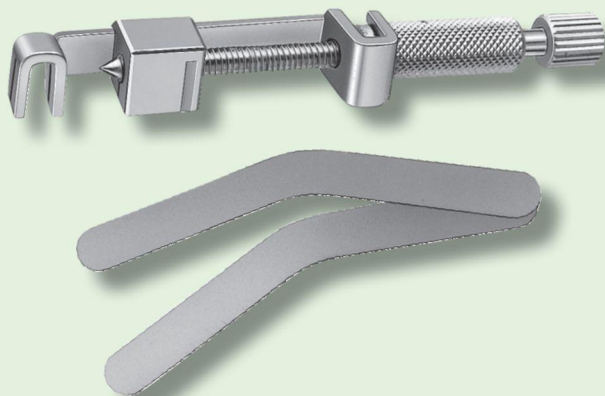


Толщина пластин 30 мкм


Арт.	Наименование
13-171	Держатель
13-172	Пластины 10 шт

Способ установки

1. сверните пластину в круг
2. вставьте согнутую пластину в держатель и затяните регулировочный винт

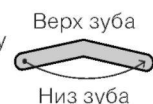


Правая сторона верхней, и левая нижней челюсти

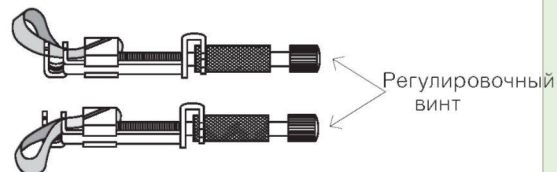

Левая сторона верхней, и правая сторона нижней челюсти

3. установите держатель на требуемый зуб

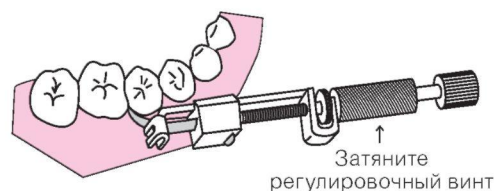

Зонды для работы с амальгамой Fusayama

4,300

1/1



Burnisher 1
Арт. 04-004



Burnisher 2
Арт. 04-005

Полировщики для амальгамы

1/1



L
Арт. 05-001



S
Арт. 05-002

Инструмент для работы с амальгамой

Арт. 07-100

1/1



Блюдце для амальгамы

Арт. 05-611


1/1



Материал чёрного цвета NR, до 80°C

Шприц для амальгамы

1/1

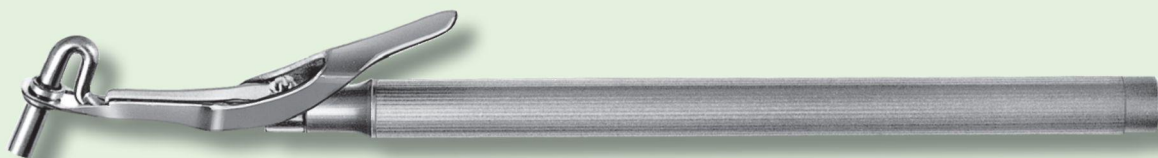

L



Ø2.5

S



Ø2.0

Внутренний диаметр

L

Арт. 05-503

S


Арт. 05-504

Штопфер – гладилка Тип F-B

Круглая рукоятка



Восьмигранная рукоятка

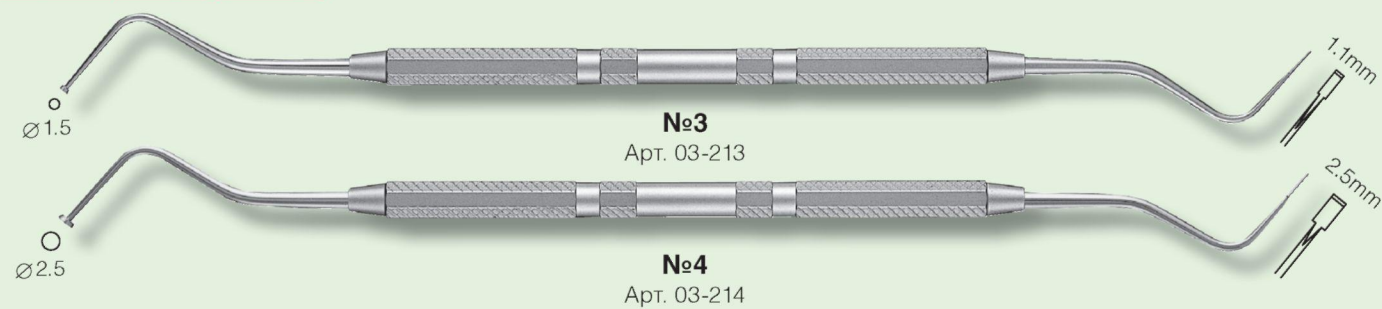

Гладилка с круглой головкой


Арт. 25-015



Набор из матриц и матрицодержателей Тип 2 (система Кофердама)

Данный набор позволяет выполнять пломбировку контактных поверхностей всех групп зубов
Арт. 08-591

1/4

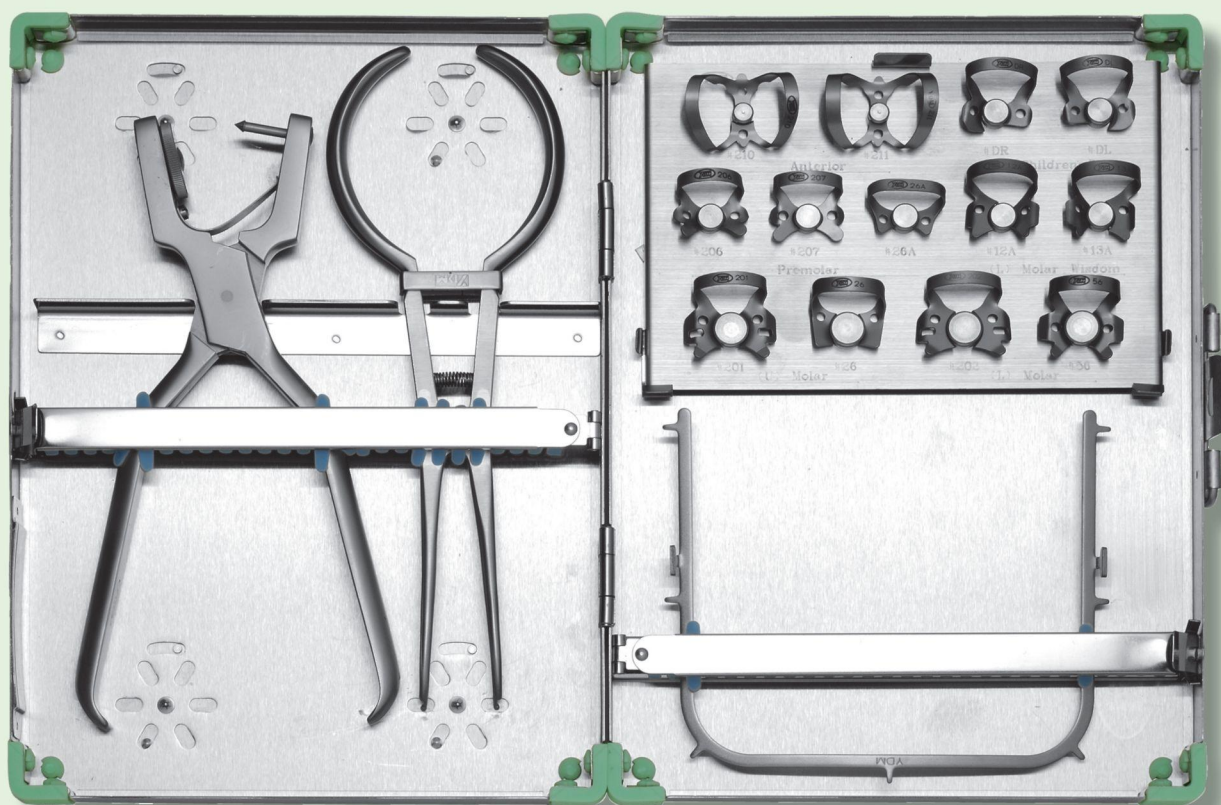


Части зеленого цвета – из силикона, до 260°C

Арт.	Наименование	Назначение
08-526	матрица 26	Для верхних коренных и молочных
08-501	матрица 201	для верхних коренных
08-556	матрица 56	Для нижних коренных
08-502	матрица 202	для нижних коренных
08-506	матрица 206	Для малых коренных
08-507	матрица 207	Для малых коренных
08-527	матрица 26A	Для передних и малых коренных
08-510	матрица 210	для передних зубов
08-511	матрица 211	для передних зубов
08-560	матрица DR	Для правой нижней стороны, детские
08-561	матрица DL	Для левой нижней стороны, детские
08-512	матрица 12A	Для зубов мудрости и коренных зубов
08-513	матрица 13A	Для зубов мудрости и коренных зубов
08-110	Дырокол для матриц	
08-121	Матрицедержатель YS	
08-101	Рамка Young для взрослых	
24-051	Стерилизационный кейс для всего набора	

Арт. 08-590

Фиксаторы 12А и 13А можно устанавливать на растущие зубы, благодаря наличию зубцов. При помощи щипцов Giza удобно регулировать высоту фиксатора справа и слева на зубе. Фиксаторы 26 и 26А могут использоваться и в детской стоматологии. В этом случае, 26 используется для задних, а 26А для передних зубов.

1/1

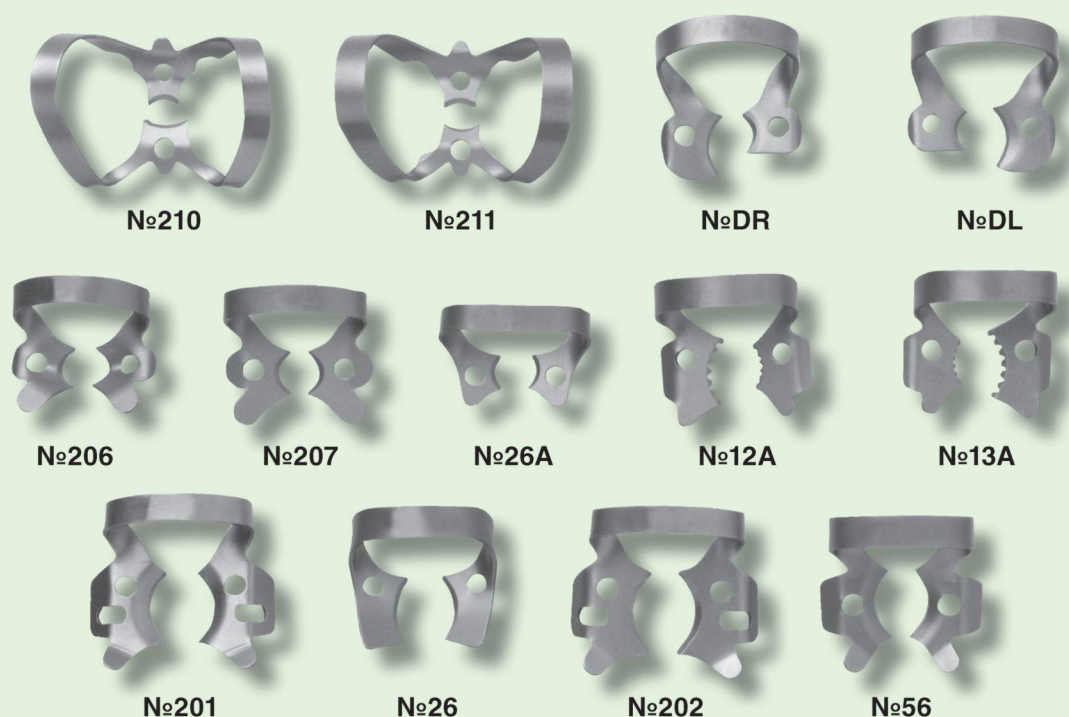

Положение фиксаторов на зубе

- ① Устанавливается на границу десны и зуба. Захваты загибаются вниз.
- ② Десна не зажимается. Захваты устанавливаются ровно, без загибов




В комплекте

Арт.	Наименование	Применение	Положение установки
08-526	Фиксатор 26	Для верхних коренных и молочных	1
08-501	Фиксатор 201	для верхних коренных	1
08-556	Фиксатор 56	Для нижних коренных	1
08-502	Фиксатор 202	Для нижних коренных	2
08-506	Фиксатор 206	Для малых коренных	1
08-507	Фиксатор 207	Для малых коренных	2
08-527	Фиксатор 26А	Для малых коренных	2
08-510	матрица 210	для передних зубов	2
08-511	Фиксатор 211	для передних зубов	2
08-560	Фиксатор DR	Для правой нижней стороны, молочные и коренные	1
08-561	Фиксатор DL	Для левой нижней стороны, молочные и коренные	1
08-512	Фиксатор 12А	Для нижних коренных и зубов мудрости	2
08-513	Фиксатор 13А	Для нижних коренных и зубов мудрости	2
08-258	Панель для фиксаторов		

Пробойник для Коффердама

Арт. 08-110
12,100

2/3

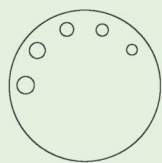


Диаметры
отверстий:

Ø 1.4
Ø 1.6
Ø 1.8
Ø 2.1
Ø 2.3



Матрицедержатель


2/3

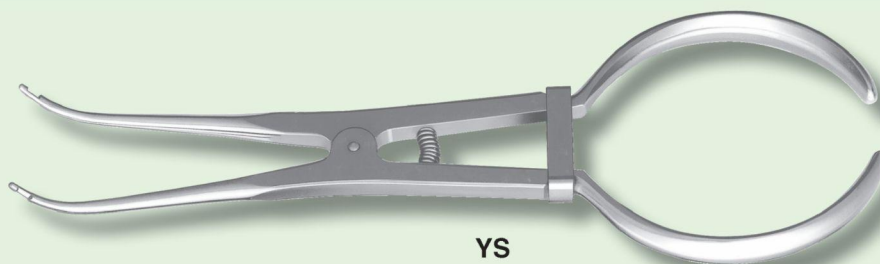

YS

Арт. 08-121

Позволяют эффективно
фиксировать матрицы на
зубах верхней и нижней
челюсти.

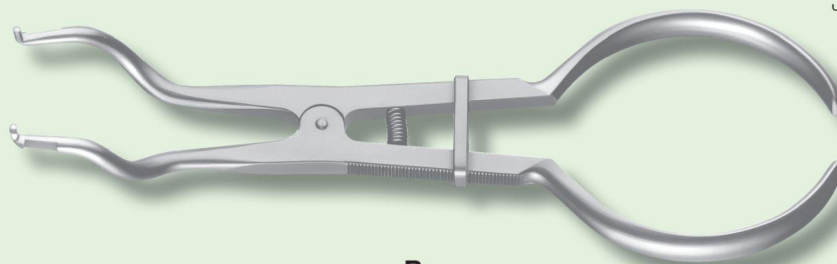


Brewer

Арт. 08-120

Рамки для Коффердама

1/2

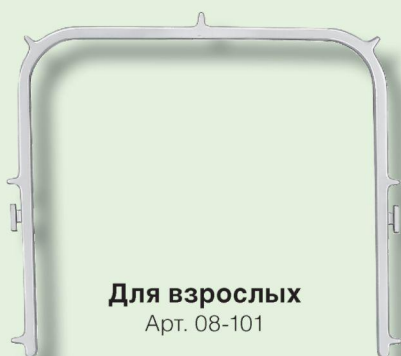

Для взрослых

Арт. 08-101

Размер 98x90



Для детей

Арт. 08-102

Размер 89x70

Держатель для эндодонтических инструментов

Используется для работы на фронтальных зубах верхней и нижней челюсти
Арт. 13-15.

1/1





Держатель для К и Н файлов


Удобны при работе с жевательными зубами верхней и нижней челюсти

Набор из 2-х инстр.
Арт.08-060

1/1

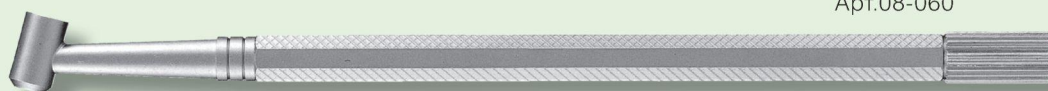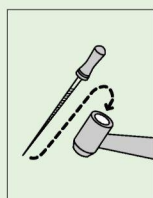

Для дальних (D)
Арт. 08-061

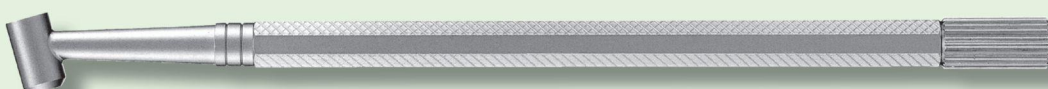

Для средних (M)
Арт. 08-062

Держатель для К и Н файлов

Арт. 08-06.


Удобен при работе с корневыми каналами моляров и премоляров верхней и нижней челюсти

Пример:

1/1



Для дальних

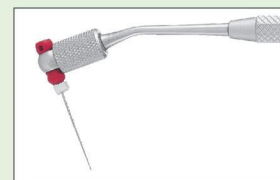

Для ближних




Набор защитных подставок для К и Н файлов

Кейс, 3 подставки
Арт. 08-41.

В одну подставку вмещается 12 буров,
в кейс умещается до 6 подставок

1/4

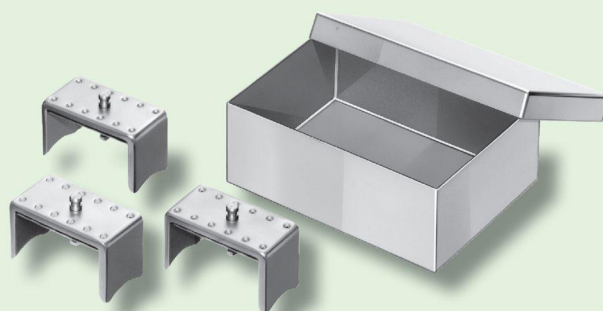

Размеры: подставка 60x30x33
 кейс 120x90x40



Арт.	Наименование
08-412	Подставка 3 шт.
24-016	Кейс

Стерилизационный стакан

Стакан, бумага – 100 листов
Арт.08-423

1/2

Для поддержания стерильности
эндодонтических инструментов
Сменная бумага



Размер 45x36
Буры в комплект не входят
Используйте по 2 листа каждый раз


Бумага – 300 листов
Арт.08-422

Римеры и файлы можно рассортировать по длине и типу
Дужка используется в качестве опоры

Максимально допустимые размеры римеров и файлов



Размеры 74x10x52
Вместимость 8 шт
Материал POM, до 162 C
Римеры и файлы в комплект не входят. Дезинфекция в растворе

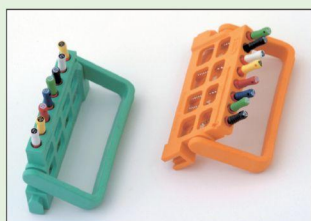

Дужка используется в качестве опоры



С измерительной шкалой



Соединяются между собой

Арт.	Цвет
08-431	Желтый
08-432	Оранжевый
08-433	Розовый
08-434	Голубой
08-435	Зеленый

Стерилизационный кейс
Арт.08-440
Вместимость 12 шт
Размеры 161x104x59
Материал перегородок PP, до 155°C
Подставки в комплект не входят



Кейс для хранения
Арт.08-439
Вместимость 18 шт
Размеры 167x126x62
Не дезинфицировать в автоклаве
Допускается использовать раствор
Подставки в комплект не входят

Стойка для буров (закрытого типа)

Арт.08-415
Возможность комбинировать инструменты под конкретного пациента. В закрытом состоянии кейс надёжно удерживает инструмент. Можно производить ультразвуковую дезинфекцию и автоклавирование вместе с римерами и файлами.

Подходящие римеры и файлы от 21 до 31 мм
Вместимость – 11 шт
Размеры 48x43x47
Пластиковые части из PP, до 155 C
Инструменты в комплект не входят



Кейс для стоек

Арт.08-416
Вместимость: 6 шт
Размеры 200x100x50
Допускается дезинфекция раствором и автоклавирование
Стойки в комплект не входят
Продаётся отдельно



Контейнер для буров

Арт. 08-43.
Высота контейнера изменяется при помощи поворота подставки за центральный штырь. Отверстия подходят для разных инструментов, в зависимости от длины, типа и номера инструмента.

Вместимость – 60шт
Размеры 100x54
Пластиковые части из PP, до 155°C
Инструменты в комплект не входят



Легкое извлечение.
Допускается заливать дез. раствор в контейнер



Эндодонтические аспираторы Тип 2

1/1

Всасывающая трубка,
насадки – 5шт,
ёршик – 1шт

Используется
для ревизии
корневых
каналов и
пульпарной
камеры.



Арт.	Наименование
13-615	Прямой
13-617	Изогнутый

Наконечник

Арт. 13-61.
Комплект – 5 шт
Продаётся отдельно

Ёршик (Ø4 мм)
Арт. 13-651
Комплект - 12 шт.

В случае, если внутренний диаметр трубки составляет 16 мм, имеется специальный переходник.

Калибратор для римеров и файлов


2/3

Арт. 21-156
18,700

В зависимости от глубины корневых каналов, можно установить ограничение длины с помощью резинового диска. Поворачивая диск, регулируется высота. 1 оборот диска равен 1 мм, оборота равна - 0,25 мм. В центральную часть калибратора также можно ставить инструменты.



Например: установка калибратора на 16.5 мм

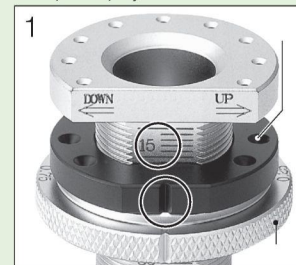

Поверните металлический диск до отметки 16 мм.



Поверните диск ещё на пол оборота до отметки 0.50. Затем совместите канавку на резиновом диске с данной отметкой.

Разброс длины от 10 до 35 мм.
Буры в комплект не входят.

Рентген - пластинки


1/1

Арт.21-157
Комплект – 2 шт

Используется для определения приблизительной глубины каналов, а также при имплантации.

Рамка

Пластина

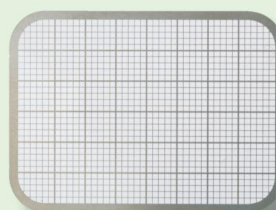


Размеры рамки 33x45
Размеры пластины 38x48x8,5
Пластина разлинована по типу «миллиметровки»

Рамка выдерживает до 260°C, выполнена из силикона.

Установка




Снимок

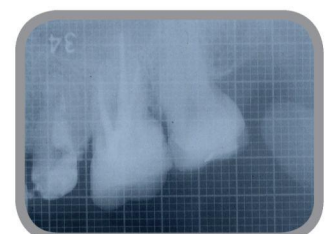

Наручная линейка

Арт. 21-155.


1/1

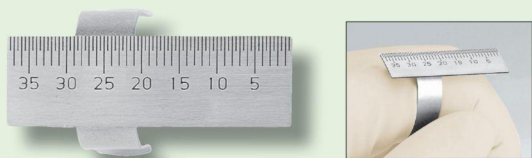

Линейка

Арт. 21-151

1/1

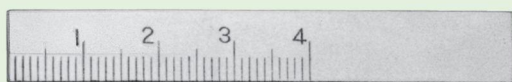

Кейс для гуттаперчи Мини

Арт. 24-017.

1/2

Имеется 7 отделений для гуттаперчевых штифтов разного типа. Штифты можно дезинфицировать в автоклаве и в растворе



Размеры 91x42x13
Зелёная часть из силикона, до 260°C
Штифты в комплект не входят


Эндодонтическая шкала

Арт. 21-154

1/1

внешняя сторона

внутренняя сторона

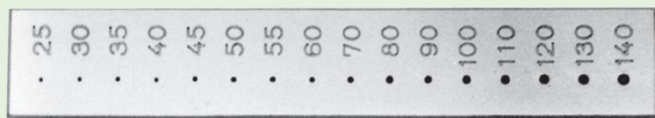

Щипцы для корневых каналов

Арт. 08-06.

Используются при пломбировании каналов моляров и премоляров верхней и нижней челюсти. Надежно удерживают штифт при манипуляциях.




1/1



Щипцы для корневых каналов

Идеальны для извлечения штифтов из корневых каналов. Обеспечивают надежный захват, благодаря нарезке

1/1

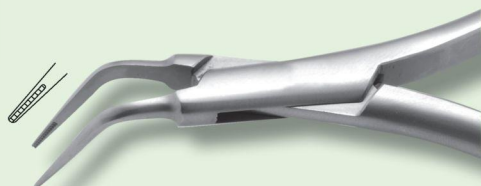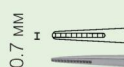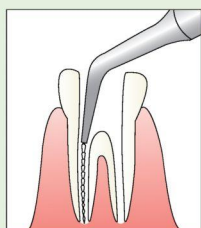


Прямые
Арт. 18-910

Изогнутые
Арт. 18-911

Зонды стоматологические

1/1

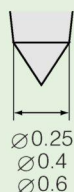


№0.25 S
Арт. 08-001

№0.4 S
Арт. 08-002

№0.6 S
Арт. 08-003

№0.25 L
Арт. 08-004

№0.4 L
Арт. 08-005

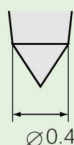

№1
Для передних зубов
Арт. 08-011

№2
Для верхней челюсти
Арт. 08-012


№3
Для нижней челюсти
Арт. 08-013

Зонды Ultra

1/1



Суперэластичный сплав!

Благодаря хорошей гибкости, подходит для работы со сложными корневыми каналами

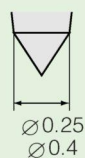

№0.25S
Арт. 08-032

№0.4S
Арт. 08-033

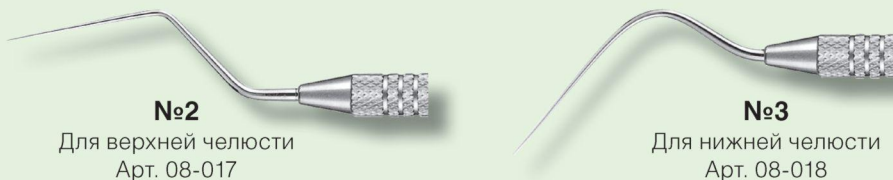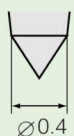

№2
Для верхней челюсти
Арт. 08-017

№3
Для нижней челюсти
Арт. 08-018

Сменные зонды и ручки для них

2/3

В разобранном виде



Можно свободно комбинировать насадки и ручки
Перед дезинфекцией или стерилизацией снимайте насадки для предотвращения коррозии

Односторонняя

Двусторонняя



P-A 8 mm
Арт. 10-201



P-B 8 mm
Арт. 10-202




P-F 6 mm
Арт. 10-205




P-C 6 mm
Арт. 10-203

Наконечники

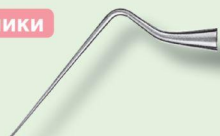

#0.25S
Арт. 23-551
Комплект – 3 шт

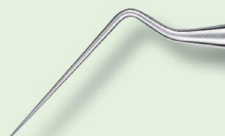

#0.4S
Арт. 23-552
Комплект – 3 шт

1/1

Зонд двусторонний

Арт. 08-01.

1/1



Спредер

Арт. 08-02.
Комплект - 3 шт

1/1



Спредер


Арт. 08-02.
Комплект - 3 шт

1/1



Спредер

Сочетает в себе 2 инструмента, что позволяет утрамбовать материал, сразу после его обрезки. Благодаря утолщению на одном из концов инструмента, дольше сохраняет высокую температуру, после нагрева.

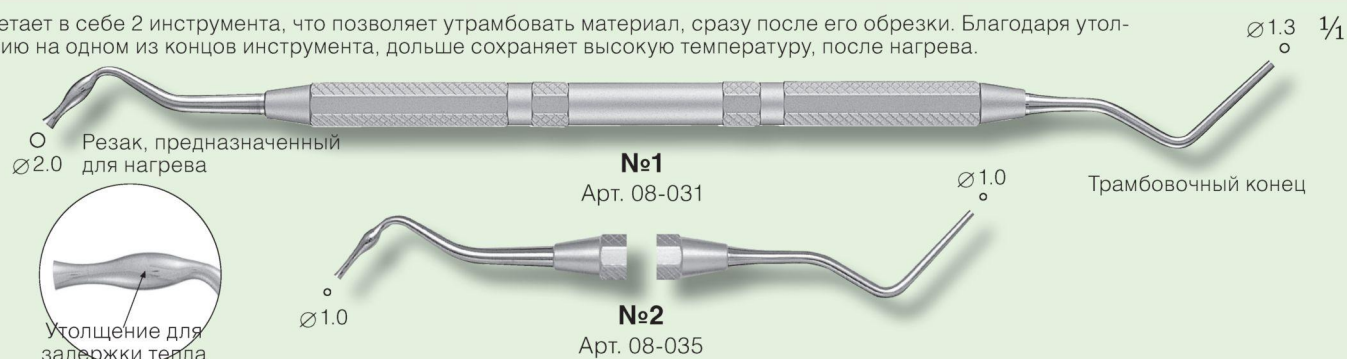


Нож для гуттаперчи

Арт. 08-03. Позволяет обрезать штифты даже в глубоких полостях.


1/1



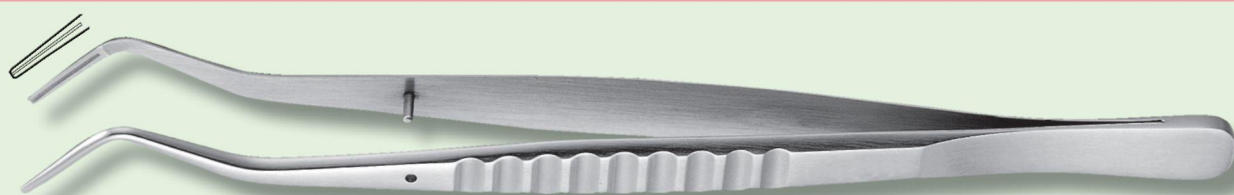


№1
Арт. 11-311

Длина 160 мм

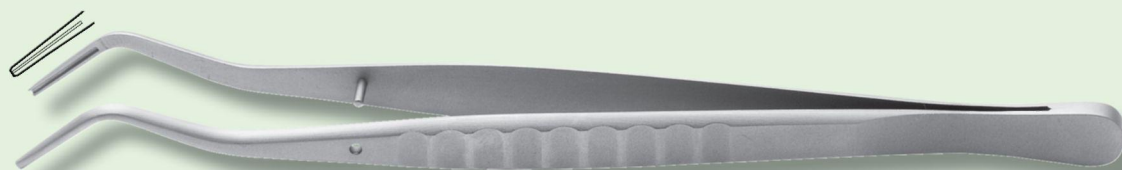


Mini №1
Арт. 11-318

Длина 145 мм

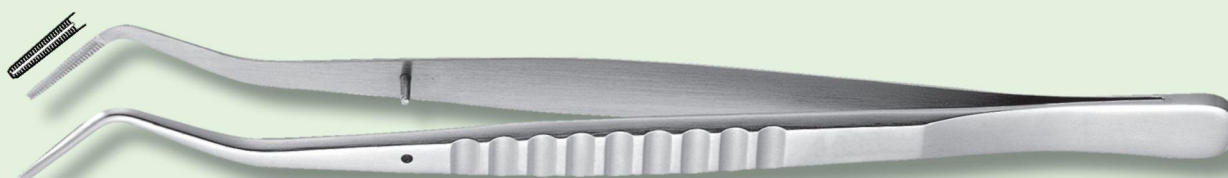


№2
Арт. 11-312

Длина 160 мм

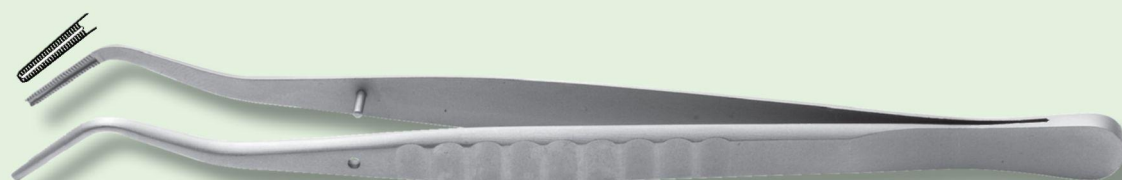

Мини №2
Арт. 11-319


Длина 145 мм

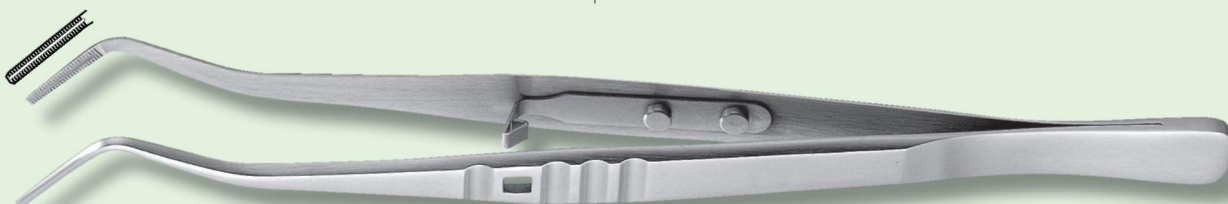

С защелкой
Арт. 11-316



№3
Арт. 11-113

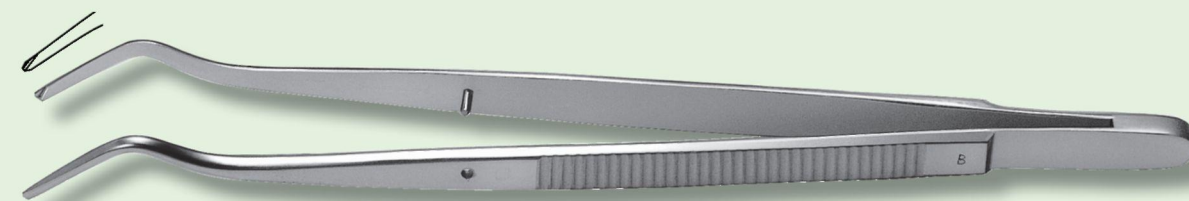

Beach
Арт. 11-117

Арт. 08-07.

Аккуратно обрезает стекловолокно на требуемую длину, не разволокня штифт.

1/1



Обрезаемая часть не отлетает в сторону, а остаётся в держателе.
На держателе нанесена шкала длины от 5 до 15 мм

Материал держателя ТРХ, до 160°C



Держатель

Арт. 90-39.


Продается отдельно

Набор для установки коронок на штифтово-культевую вкладку

Установщик коронок, плоские резиновые диски и диски со стержнем – по 2 шт, ключ.
Арт. 13-230

1/1

Не позволяет коронке сместиться во время затвердевания, благодаря тому, что пациент зажимает диски во рту

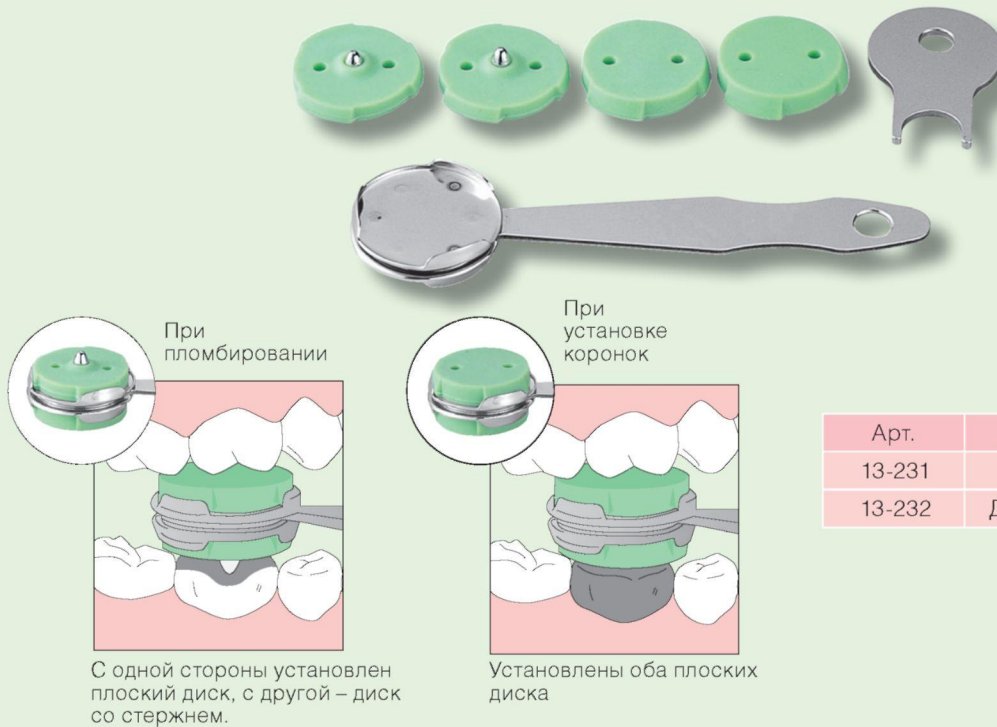


Диски выполнены из силикона, до 260°C

Автоматический молоточек

Арт. 06-09.

1/1

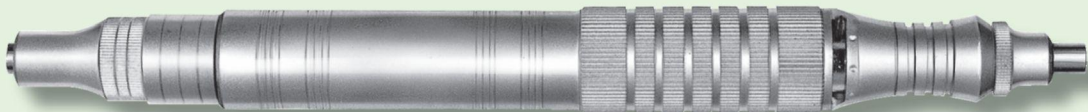

Используется с деревянными насадками
Не дезинфицировать в автоклаве

Рукоятка для деревянных наконечников

Арт. 06-09.

1/1



Используется с деревянными насадками

Насадки из дерева

Комплекты по 3 шт

1/1



№1

Арт. 13-115



№3

Арт. 13-117

Не дезинфицировать в автоклаве



Для верхней челюсти:

Передние зубы	1
Малые коренные	32;4
Большие коренные	10S
Зубы мудрости	8
Удаление корней	65;69;Новинка
Разделение корней	67

Для нижней челюсти:

Передние зубы	46
Малые коренные	21;4
Большие коренные	17,27
Зубы мудрости	222
Удаление корней	44,69;Новинка
Разделение корней	66




Отличаются превосходной прочностью и качеством сборки. На внутренней стороне рукоятки пропечатана зубная формула



№1

Для удаления резцов и клыков верхней челюсти

Арт. 17-001

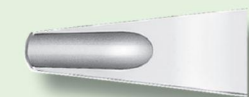

№46

Для резцов и клыков нижней челюсти

Арт. 17-046



№32

Для удаления корней зубов на верхней челюсти

Арт. 17-032



№21

Для удаления премоляров нижней челюсти


Арт. 17-021



№4

Для удаления премоляров верхней и нижней челюсти

Арт. 17-004

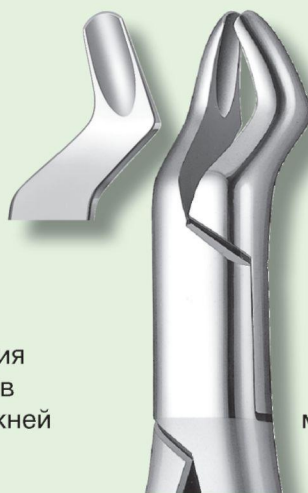

№10S

Для удаления моляров верхней челюсти

Арт. 17-010



№17

Для удаления моляров нижней челюсти

Арт. 17-017




№27
Для премоляров
Нижней челюсти
Арт. 17-027



№8
Для удаления
зубов мудрости
верхней челюсти
Арт. 17-008



№222
Для удаления
зубов
мудрости
нижней
челюсти
Арт. 17-222

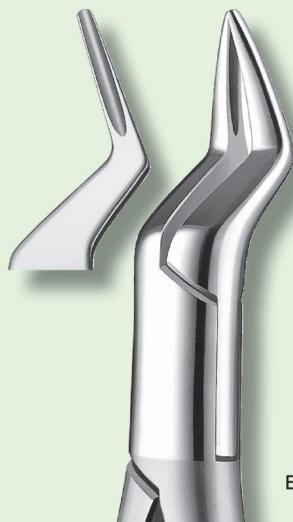

№65
Для удаления
корней зубов
верхней челюсти
Арт. 17-065



№44
Для удаления
корней зубов
нижней челюсти
Арт. 17-044



№69
Для удаления
корней зубов
нижней и
верхней челюсти
Арт. 17-069



Для удаления
корней зубов
нижней и
верхней челюсти.
Новинка.
Арт. 17-070



№67
Для
разделения
корней
жевательных
зубов верхней
челюсти
Арт. 17-067



№66
Для разделения
корней
жевательных
зубов нижней
челюсти
Арт. 17-066

для верхней челюсти:

передние зубы 1

задние зубы 10S; 4

для удаления остатков корней 69

для нижней челюсти:

передние зубы 46

задние зубы 21, 27, 4



№1

Для удаления резцов и клыков верхней

челюсти

Арт. 17-501



№46

Для удаления
резцов и клыков
нижней челюсти

Арт. 17-546



№10S

Для удаления
моляров верхней
челюсти

Арт. 17-510



№21

Для удаления
моляров нижней
челюсти

Арт. 17-521



№27

Для удаления
моляров нижней
челюсти

Арт. 17-527



№4

Для удаления
моляров и
премоляров верхней
и нижней челюсти

Арт. 17-504




№69

Для удаления
корней зубов
верхней и
нижней челюсти

Арт. 17-569

Форма губок позволяет уверенно захватывать зубы любой формы. Благодаря рифленным рукояткам, можно более тонко чувствовать инструмент.

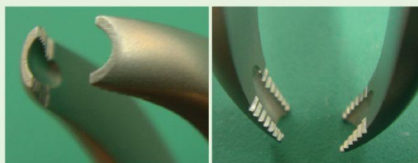

Уверенно захватывают шейку зуба




Длина 147 мм

№An
Для фронтальных
молочных зубов
Арт. 17-570



Длина 146 мм


№Po-U
Для жевательных
зубов верхней
челюсти
Арт. 17-571

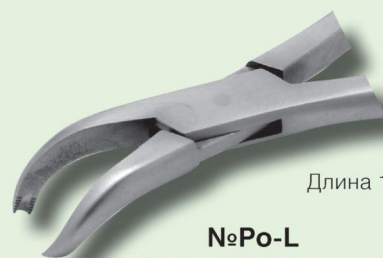

Длина 146 мм

№Po-L
Для жевательных
зубов нижней
челюсти
Арт. 17-572

Удаление
фронтальных
зубов

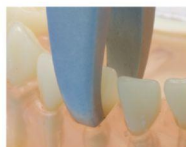

Удаление
жевательных
зубов



Щипцы для удаления корней зубов на нижней челюсти

Удобны при работе с труднодоступными местами, благодаря узким губкам с насечками

3/4



Щипцы Rongeurs Hirakawa для удаления корней зубов

1/1



Щипцы Rongeurs для удаления корней зубов

Идеально подходят для удаления обломков костей благодаря тонким губкам. Также подходят для удаления гранулём.



4/5



Щипцы Rongeurs усиленные для удаления корней зубов

Благодаря дополнительному соединению в 2х местах, нагрузка распределяется эффективней, при меньших усилиях.

2/3

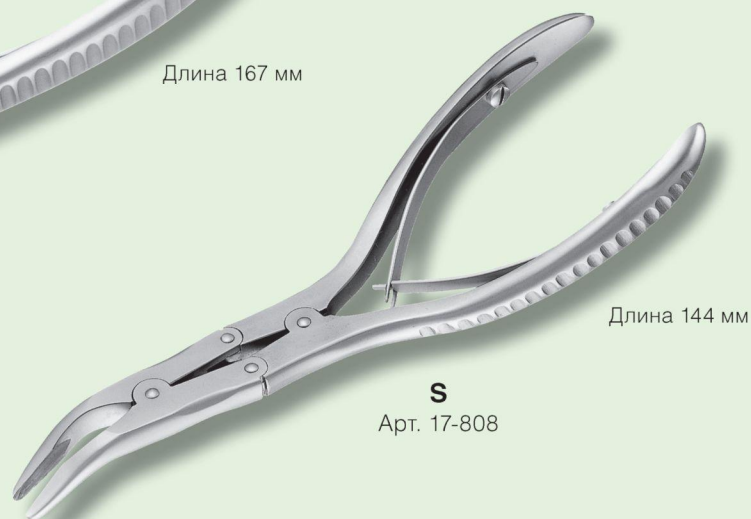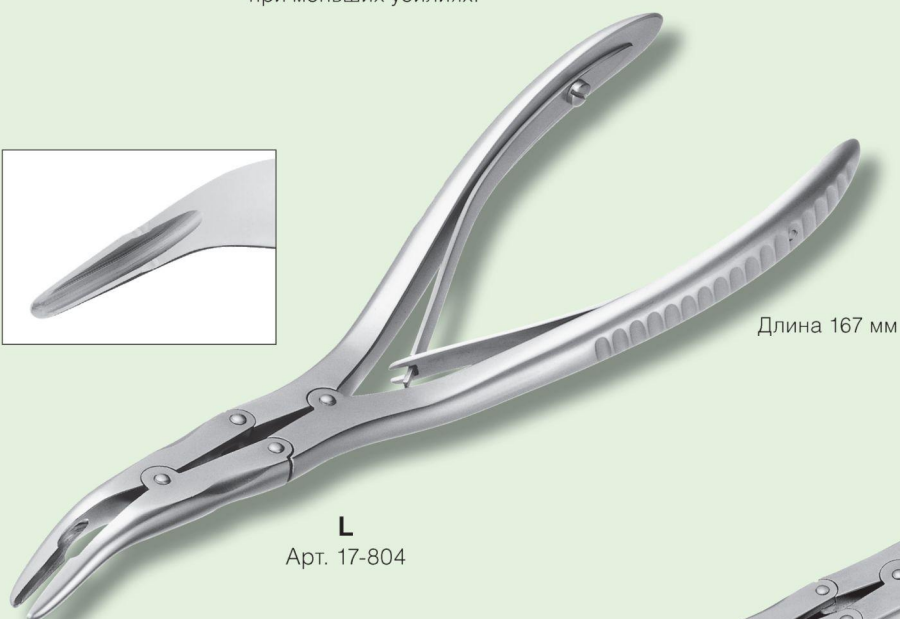

Москит



Прямые
Арт. 29-001



Изогнутые
Арт. 29-002



Кохер
Арт. 29-003



Пean
Арт. 29-004

Кюретажные ложки

1/1



Кюретажная ложка окончатая

Арт. 14-319

1/1



1/1



Благодаря длинной и узкой форме носиков, удобно работать как с фронтальной, так и с жевательной группой зубов. Пружина облегчает захват мягких тканей

1.5 мм




Длина 162 мм

Slim

Арт. 14-321



2/1

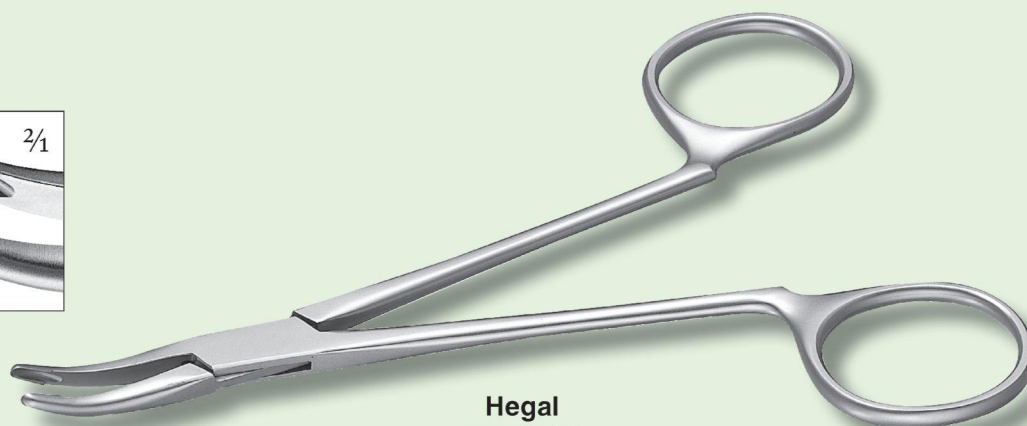

Длина 131 мм

Hegal

Арт. 14-320

Элеваторы с широкой лопаткой.
Специальное покрытие ручки надежно удерживает инструмент в руке,
предотвращая проскальзывание



№NM1
Ширина 5.0 мм
Арт.
16-055



№NM2
Ширина 4.5 мм
Арт.
16-056



№NM3
Ширина 4.0 мм
Арт.
16-057



№NM2A
Ширина 4.5 мм
Арт.
16-058



Для зубов мудрости



№NM2
Ширина 4.5 мм
Арт.
16-095



№NM2A
Ширина 4.5 мм
Арт.
16-098



#NM2



#NM2A

Рабочая длина увеличена на 10 мм.
Углубление для пальца облегчает манипуляции с
инструментом, и не позволяет соскальзывать.
На рукоятку нанесена печать «WT»

Прямые



№1S
Ширина
4.0 мм
Арт.
16-121



№2S
Ширина
3.5 мм
Арт.
16-122



№3S
Ширина
3.0 мм
Арт.
16-123



№4S
Ширина
2.5 мм
Арт.
16-124



№5S
Ширина
2.0 мм
Арт.
16-125



№1C
Ширина
4.0 мм
Арт.
16-126



№2C
Ширина
3.5 мм
Арт.
16-127



№3C
Ширина
3.0 мм
Арт.
16-128



№4C
Ширина
2.5 мм
Арт.
16-129



№5C
Ширина
2.0 мм
Арт.
16-130

Изогнутые

Ручка В

Прямые

Специальное покрытие ручки надежно удерживает инструмент в руке, предотвращая проскальзывание



№1S

Ширина 4.0 мм
Арт. 16-101



№2S

Ширина 3.5 мм
Арт. 16-102



№3S

Ширина 3.0 мм
Арт. 16-103



№4S

Ширина 2.5 мм
Арт. 16-104



№5S

Ширина 2.0 мм
Арт. 16-105

Изогнутые



№1C

Ширина 4.0 мм
Арт. 16-106



№2C

Ширина 3.5 мм
Арт. 16-107



№3C

Ширина 3.0 мм
Арт. 16-108



№4C

Ширина 2.5 мм
Арт. 16-109



№5C

Ширина 2.0 мм
Арт. 16-110

С насечками



увеличение



**№1C
с насечками**

Ширина 4.0 мм
Арт. 16-021



**№3C
с насечками**

Ширина 3.0 мм
Арт. 16-023



**№5C
с насечками**

Ширина 2.0 мм
Арт. 16-025

Для зубов мудрости

Рабочая длина увеличена на 20 мм, по сравнению с обычным элеватором. Углубление для пальца облегчает манипуляции с инструментом, и не позволяет соскальзывать. На рукоятку нанесена печать «WT»



Для зубов мудрости №1
С неглубоким изгибом
Ширина 3.0 мм
Арт. 16-065



Для зубов мудрости №2
С глубоким изгибом
Ширина 3.0 мм
Арт. 16-066



Для зубов мудрости №3
С изгибом в обратную сторону
Ширина 3.0 мм
Арт. 16-067

Дополнительно



№20A
Ширина 3.5 мм
Арт. 16-013




№21A
Ширина 3.5 мм
Арт. 16-014

Элеваторы для удаления фрагментов корней

Специальное покрытие ручки надежно удерживает инструмент в руке, предотвращая проскальзывание


1/1

Рабочая часть

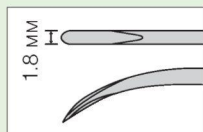

№1S

Арт. 16-075

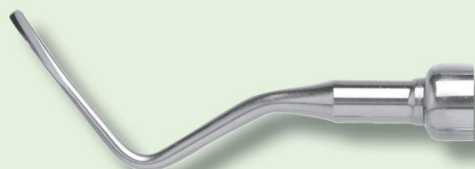

№2A

Арт. 16-076



№3A


Арт. 16-077

Элеваторы для удаления фрагментов корней

Специальное покрытие ручки надежно удерживает инструмент в руке, предотвращая проскальзывание

1/1

Рабочая часть

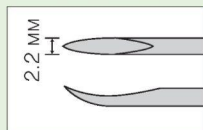

№1S

Арт. 16-085



№2A

Арт. 16-086



№3A

Арт. 16-087




**Элеватор
двусторонний**

Арт. 14-601

Распаторы

1/1

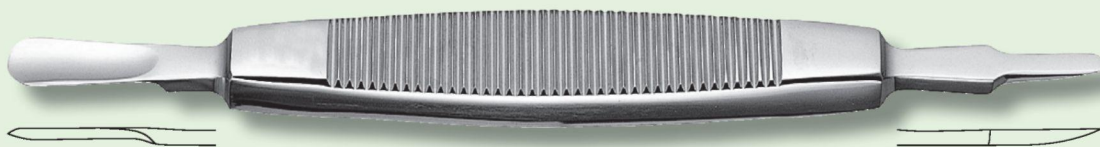

№13
Арт. 15-130




№9
Арт. 14-209


Распаторы

Комплект из 2-х инструментов
Арт.14-240

1/1

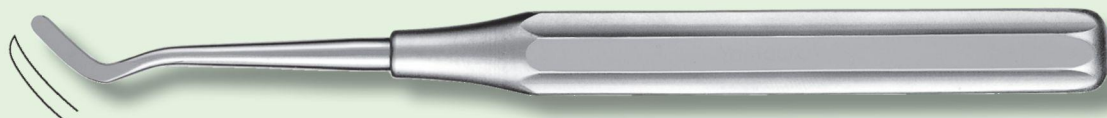

№1
Арт. 14-241

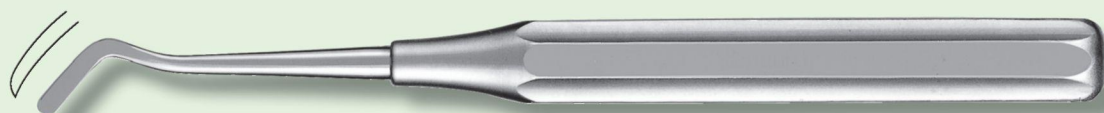

№2
Арт. 14-242



№7B
Арт. 14-235



№14
Арт. 15-140



Nanaura
Арт. 14-230



№13
Арт. 15-313




Molt
Арт. 29-051



Freer
Арт. 29-052



Freer №15
Арт. 30-012

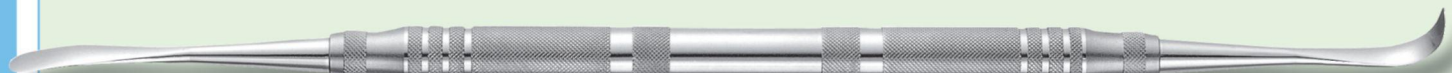

№16
Арт. 30-013

Завинчивающегося типа

Шприцы имеют удобную форму ручек. Разборный механизм облегчает стерилизацию



A

Арт. 14-105
Для инфильтрационной анестезии



B

Арт. 14-106
Для проводниковой анестезии



1 mL

Арт. 14-115
Для карпул объема в 1 мл

С замком



A

Арт. 14-113
Для инфильтрационной анестезии



B

Арт. 14-114
Для проводниковой анестезии

Продается отдельно



Завинчивающийся колпачок
Арт. 90-209



Колпачок типа «Lure lock»
Арт. 90-320



1 mL

Арт. 14-116
Для объема в 1 мл

Части черного цвета из PPS, до 260°C

Новинка
Твердосплавный
Арт. 14-505



Длина 170 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Nanaura



Длина 168 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Прямой
Арт. 14-501

Изогнутый
Арт. 14-502

Pelio



Длина 140 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0


Прямой
Арт. 14-506

Изогнутый
Арт. 14-509

Носик изогнут под углом 30 градусов, для удобства работы в области моляров



Когда инструмент повернут изгибом вниз, то рабочая часть располагается параллельно зубному ряду, что обеспечивает удобство в работе

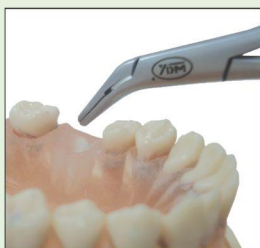

Когда инструмент повернут изгибом вверх, не травмируются соседние зубы, что также облегчает манипуляции

Pelio для коренных зубов
Арт. 14-520



Длина 140 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Mathieu
твердосплавный



Длина 141 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0



Прямой
Арт. 29-012



Изогнутый
Арт. 29-017

Stille
твердосплавный



Длина 170 мм
Хирургическая нить 4,0-6,0

L
Арт. 14-513



Благодаря тонкому носику удобнее проводить деликатные операции



Длина 140 мм
Хирургическая нить 4,0-6,0

S
Арт. 14-514

Crile
Арт. 14-519



Длина 152 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Операции выполняются быстрее,
т. к. на инструменте отсутствует защелка

Castroviejo



Длина 138 мм
Хирургическая нить 5,0-6,0

Прямой
Арт. 14-511

Изогнутый
Арт. 14-512

**Castroviejo
Твердосплавный**



Длина 138 мм
Хирургическая нить 5,0-6,0


Прямой
Арт. 29-011

Изогнутый
Арт. 29-015

**Для лечения «Волчьей пасти»
Твердосплавный**
Арт. 14-521




Меньше усталости в руке, благодаря мягкому ходу защелки. Удобно лежит в руке, за счет тонких рукояток и рифленой поверхности посредине.

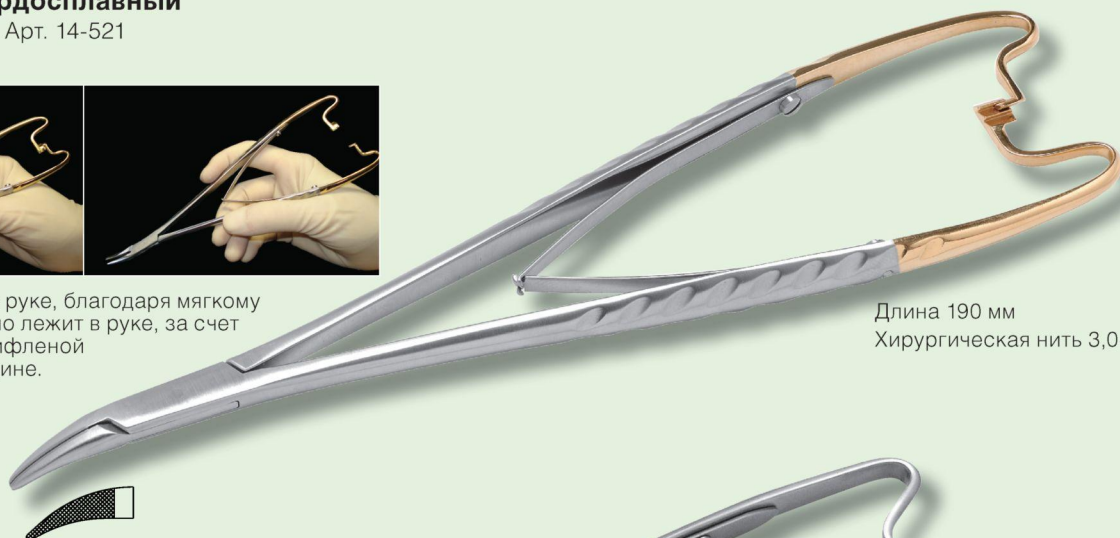

Длина 190 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

France Type
Арт. 15-170

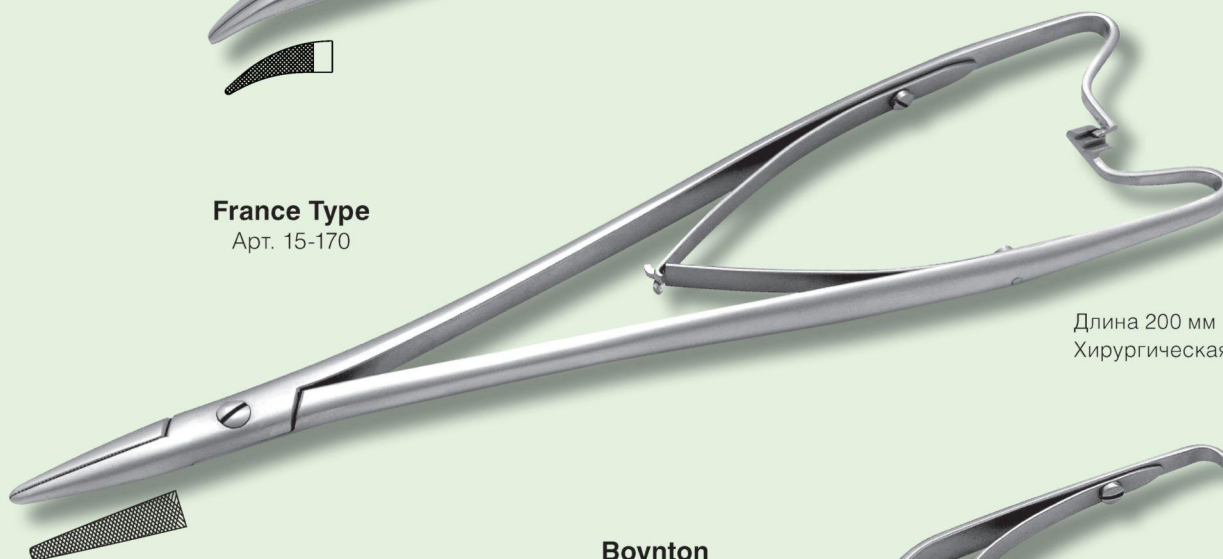

Длина 200 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Boynton
Арт. 14-504



Длина 120 мм
Хирургическая нить 5,0-6,0

Hegar
Твердосплавный
Арт. 14-510



Длина 163 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Baby-Crile-Wood
Арт. 29-014



Длина 149 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Halsey
Арт. 29-013




Длина 129 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Ryder
Арт. 14-515




Длина 138 мм
Хирургическая нить 4,0-6,0

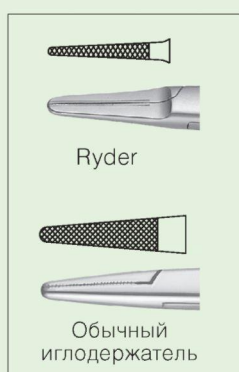

Иглодержатели


Предназначен как для шитья, так и для резки
Заменяет 2 инструмента и увеличивает скорость работы

S
Твердосплавный
Арт. 14-507

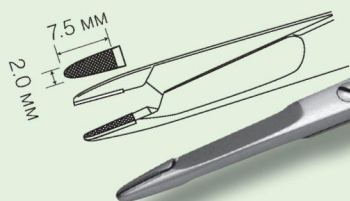

Длина 145 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

L
Твердосплавный
Арт. 14-508

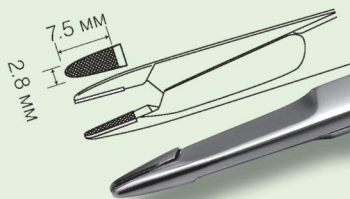


Длина 170 мм
Хирургическая нить 3,0-5,0

Скальпели

1/4



Прямой
Арт. 14-001

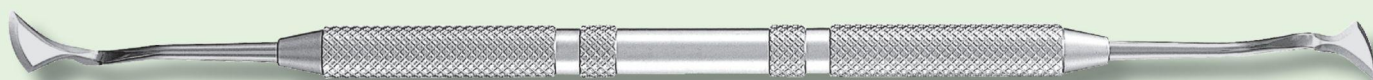

Kaulckland
Арт. 29-071




наконечник



Скальпель для очистки лунки удаленного зуба
Арт. 14-003

Удобен при очистке лунки после удаления зуба.
Кончик имеет треугольную форму и три режущих кромки

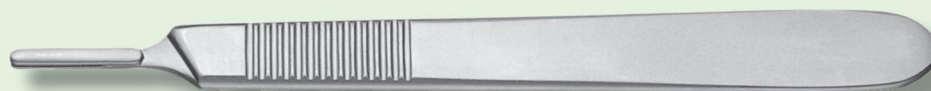

№3
Арт. 29-091



Прямой
Арт. 15-305



С поворотом на 360°
Арт. 15-306

Инструмент позволяет выполнить разрез в любом отделе полости рта

Щипцы для замены лезвий

Арт. 14-050

Плавная и безопасная замена лезвий



Долото для кости

1/1

Используются для отделения костных блоков.



Клиновидное

Ширина 4.0 мм
Арт. No.14-010



Заточенное с одной стороны

Ширина 3.5 мм
Арт. No.14-011




С канавкой

Ширина 3.5 мм
Арт. No.14-012


Долото для кости

1/1

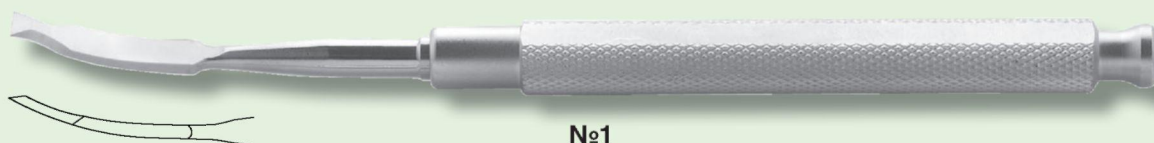

№1

Ширина 5.0 мм
Арт. No.09-212

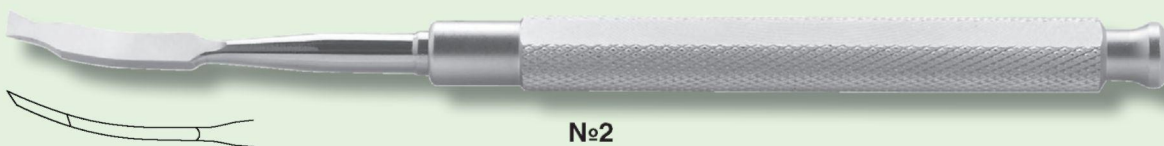

№2

Ширина 5.0 мм
Арт. No.09-213



№3

Ширина 4.0 мм
Арт. No.09-215



№4

Ширина 4.0 мм
Арт. No.09-214

Молотки позволяют наносить удары по долоту не повреждая инструмент.



Молоток деревянный
Арт. No.14-671

Длина 232 мм
Вес 84 г

не дезинфицировать в автоклаве



Универсальный
Арт. No.14-672

Вес 120 г

Материал вставок PTFE, до 260°C



Хирургический жесткий
Арт. No.15-211

Вес 220 г

Материал вставок PFA, до 260°C



Хирургический мягкий
Арт. No.15-210


Вес 220 г

Материал вставок - силикон, до 260°C

Используются для получения костной стружки

Арт. No.14-400
Комплект состоящий из 3 шт

1/1

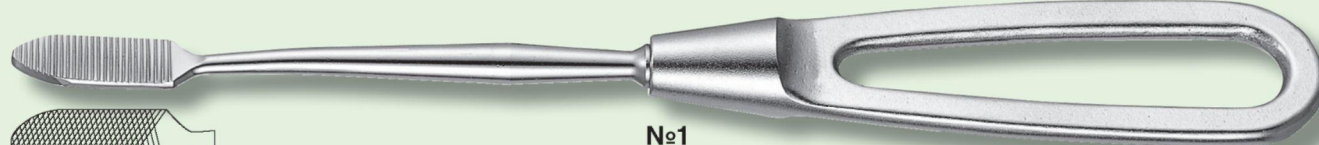

№1

Арт. No.14-401



Оборотная сторона



№2

Арт. No.14-402



Оборотная сторона



№3

Арт. No.14-403



Оборотная сторона



Выпуклый

Арт. No.14-421




Ровный

Арт. No.14-422




№11

Арт. No.14-411

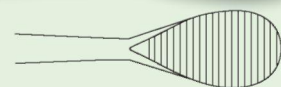

№12




Арт. No.14-412

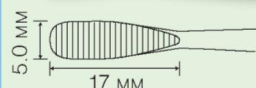

Mini

Арт. No.14-413

Меньше №12 на 1 размер

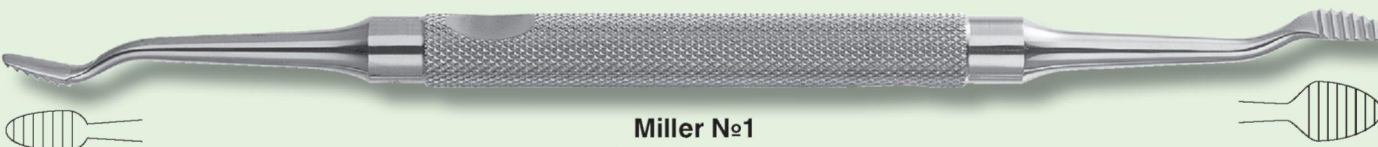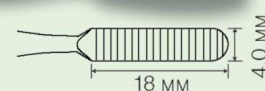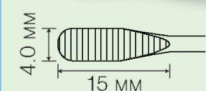


Miller №1

Арт. No.29-061



Miller №2

Арт. No.29-062

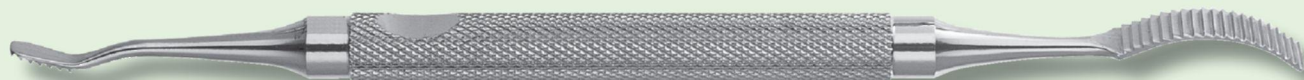

Miller №3

Арт. No.29-063



Роторасширители

3/4

Histel

Арт. No.14-641




Длина 135 мм

Силиконовые колпачки

Для модели Histel (8 мм)
Арт. 90-393
Комплект - 2шт

Для модели Rosel Ken (7 мм)
Арт. 90-394
Комплект - 2 шт

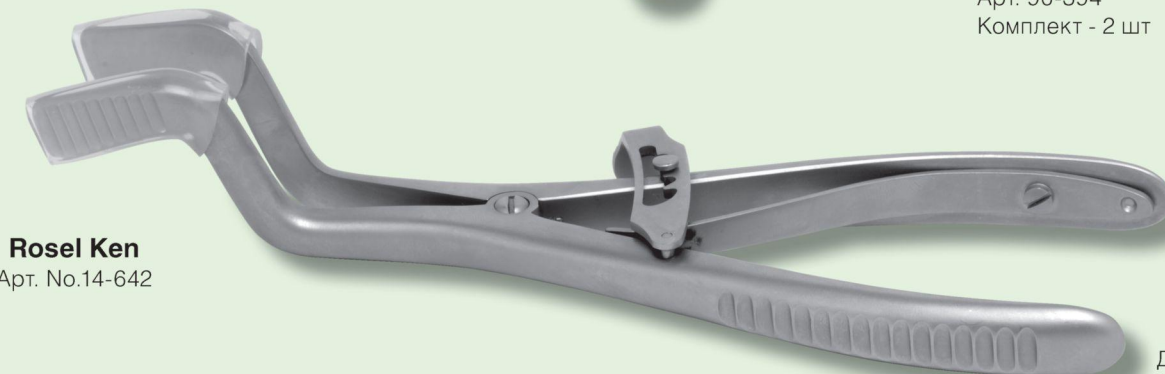

Длина 185 мм


Rosel Ken

Арт. No.14-642

Материал колпачков – силикон, до 260°C

Ретракторы для мягких тканей, остроконечные

1/1

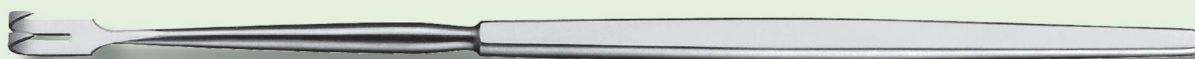

Двузубый

Арт. No.14-652



Трехзубый

Арт. No.14-653

Ретракторы для мягких тканей, с закругленными концами

1/1



Двузубый

Арт. No.29-081



Трехзубый

Арт. No.29-082

Блокираторы языка

Стандартный
Арт. No.14-661



Длина 146 мм

3/4

Зубчатый
Арт. No.14-660



Длина 158 мм

Надежно удерживает язык, благодаря покрытию, предотвращающему соскальзывание

Ретрактор Farabeuf

Арт. No.14-656
Комплект - 2 шт




2/3

L-образный ретрактор

Арт. No.15-314

Прекрасно подходит для смещения тканей при проведении операций

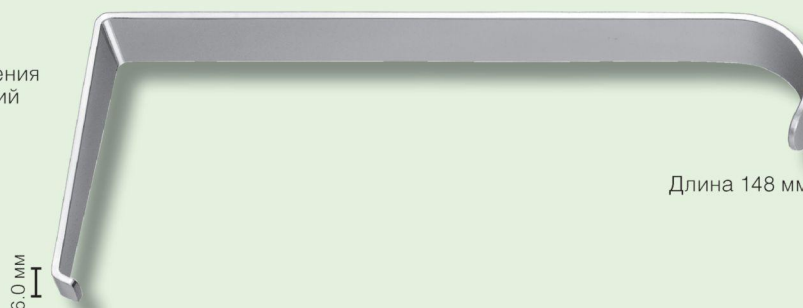

Длина 148 мм

2/3

Ретрактор

Арт. No.14-620

Для защиты надкостницы при удалении костной ткани. А также для защиты уголков рта и языка



Длина 151 мм

3/4

Ретрактор Sternberg

Арт. No.14-662



Длина 127 мм

3/4



Удобно подцеплять нить благодаря крючку на конце ножниц




Удобны при работе с задней поверхностью коренных зубов



Благодаря закруглениям на концах, нет опасности травмирования десневой ткани



Благодаря тонким и закругленным кончикам, позволяют проникать в труднодоступные участки

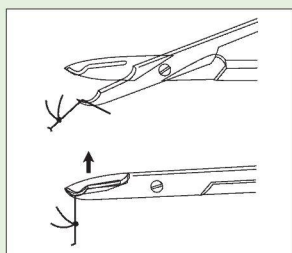

Позволяют удалить отрезанную нить одним движением

Spencer прямые

Арт. No.29-026



Spencer изогнутые

Арт. No.29-029



Safety

Арт. No.12-828



Slim

Арт. No.12-831



One-Touch

Арт. No.12-829



№18
Арт. No.15-180



**Goldman-fox
№1**
Арт. No.12-801



**Goldman-fox
№1 TC**
Арт. No.12-803



**Goldman-fox
№2**
Арт. No.12-802




№22

Арт. No.12-822

**№27**

Арт. No.12-827

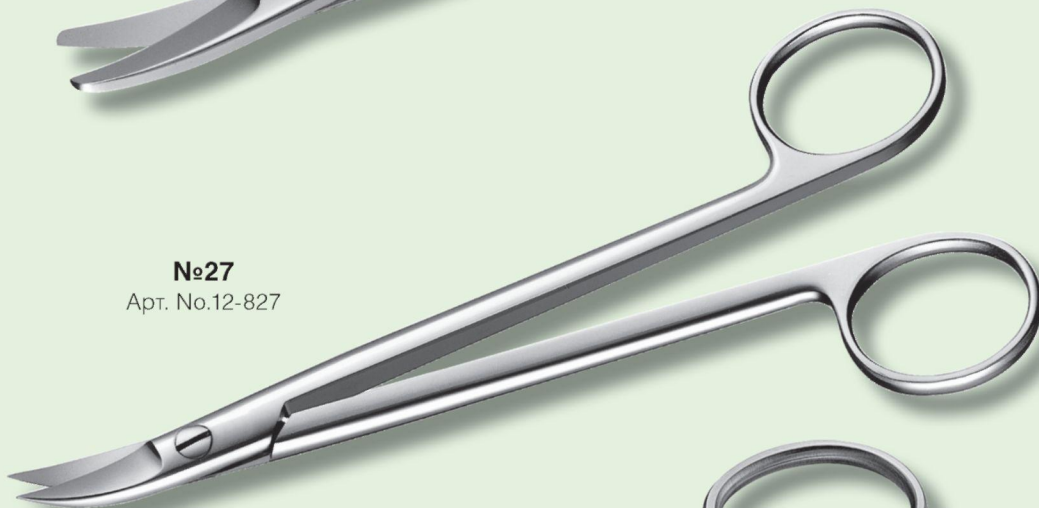**Josef**

Арт. No.12-830



Благодаря длинным ручкам удобно работать в области моляров и премоляров


Iris**Прямые**

Арт. No.29-021

**Изогнутые**

Арт. No.29-022

Castroviejo

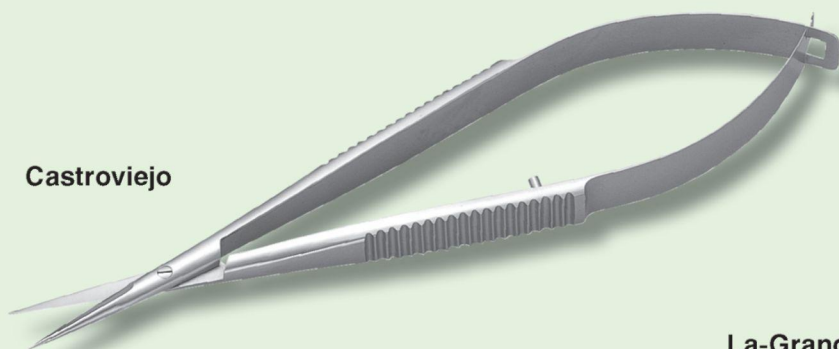

La-Grange
Арт. No.29-023



Прямые
Арт. No.29-027



Изогнутые
Арт. No.29-028

Зажимы для салфеток

Для тканевых тампонов
Арт. No.13-417




Для бумажных тампонов
Арт. No.13-418




С зубцами


1/1

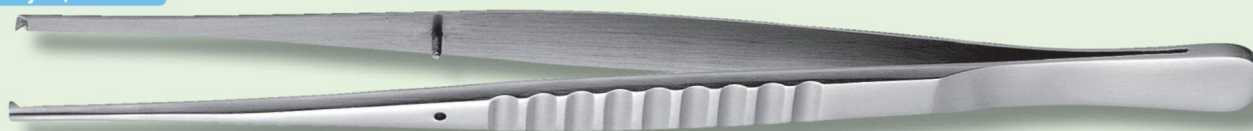

Прямые
Арт. No.11-333

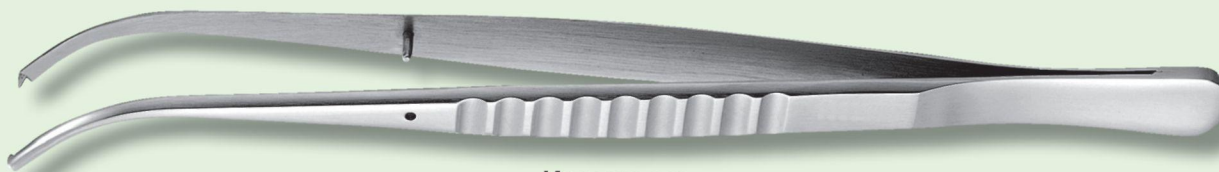


Изогнутые
Арт. No.11-334

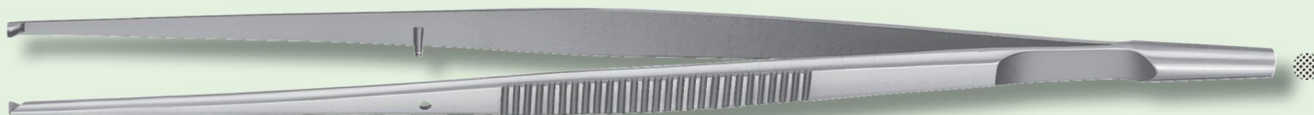


№4
Арт. No.15-040

Без зубцов

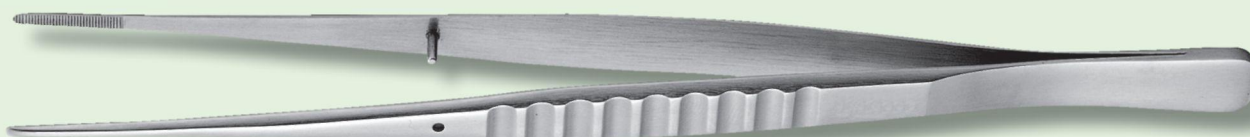


Прямые
Арт. No.11-331

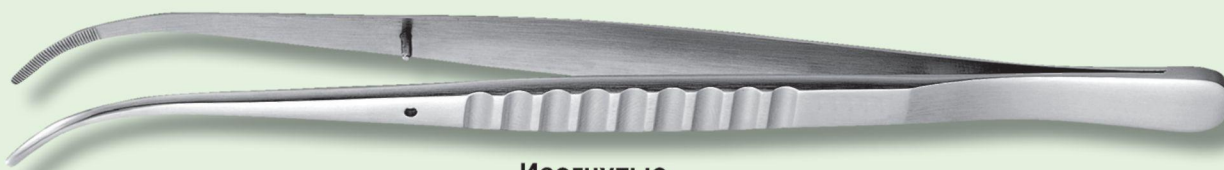


Изогнутые
Арт. No.11-332

Используется при операциях для отметки дна зубных карманов

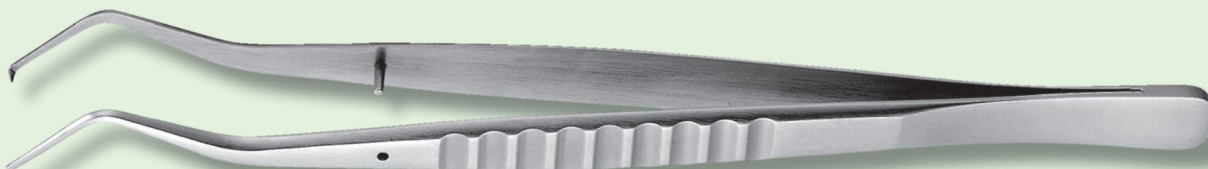


№1
Арт. No.11-321

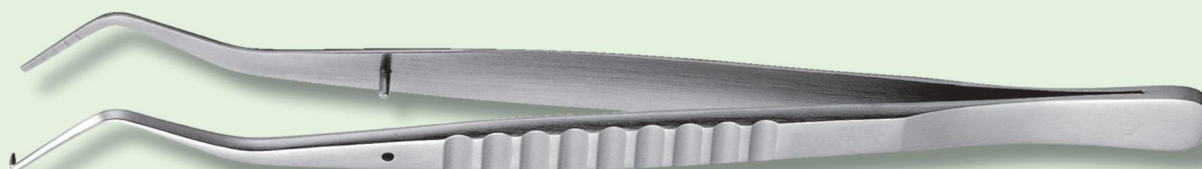

№2
Арт. No.11-322

Выполнены с кюретами на концах. Удобны при удалении лишних тканей.

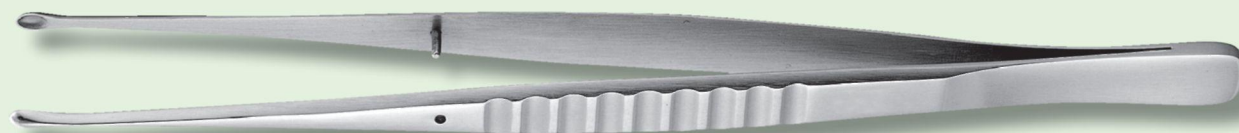

3.1 мм
4.5 мм


Прямой L

Арт. No.11-323



Изогнутый L


Арт. No.11-324

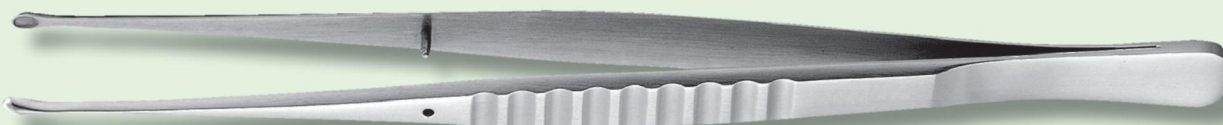

2.6 мм
4.0 мм

Прямой S

Арт. No.11-325

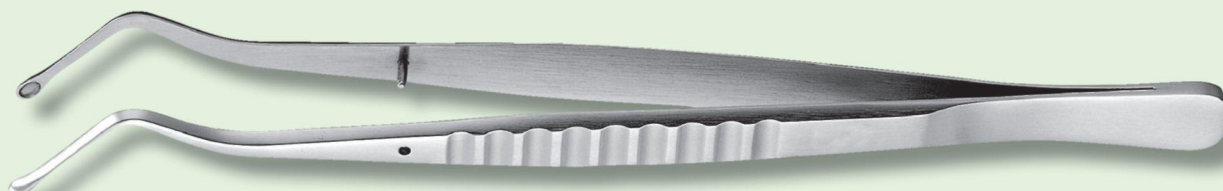

Изогнутый S


Арт. No.11-326

Дополнительно




Lucas

Арт. No.11-210

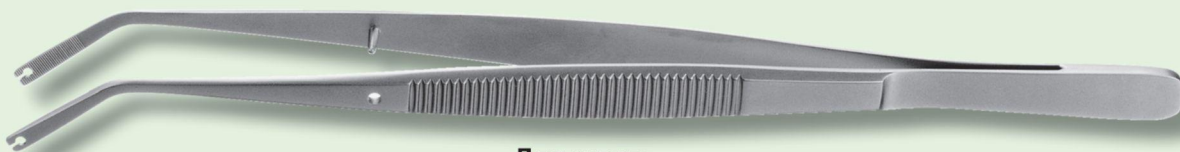


Для швов

Арт. No.11-216

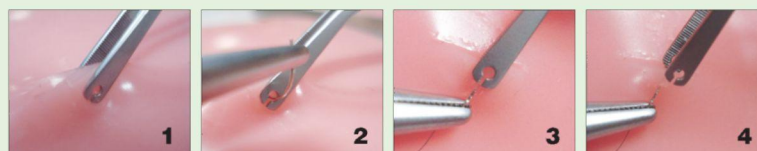

Используются для мягких тканей, при операциях и наложении швов

1/1

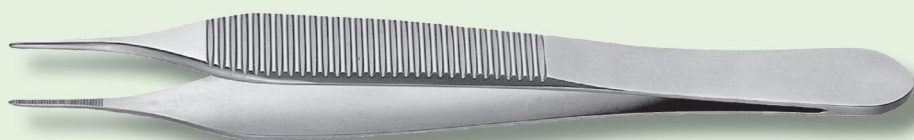


**Adson с зубцом
Прямой**
Арт. No.29-041



**Adson без зубца
Прямой**
Арт. No.30-041



Adson Brown
Арт. No.29-042

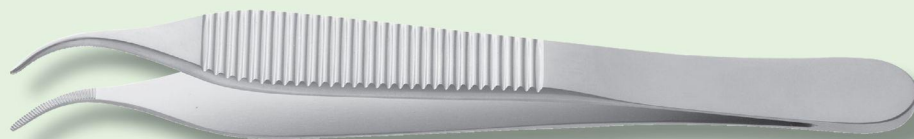

**Adson с зубцом
Изогнутый**
Арт. No.29-045




**Adson без зубца
Изогнутый**
Арт. No.29-046


Adson без зубца, изогнутый



Широкие лапки с насечками надежно удерживают ткань

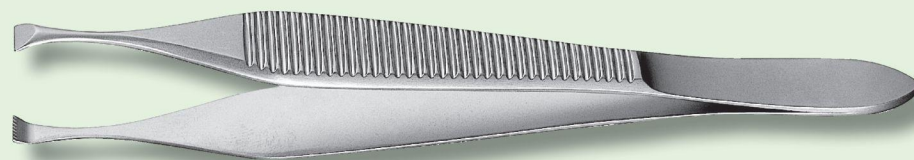


Прямой
Арт. No.29-043

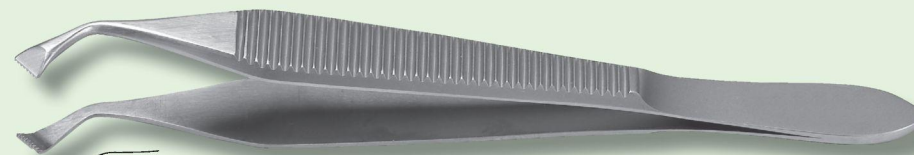

Изогнутый
Арт. No.29-044

Основные части

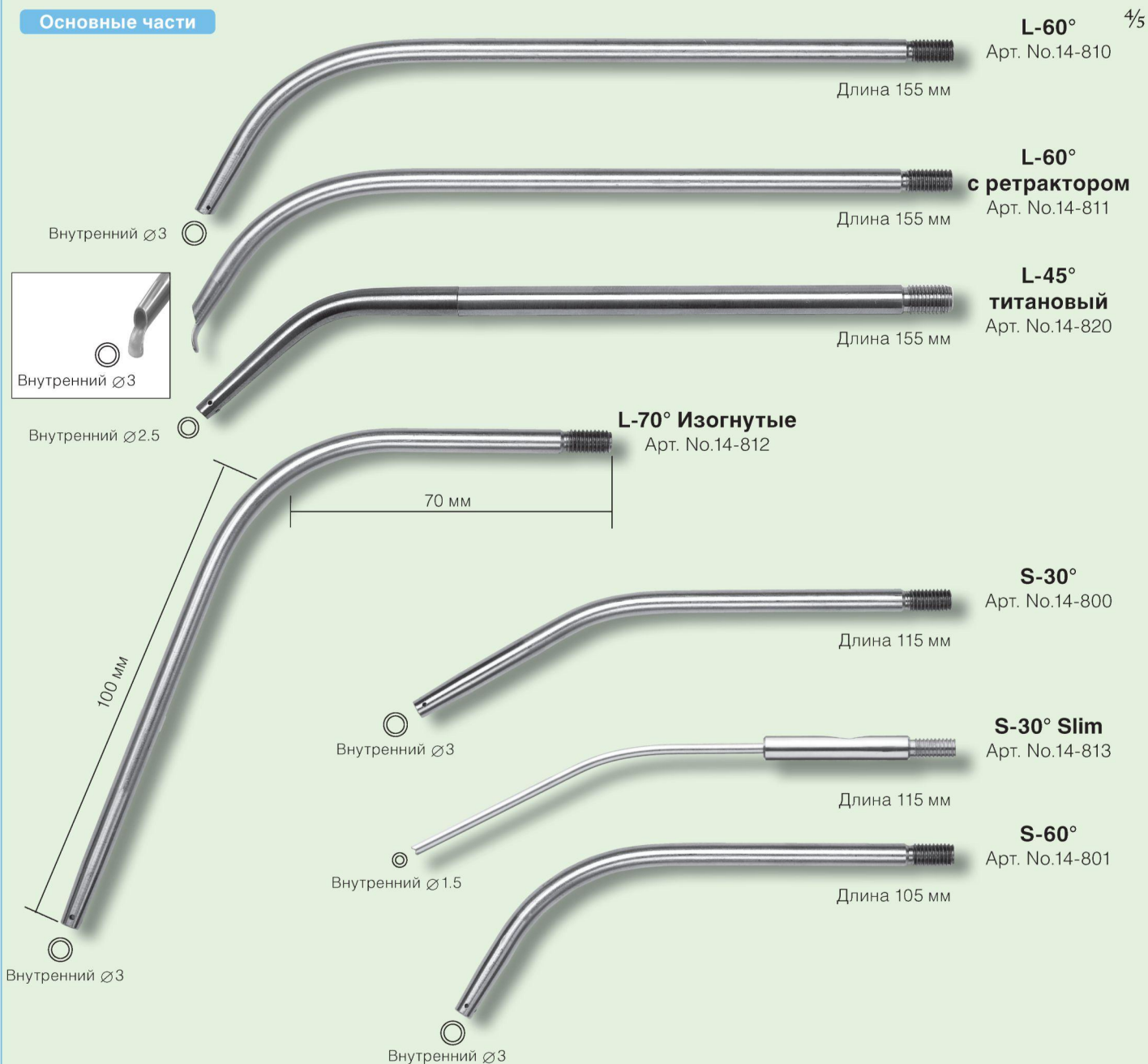

Коннекторы

Коннекторы S



S-внутр. диам. 10
Арт. No.14-830



S-внутр. диам. 11
Арт. No.14-831

Коннекторы L



L-внутр. диам. 10
Арт. No.14-832



L-внутр. диам. 11
Арт. No.14-833

Переходник

Арт. No.13-614



Используется для трубок с внутренним диаметром 16 мм. А также с переходниками S и L на 11 мм.

Переходники и аспираторы продаются отдельно.
Переходники на 10 мм используются с аспираторами Morita,
переходники на 11 мм – для всех остальных

Щеточка для чистки



Щ 4 мм
Арт. No.13-651
Комплект - 12шт
Длина 200 мм

Проволока для чистки (1,1 мм)

Для аспиратора S-30° slim




Арт. No.13-654
Комплект - 12шт
Длина 150 мм

Переходник для слюноотсоса

Арт. No.14-840

Подходит ко всей линейке подобных приборов

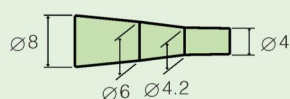

Общая длина 24 мм

Материал – силикон, до 260°C



Пример



1/1

Зонд



С держателем

Арт. No.15-020

Дополнительно

Арт. No.	Наименование
15-021	Насадка
15-022	Держатель



№1

Арт. No.15-301

Длина 200 мм

1/1

Шовный материал

Нейлон (темно-синий)
Длина 20 м
Кипячение при 100°C, или
дезинфекция в EOG
Не дезинфицировать в автоклаве



Арт. No.	Стандарт	Толщина	Цвет
15-233	3-0	ø0.20~0.25	Зеленый
15-234	4-0	ø0.15~0.20	Голубой
15-235	5-0	ø0.10~0.15	Белый

1/1

Костная ловушка (коллектор)

Используется для сбора аутокости во время операций. Имеет удобную разборную конструкцию для очистки и стерелизации. Для работы необходимо подключение к слюноотсосу. Мультиколлектор, фильтры – 5 шт., стерилизационный кейс.

Выполнен из титана


1/1

Арт. 30-166



Арт.	Наименование
30-168	Мультиколлектор
30-169	Кейс
30-172	Фильтры

Фильтр из PP, до 160°C

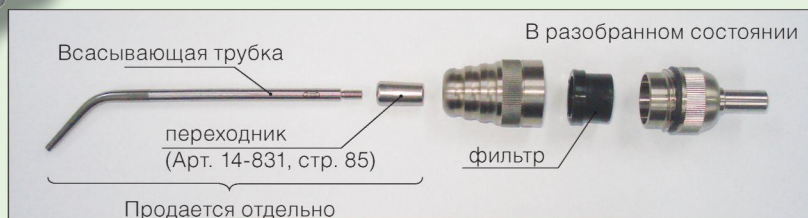

Относительно крупная сетка позволяет собирать костную стружку крупного размера, обладающую лучшей формообразующей способностью.

Костный скребок

Используется для получения костной стружки. Поставляется с набором аксессуаров. Удобен для чистки и стерелизации благодаря разборной конструкции. Скребок, лезвия – 3 шт., ключ

2/3

Ø5
Ø6



M
Арт. 30-187

Ø3.6
Ø4.7



S
Арт. 30-189



Арт.	Наименование
30-188	Скребок M
30-190	Скребок S
90-360	Лезвие M
90-359	Лезвие S
90-361	Ключ

Костная мельница (дробилка) с набором аксессуаров

Используется для раздробления костных блоков во время проведения костной пластики. Поставляется с набором аксессуаров. Выполнена из титана. Измельчитель, ступка, титановая кисточка, мягкий молоток, стерилизационный кейс.

Арт. 30-175



Арт.	Наименование
30-176	измельчитель



Пример



1/2


Костная мельница

Используется для размельчения аутокости во время проведения костной пластики. Удобная форма ручки, трещоточный механизм и отсутствие зазора между поршнем и цилиндром облегчает работу и позволяет получить однородную костную массу. Маленький диаметр барабана, позволяет получить более высокое давление при измельчении кости. Оптимально подобранный вид и размер отверстий в барабане подходит как для измельчения мелкой кости, так и более толстой. Для удаления остатков костного материала используйте титановую кисточку Арт. 30-174.

1/2


Арт. 30-480

Мельница поставляется в стерилизуемом кейсе

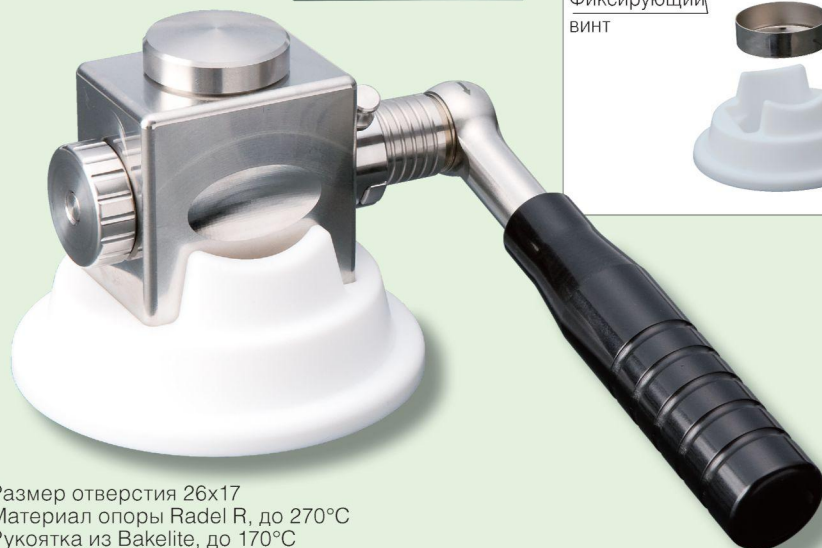

Отдельно

Барабан
Арт. 90-402

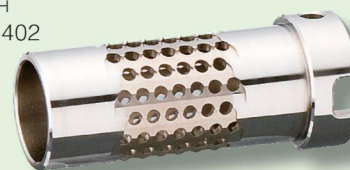

Размер отверстия 26x17
Материал опоры Radel R, до 270°C
Рукоятка из Bakelite, до 170°C

Комбинированный измельчитель кости с набором аксессуаров

Применяется для размельчения костных блоков во время проведения костной пластики. Проста в использовании. Измельчитель, ступка, титановая кисточка, стерилизационный кейс.

Дробление при помощи ударов молотка по стержню и растиранию вращательными движениями

Арт. 30-170

1/2



Арт.	Наименование
30-159	Измельчитель



Больше подходит для работы с мягкой костью (губчатые блоки)

Ступка

Арт. 30-173

Выполнена из титана, удобная форма. Обладает повышенной износостойкостью. Для сбора костного материала.

3/5



Длина Ø36

Кисточка титановая

Арт. 30-174

Для удаления остатков костного материала

4/5



105 мм

S-Изогнутый

Арт. 30-461

Шприц позволяет точно вносить костную массу в область проведения синус-лифтинга и костной пластики.


2/3



Ложки костные

Используется для переноски костной массы


1/1

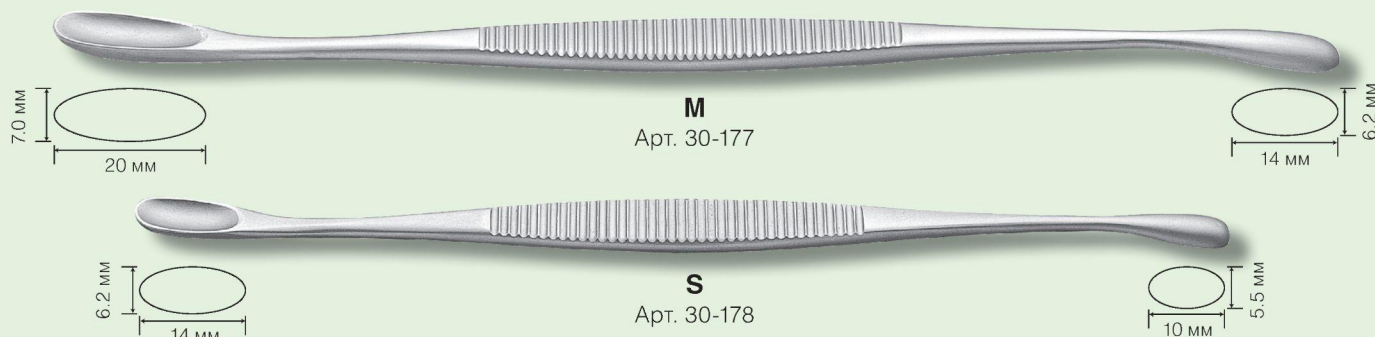

Пакеры для укладки остеопластических материалов и аутокости

Удобны при заполнении пространств костными массами

1/1

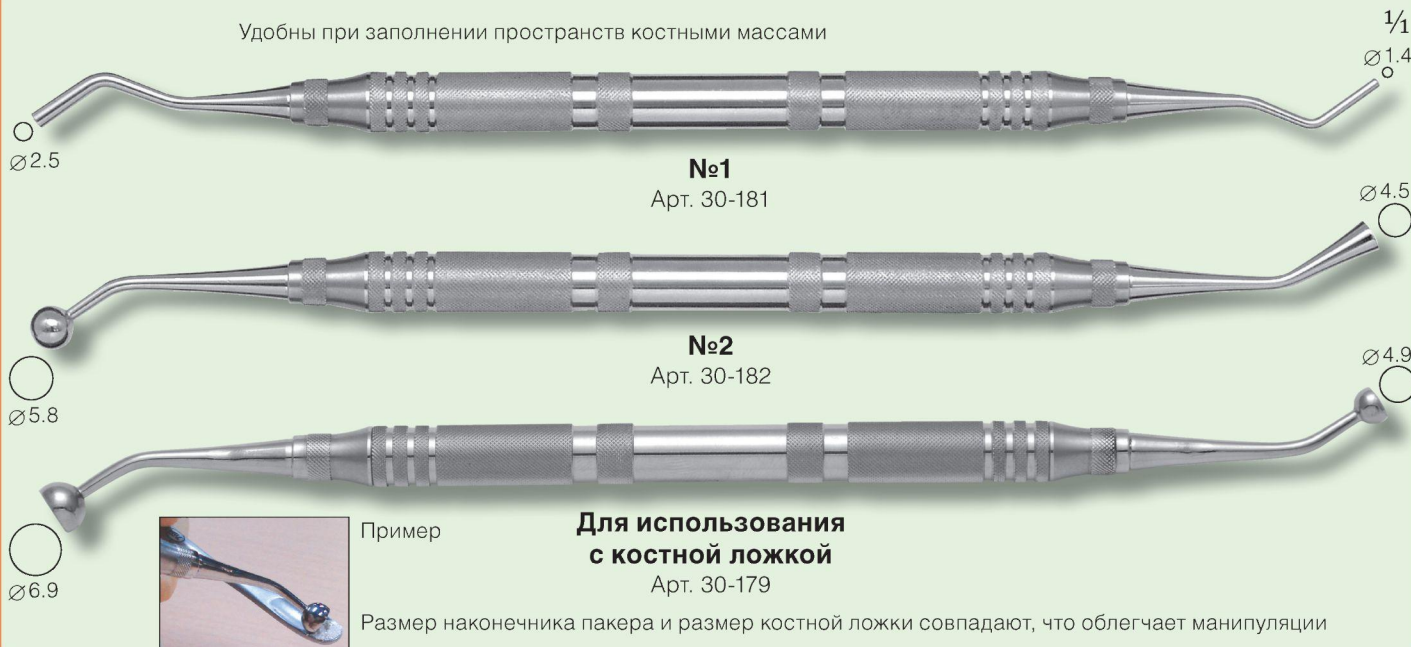

Наконечник имеет форму, минимально травмирующую мембрану Шнайдера
Изогнуты под идеальным углом.
Используются при открытом синус-лифтинге.




№A1
Арт. 30-021



№A2
Арт. 30-022




№A3
Арт. 30-023

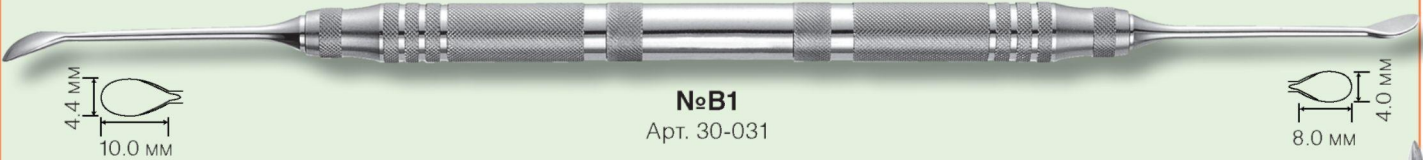


№B1
Арт. 30-031



№B2
Арт. 30-032

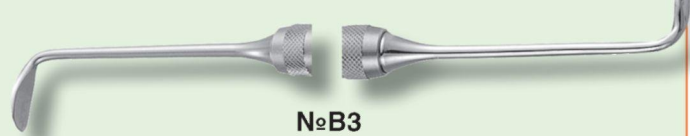




№B3
Арт. 30-033

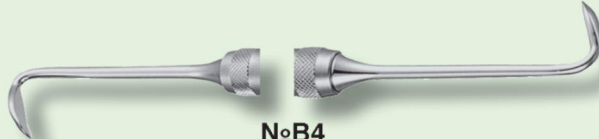

№B4
Арт. 30-034



№B5
Арт. 30-035

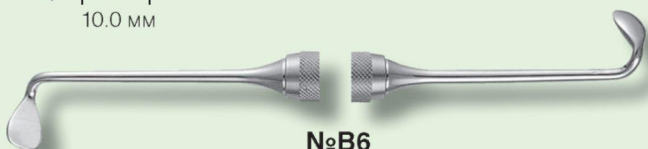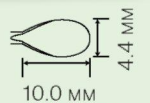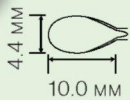

№B6
Арт. 30-036



№B7
Арт. 30-037

Остеотомы для закрытого синус-лифтинга


Имеют удобную конструкцию и большую вариабельность диаметров. Легко регулировать, благодаря стопору в виде винта. Рукоять изогнута под специальным углом во избежание травм нижней челюсти.

Набор:
Насадки 1-11,
стерилизационный кейс.
Арт. 30-400

1/1




Наименование	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11
Арт.	30-401	30-402	30-403	30-404	30-405	30-406	30-407	30-408	30-409	30-410	30-411

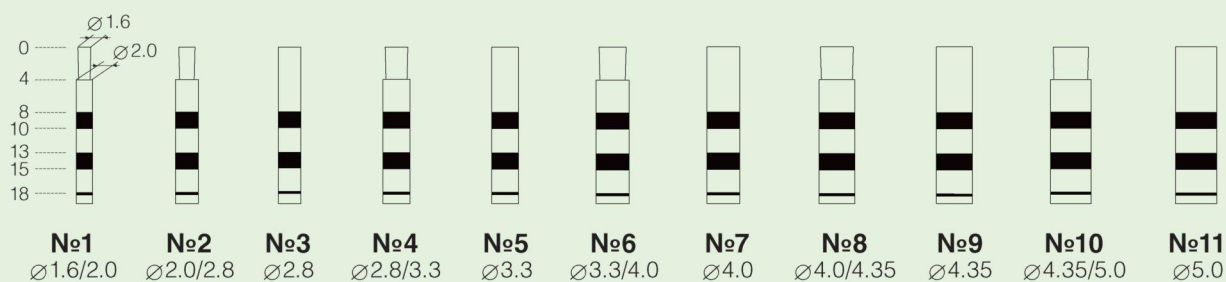

Отдельно

Кейс стерилизационный
Арт. 24-021

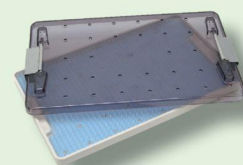

О-образные кольца выдерживают до 220°C
Длина 155 мм

(подробнее на стр. 167)


Остеотомы для расширения альвеолярного гребня

Рукоять изогнута под специальным углом, что обеспечивает удобство работы и позволяет избежать травм во время операции. Позволяет аккуратно провести синус-лифтинг без применения фрез. Может применяться для расширения альвеолярного гребня.

1/1



Наименование	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Арт.	30-421	30-422	30-423	30-424	30-425	30-426


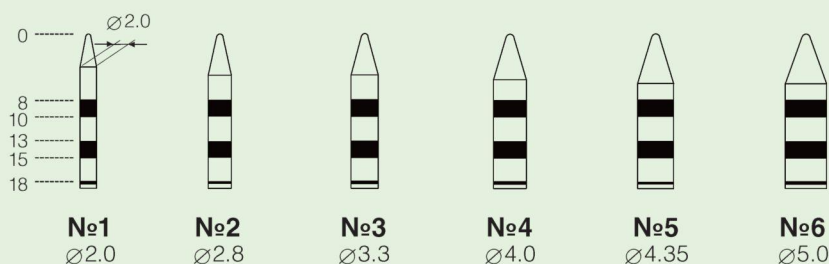


О-образные кольца выдерживают до 220°C
Длина 155 мм

Долото для расщепления альвеолярного отростка


Применяется для расширения костного гребня, при имплантации и других манипуляциях. Имеет удобную шкалу на рабочей части, что позволяет контролировать манипуляцию. Поставляется трех размеров.

1/1

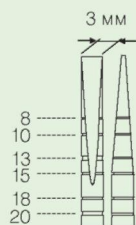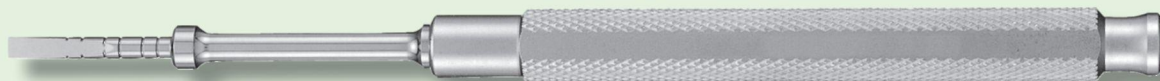

№1

Арт. 30-141

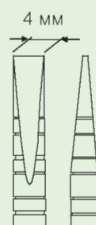

№2

Арт. 30-142



№3


Арт. 30-143

Длина 153 мм

Перфоратор для мягких тканей (панчер)

«Пристрелочный» стержень не позволяет уйти от намеченного для прокола места.

1/1

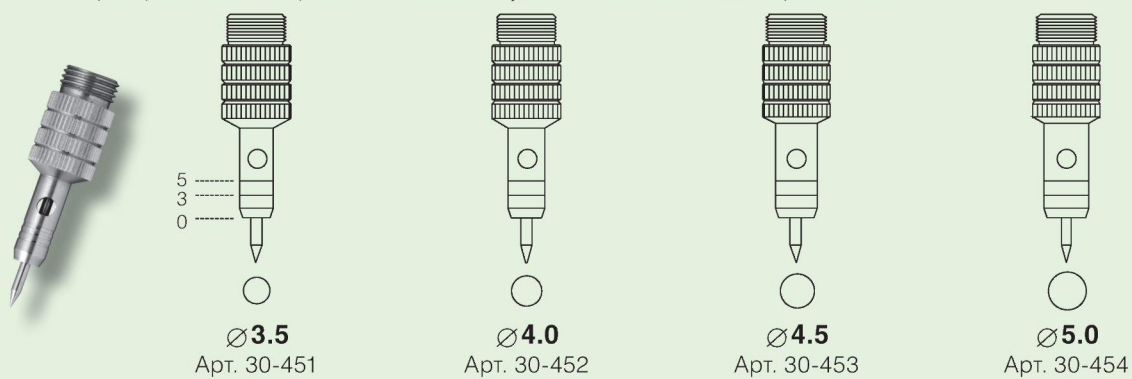

Отдельно

Рукоятка
Арт. 30-459

Пример



Удобна при работе в дистальных отделах


Щипцы для удаления мягких тканей после перфорации

Желобок на щечках надежно удерживает материал.
Арт. 30-460

1/1




Удобны для удаления мягкой ткани, оставшейся после прокола отверстий.

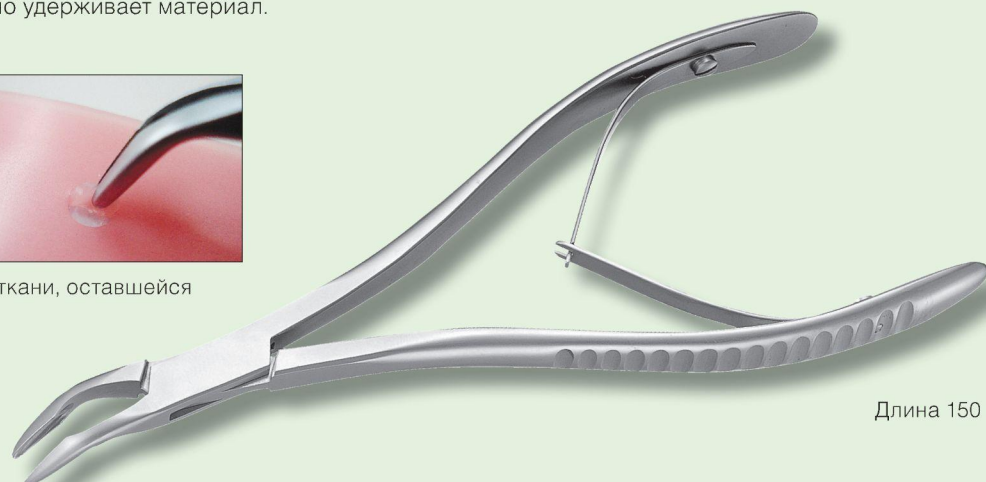


Длина 150 мм

Пинцет для внесения мембран

1/1

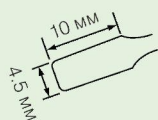

Арт. 30-045

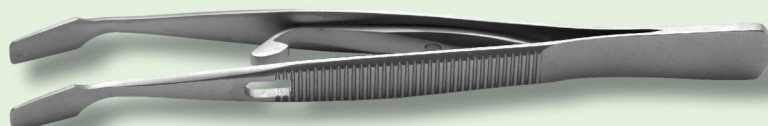

С замком
Арт. 30-046

Набор переотом Тип 2

Рукоятка PD, насадки 1-6 по 1 шт.

1/1

Арт. 30-310

Применяется при одномоментной имплантации, не травмирует ткани пародонта. Имеют большую вариабельность насадок для работы с верхней и нижней челюстью.

Насадки



№1

Для передних зубов 1.7 мм



№2

Для передних зубов 2.7 мм



№3

Для задних зубов 1.7 мм



№4

Для задних зубов 2.7 мм



№5


Для задних зубов 1.7 мм



№6

Для задних зубов 2.7 мм

Рукоятка

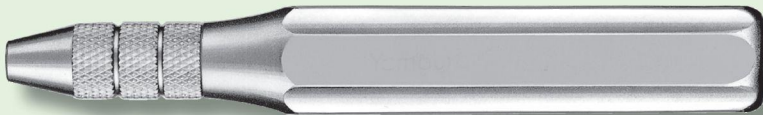

P-D (14 мм)

Отдельно

Арт.	Наименование
30-016	Насадки№1
30-017	Насадки№2
30-018	Насадки№3
30-314	Насадки№4
30-315	Насадки№5
30-316	Насадки№6
10-204	P-D Рукоятка

Отдельно

Арт. 10-201




P-A (8 мм)

Кронциркуль для измерения ширины кости

Арт. 30-003

4/5

Диапазон измерений
от 0 до 20мм

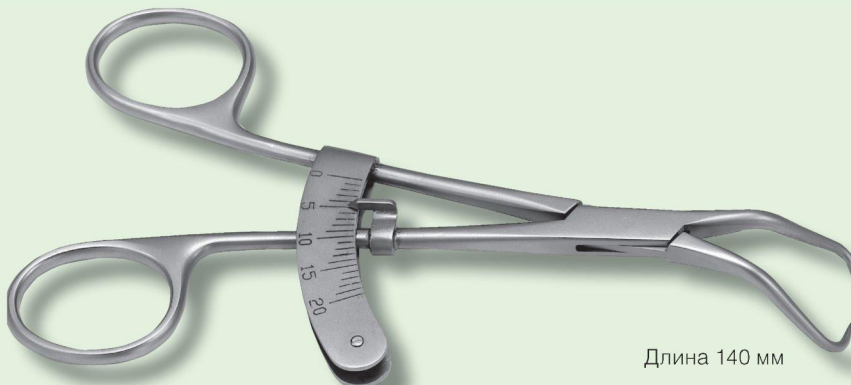

Длина 140 мм


Измеритель глубины и костного ложа и параллельности лож имплантатов

Арт. 30-001

7/5

Применяется при
имплантации.

Выполнен из титана

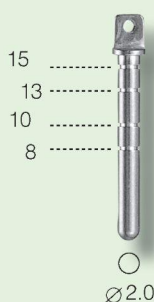

Ø2.0

Пуговчатый измеритель глубины костного ложа

Арт. 30-002

1/1

Выполнен из
титана



Ø1.8

Измеряет глубину костного ложа
Позволяет работать с верхней челюстью
Диапазон измерений 8-20мм
Имеет удобную шкалу и линейку на рукоятки

Линейка для рентгеновских снимков

Арт.21-157
Комплект – 2 шт.


Используется для определения приблизительной глубины каналов, а также при имплантации.

1/1

Рамка




Пластина

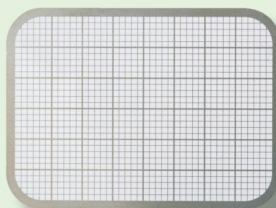


Размеры рамки 33x45
Размеры пластины 38x48x8,5
Пластина разлинована по типу «миллиметровки»

Установка

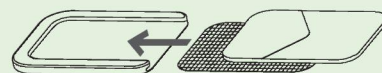

Снимок

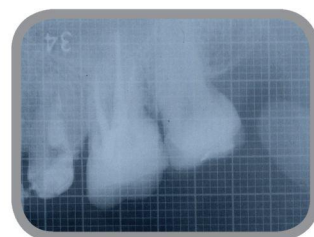

Рамка выдерживает до 260°C, выполнена из силикона.

Щипцы для отделения костных блоков

Арт. 30-052

Позволяет делать забор костной ткани с наименьшими усилиями, благодаря принципу рычага.



1.5 мм



Длина 145 мм

2/3

Костные кусачки

Арт. 30-053

Используются для обрезки кости. Благодаря пружинному механизму упрощается работа врача



Длина 113 мм

2/3

Долото для кости

1/1

4 мм



Прямое
Арт. 30-061



Изогнутое
Арт. 30-062

Кусачки для кости

Арт. 30-054

Используются для обрезки кости. Механизм с двумя шарнирами позволяет облегчить работу хирурга во время проведения манипуляции.


1/1



Диссектор

Арт. 30-020


1/1

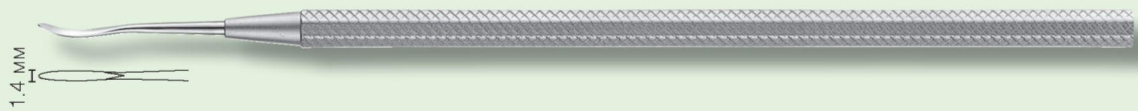

Пинцет стоматологический из титана с насечками

Арт. 30-044

1/1

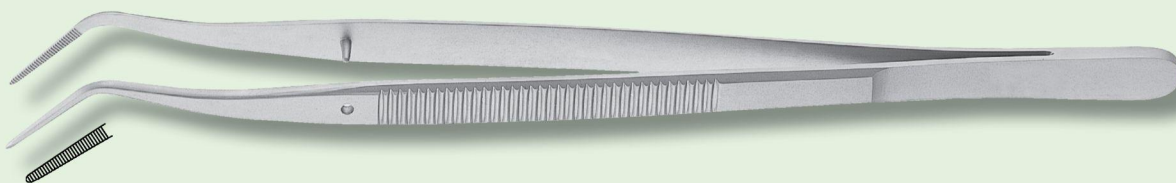

Зонд градуированный из титана

Арт. 09-575

1/1



№5

Скалеры титановые

1/1



№1

Идеален для межзубных промежутков и
пришеечных частей передних зубов
Арт. 30-163



№2

Для труднодоступных мест фронтальной и
жевательной группы зубов
Арт. 30-164

Кюкеты титановые

1/1



№5-7

Для медиальных, дистальных, щечных и
язычных поверхностей моляров
Арт. 30-160



№11-12

Для медиальных поверхностей
коренных зубов
Арт. 30-161



№13-14


Для дистальных поверхностей
коренных зубов
Арт. 30-162

Набор – 5 шт.
Для получения индивидуального слепка можно удалять требуемые сегменты


1/1



**Для верхней
челюсти**
Арт. 30-470

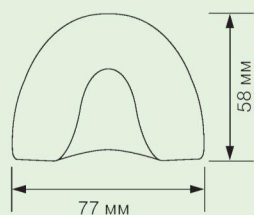

**Для нижней
челюсти**
Арт. 30-475

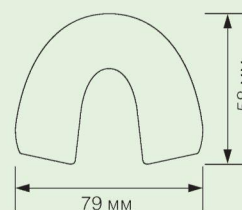

Для одноразового применения
Перед применением требуется
стерилизация с помощью EOG
Не дезинфицировать в автоклаве

Кусачки для корректировки пластмассовых слепочных ложек Арт. 30-479


1/1

Кусачки для удаления сегментов матрицы



MS-150

1/1

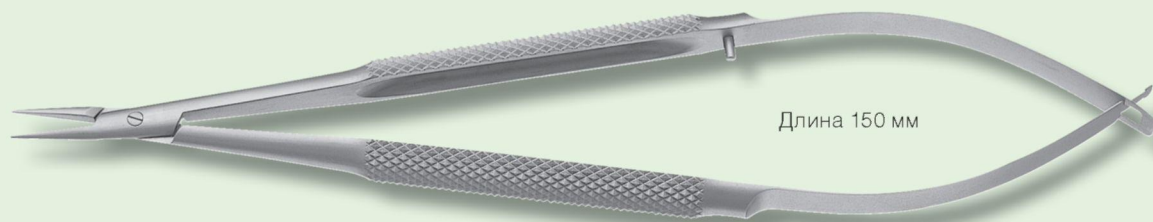

Длина 150 мм

Шаг шва 6.0-8.0
Иглы от 0.14 до 0.33



0.6 мм


Прямой
Арт. 32-001



Изогнутый
Арт. 32-002

MS-150

С храповым механизмом.
Позволяет удобно фиксировать и
репозиционировать иглы.

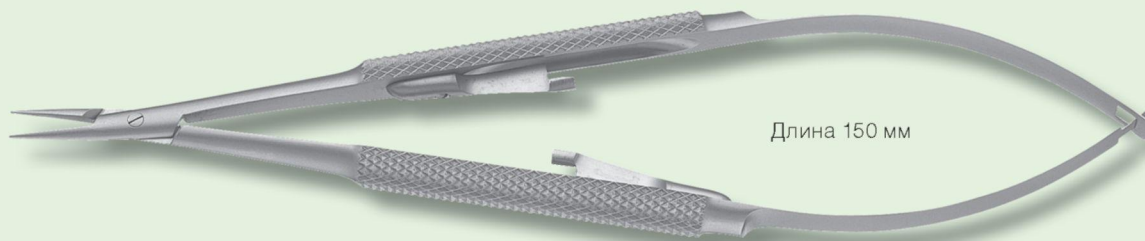

Длина 150 мм

Шаг шва 6.0-8.0
Иглы от 0.14 до 0.33




0.6 мм


Прямой
Арт. 32-003



Изогнутый
Арт. 32-004

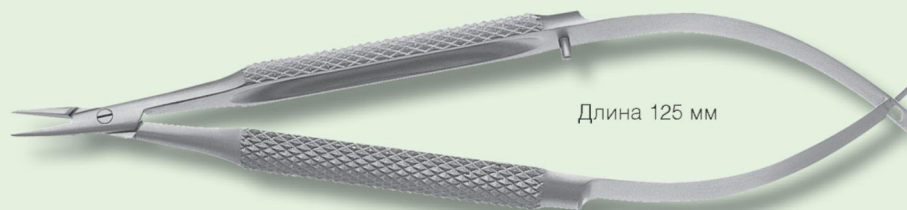

Длина 125 мм

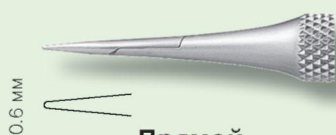
Шаг шва 6.0-8.0
Иглы от 0.14 до 0.33

0.6 мм


Прямой
Арт. 32-011**Изогнутый**
Арт. 32-012

MS-125

С храповым механизмом.
Позволяет удобно фиксировать и
изменять положение иглы.

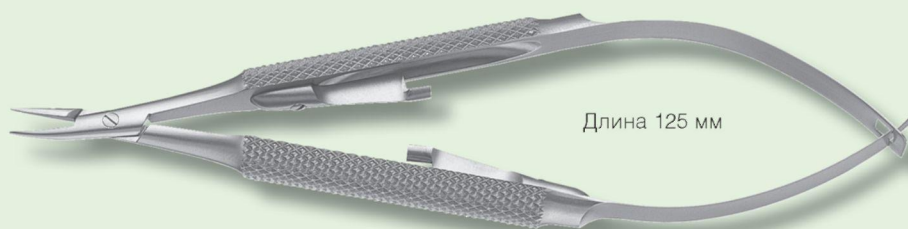


Длина 125 мм

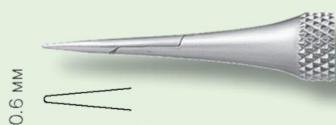Шаг шва 6.0-8.0
Иглы от 0.14 до 0.33

0.6 мм

Прямой
Арт. 32-013**Изогнутый**
Арт. 32-014

MS-150 С круглыми ручками

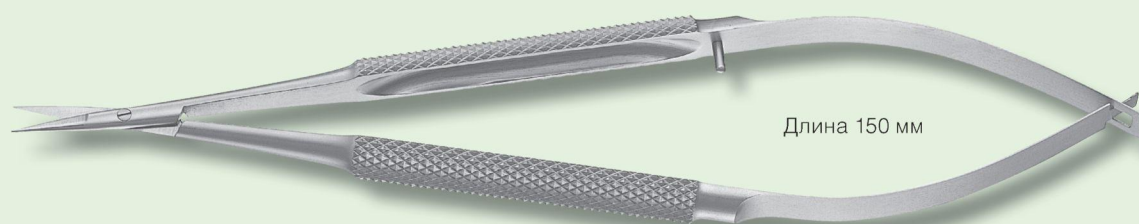


Прямой
Арт. 32-131






Изогнутый
Арт. 32-132

MS-160 Изогнутые под 45° Арт. 32-121

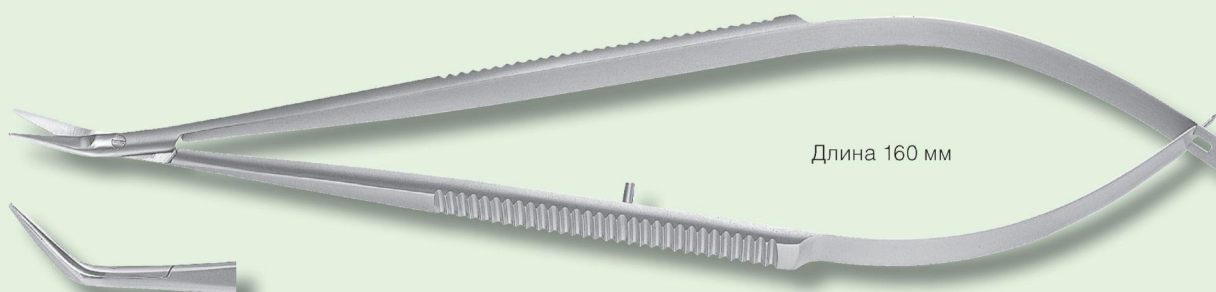


MS-150 Изогнутые под 90° Арт. 32-122

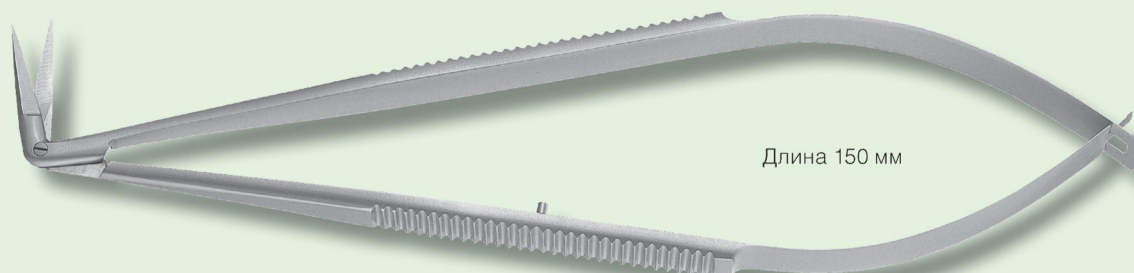


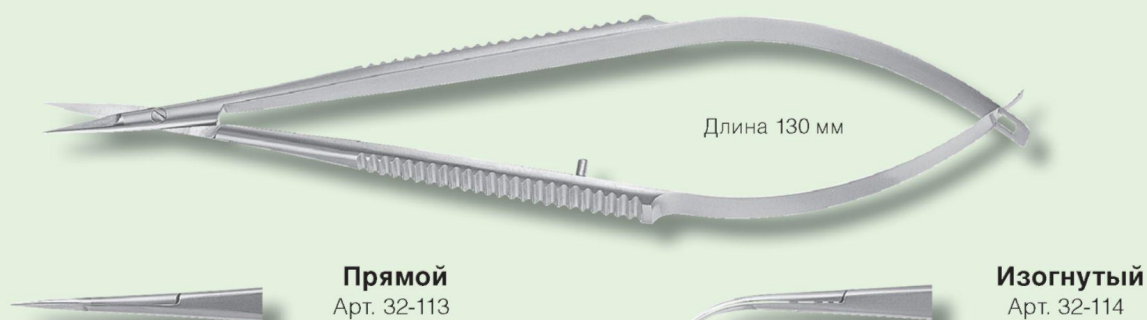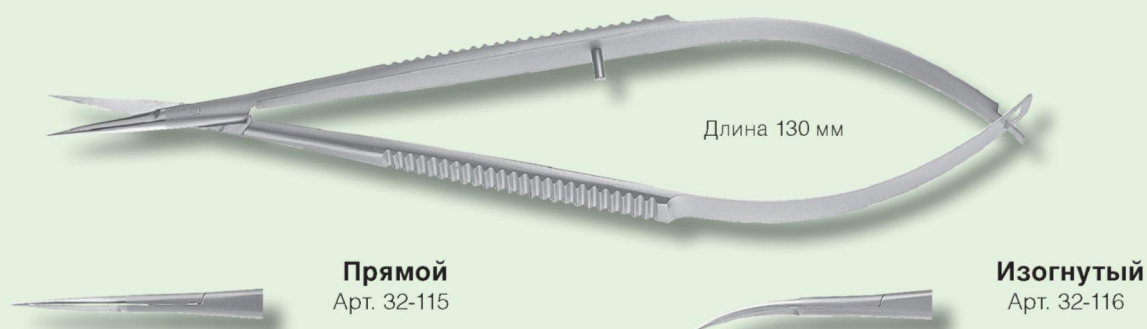MS-160M**MS-160L (С удлиненными щечками)****MS-130M****MS-130L (С удлиненными щечками)**

MS-150S

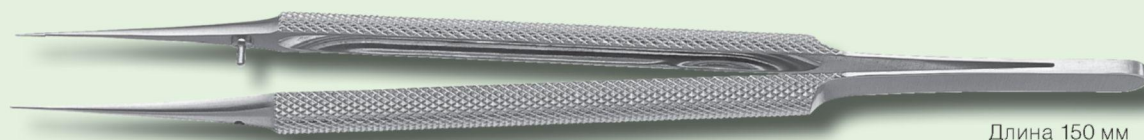


Длина 150 мм

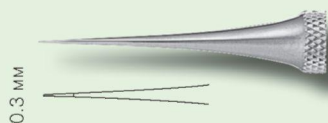


0.3 мм

Прямой
Арт. 32-201

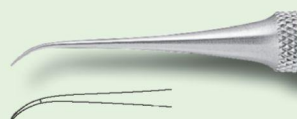


Изогнутый
Арт. 32-202

MS-150L

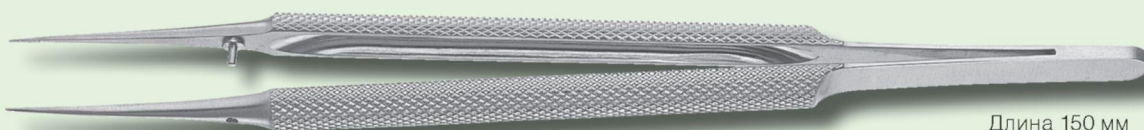


Длина 150 мм

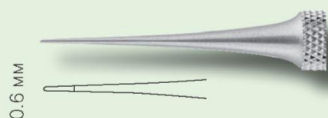

0.6 мм


Прямой
Арт. 32-203

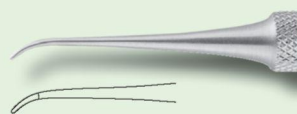


Изогнутый
Арт. 32-204

MS-150

За счет наличия кольца и ребристой поверхности на конце пинцета, облегчается захват мягких тканей

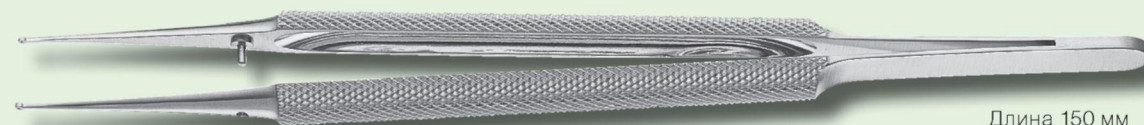


Длина 150 мм

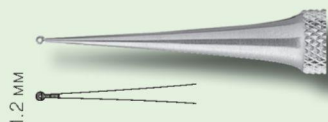


1.2 мм

Прямой
Арт. 32-207

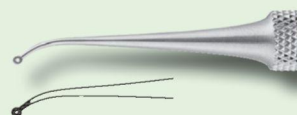

Изогнутый
Арт. 32-208

Пинцет для микрохирургии

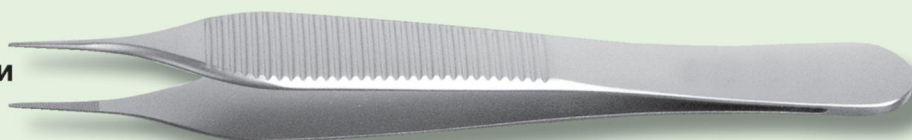

Длина 120 мм

1.0 мм



С крючком
Прямой
Арт. 32-211

1.0 мм




С крючком
Изогнутый
Арт. 32-212

0.7 мм



Без крючка
Прямой
Арт. 32-213

0.7 мм

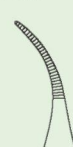

Без крючка
Изогнутый
Арт. 32-214

Инструмент используется при лоскутных операциях. Исполняется в виде анатомического и хирургического пинцета с прямыми и изогнутыми щечками.

Зонд для ретроградного пломбирования

1/1



№1

Арт. 32-301




№2

Арт. 32-302

Коагулятор

Арт. 32-311


1/1

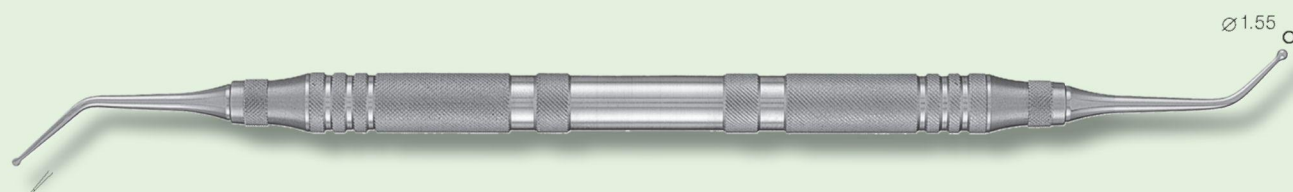

Карвер

Арт. 32-331


1/1

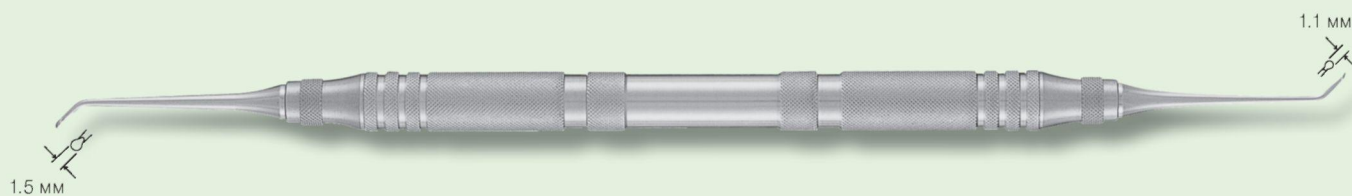

Кюрета

Арт. 32-321


1/1

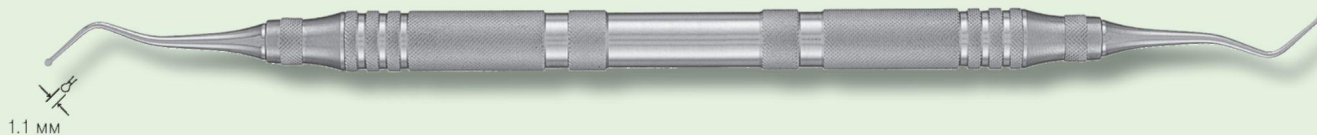

Распаторы


Используются для атравматичного отслоения слизистой оболочки в различных отделах.

1/1

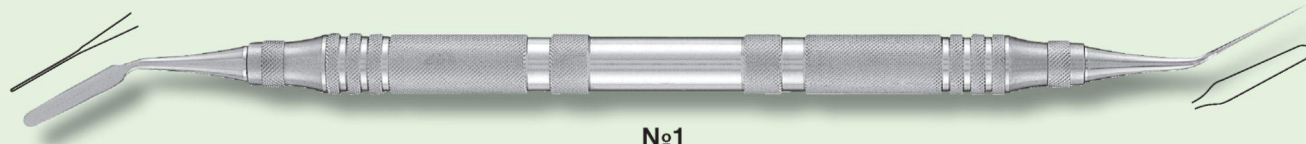

№1

Арт. 32-341

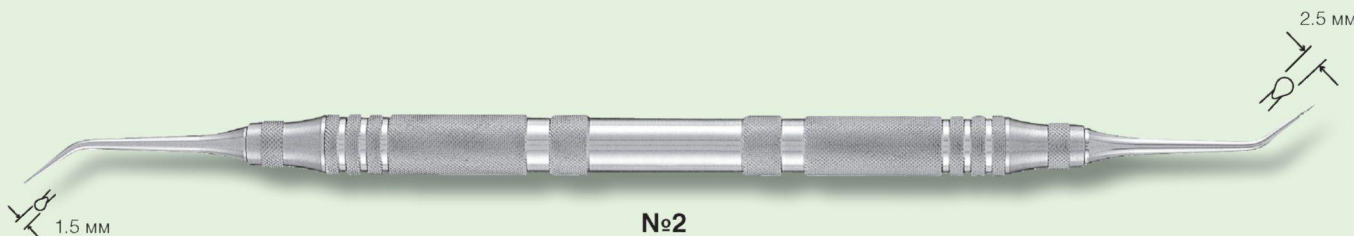

№2

Арт. 32-342



№3A

Арт. 32-343



№3B

Арт. 32-344

Долото для костной пластики

Инструмент используется для отделения костного блока во время проведения костной пластики. Рабочие части инструмента изогнуты под разными углами, облегчая манипуляции.

1/1



№3

Ширина кончика 4мм
Арт. 09-215



№4

Ширина кончика 4мм
Арт. 09-214

Ручка для микрозеркал



Арт. 14-690

Подходит как для микрозеркал, так и для скальпелей
Насадки фиксируются простым поворотом хвостовика

1/1



Пример

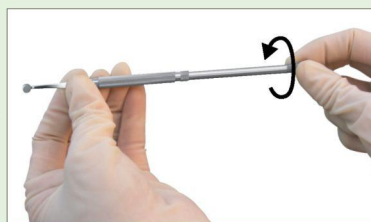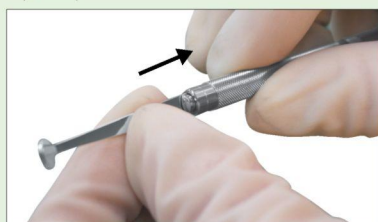

Микрозеркала


Комплект – 5 шт

Имеют прямое отражение

С родиевым покрытием

Используются вместе с микроручкой

1/1

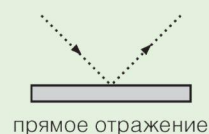

прямое отражение

Отдельно

Арт.	Наименование
14-701	№1
14-702	№2
14-703	№3
14-704	№4
14-705	№5
14-706	№6



№1



№2



№3



№4



Изогнутый
под 45°

№5



Изогнутый
под 45°

№6

Набор из 2-х
зеркал (5, 6)
Арт.14-709

Набор микрозеркал с ручкой

Зеркала не темнеют со временем. В наборе: рукоятка, зеркала 1, 2, 3, 4 – по 1 шт, кейс

Арт. 14-700



1/1



№1



№2




№3



№4

Материал ложек не допускает образование ржавчины и изменение цвета, даже после дезинфекции в растворе. Сетчатая структура ложек способствует равномерному распределению оттискового материала.

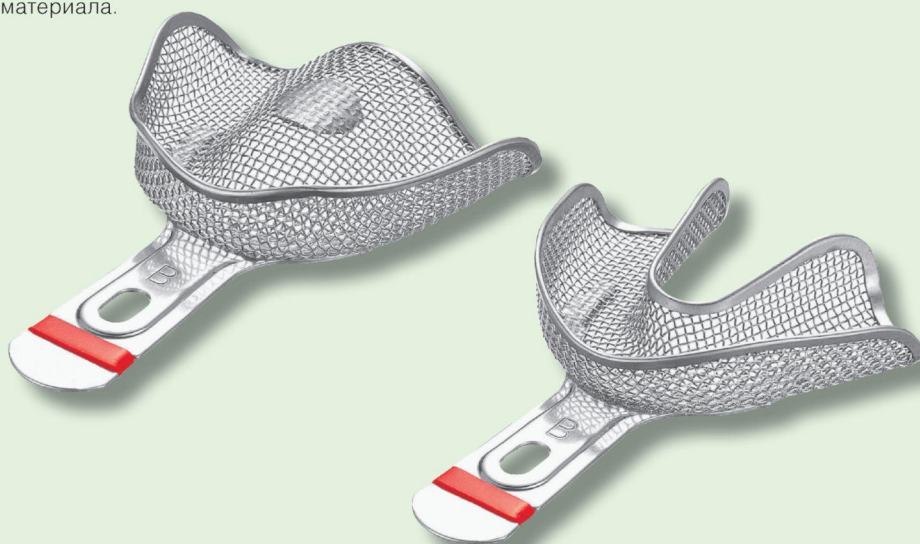


Обозначения	Арт.		
	Верх	Низ	Набор
A	19-381	19-382	19-380
B	19-384	19-385	19-383
C	19-387	19-388	19-386

Упор для пальца (для верхней челюсти). Обеспечивает лучший контроль за положением ложки, и предотвращает прилипание слепочной массы к рукам




С цветными кольцами. Для быстрого определения размера слепочной ложки

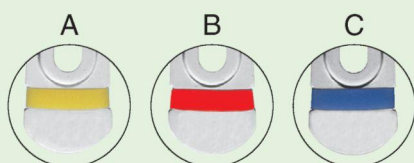

Желтый Красный Синий


Обозначения	Размеры	
	Верх	Низ
A	73x60 мм	76x62 мм
B	70x55 мм	72x58 мм
C	66x53 мм	69x54 мм

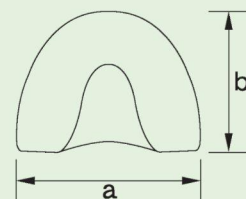

В состав материала колец входит кремний, выдерживают температуру до 260°C

Билатеральные слепочные ложки

Используются при включенном и концевых дефектах челюстей

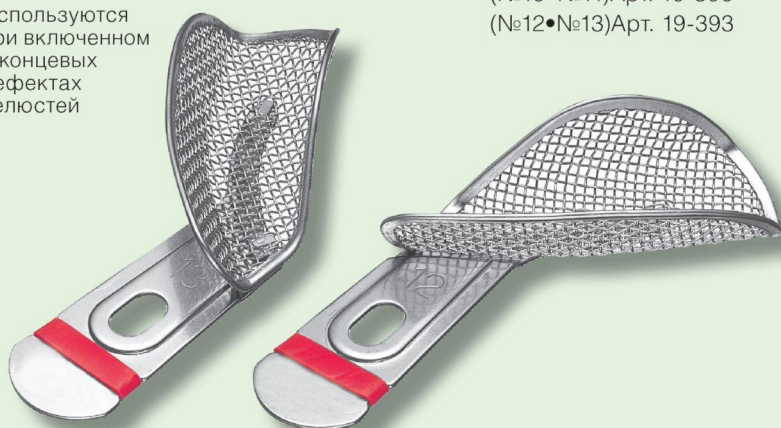


№11•№13

Верхняя правая и нижняя левая

№10•№12

Верхняя левая и нижняя правая

Обозначения	Арт.	Размер ахb	Цвет кольца
№10	19-391	20x60 мм	
№11	19-392		
№12	19-394	15x58 мм	
№13	19-395		

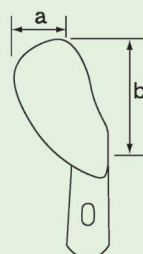


В состав материала колец входит кремний, выдерживают температуру до 260°C

Вращающаяся слепочная ложка

Конструкция позволяет удобно позиционировать ложку в полости рта.



Для нескольких зубов

Арт. 19-396

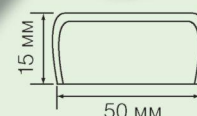

Для одного зуба


Арт. 19-397

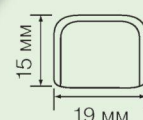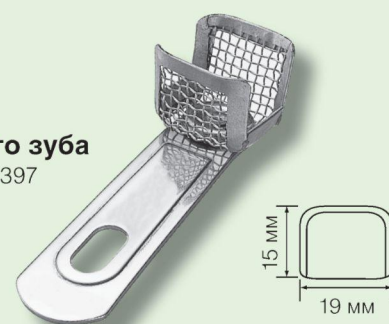

Слепочные ложки вращающиеся

Инновационная конструкция позволяет удобно позиционировать ложку в полости рта, а также облегчает выведение готового оттиска.
Материал – нержавеющая сталь

4/5

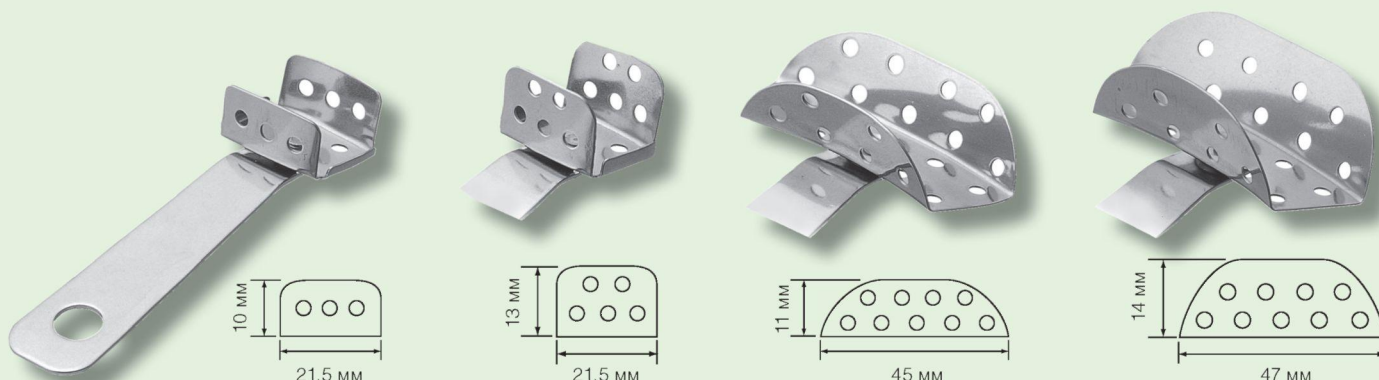

**Для одного зуба
(молочные)**

Арт. 19-461

**для одного зуба
(коренные)**

Арт. 19-463

**для нескольких
зубов
(молочные)**

Арт. 19-465


**для нескольких
зубов
(коренные)**

Арт. 19-467

Слепочные ложки вращающиеся Fusayama

Данная модель слепочных ложек позволяет сделать оттиск на разных отделах челюстей при дефектах различной протяженности. Имеют удобный вращающийся механизм ручки.
Материал – нержавеющая сталь

1/1

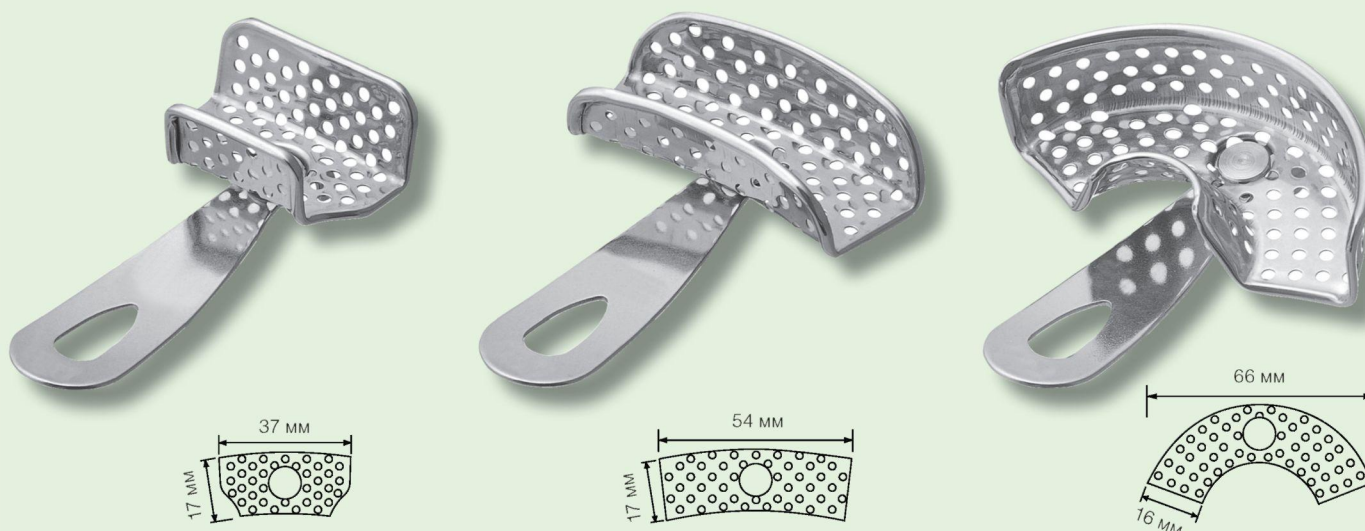

**Для дистальных
зубов, размер S**

Арт. 19-201

**для дистальных
зубов, размер L**

Арт. 19-202

**для фронтальных
зубов**

Арт. 19-203

Слепочные ложки полночелюстные

Допускается
дезинфекция
в автоклаве


Благодаря разным цветам, размер ложек легко различим
Легко изгибаются под анатомические особенности пациента,
благодаря эластичной конструкции рабочей части

2/5


Для верхней челюсти



Для нижней челюсти

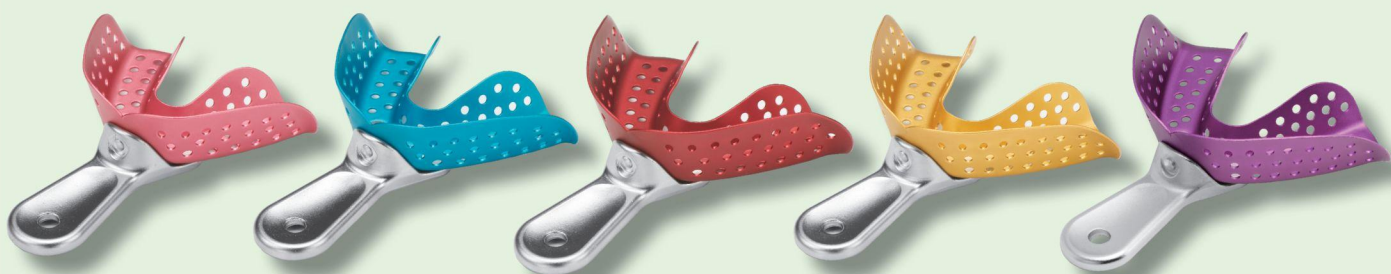

Обозначения	Для верхней челюсти		Для нижней челюсти	
	Арт.	Размер ахb	Арт.	Размер ахb
Розовый	19-021	57х48 мм	19-025	62х44 мм
Голубой	19-022	62х54 мм	19-026	70х48 мм
Красный	19-023	68х60 мм	19-027	75х50 мм
Золотистый	19-024	75х65 мм	19-028	82х53 мм
Фиолетовый	19-020	84х70 мм	19-029	88х55 мм

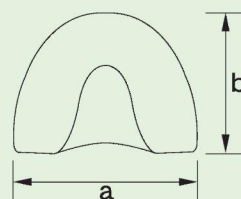

Слепочные ложки билатеральные

Данная модель
позволяет снять оттиск
с половины челюстей,
при односторонних
дефектах.
Материал -
нержавеющая сталь


Набор из 2-х штук.
Арт. 19-030

4/5

№11
Арт. 19-032



№10
Арт. 19-031

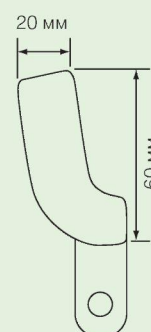

Шпатели для альгинатных масс

3/4



Арт. 11-722



С открывашкой

Арт. 11-723


Рукоятка из ABS-пластика
Выдерживают до 80°C

Шпатели для гипса

3/4



Арт. 11-702

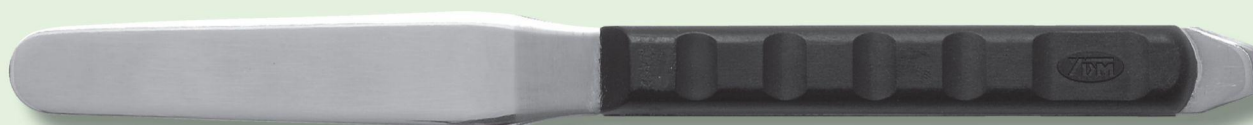

С открывашкой


Арт. 11-703

Рукоятка из ABS-пластика
Выдерживают до 80°C

Шпатель для силиконовых масс

Арт. 11-731

3/4

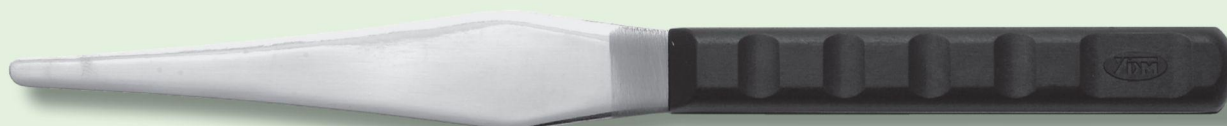

Рукоятка из ABS-пластика
Выдерживают до 80°C

Шприцы для гидроколлоидов (5/16) Тип 2

Подходит для использования как с кондиционерами, так и с водой. Шприц имеет тефлоновое покрытие, что облегчает очистку и позволяет желатиноподобным массам выходить плавно

1/1



Арт.	Наименование	Длина иглы	Внешний Ø
13-600	2S Розовый	10 мм	Ø0.8
13-601	2L Голубой	17 мм	
13-602	3S Зеленый	10 мм	Ø1.2
13-603	3L Серый	17 мм	

Насадки

Арт.	Наименование
13-604	2S Розовый
13-605	2L Голубой
13-606	3S Зеленый
13-607	3L Серый

Насадки для игл имеют разный цвет, в зависимости от длины и внешнего диаметра иглы. Внешний диаметр шприца 7.9 мм (погрешность 1 мкм), материал шприца PFA (до 260°C), материал насадок PP (до 155°C)

Шприц гидроколлоидный (для использования с картриджами)

Шприц, насадки (толстая изогнутая, тонкая изогнутая, прямая – по 1 шт), очищающие щеточки – 2 шт.

1/1

Арт. 13-550



Насадки

Арт.	Наименование
90-303	Щетки

Арт.	Наименование
13-551	Толстая изогнутая
13-552	Тонкая изогнутая
13-553	Толстая прямая

Материал черного пластика PPS, выдерживает до 260°C

Шприц для силиконовых масс

Шприц, 5 насадок
Арт. 13-226



Отодвиньте
стрелку назад




Заполните шприц
с задней части



Насадки

Комплект
из 10 насадок
Арт. 13-225

1/1

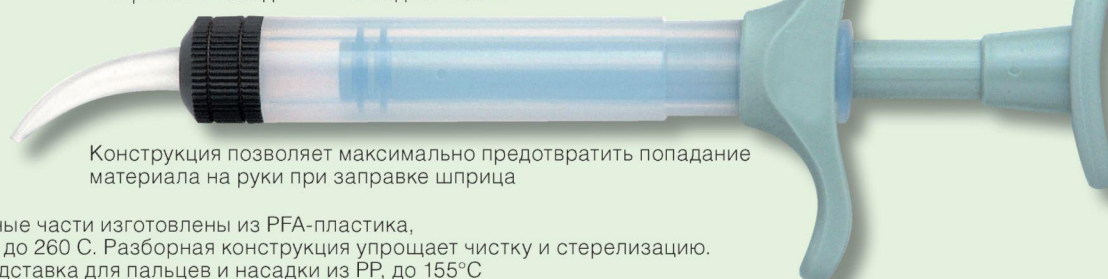

Конструкция позволяет максимально предотвратить попадание материала на руки при заправке шприца

Шприц и чёрные части изготовлены из PFA-пластика, выдерживает до 260 С. Разборная конструкция упрощает чистку и стерелизацию. Стержень, подставка для пальцев и насадки из PP, до 155°C

Прикусная ложка


Арт. 19-320

Используется для определения взаимоположения зубов. Новейшая разработка позволяет сэкономить время и облегчает данную манипуляцию.



Сопутствующие товары

Арт.	Наименование
19-321	Бумага для прикусных ложек 300 листов

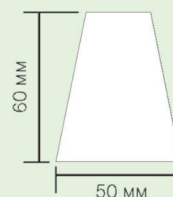

2/3

Пакеры (укладчики ретракционной нити)

1/1



АУ

Арт. 13-101
Наконечник Giza



В

Арт. 13-102



№1

Арт. 13-105



№2

Арт. 13-106
Наконечник Giza


Способ использования



Обрежьте нить до необходимой длины и захватите при помощи пакера 1



Обмотайте вокруг требуемого зуба

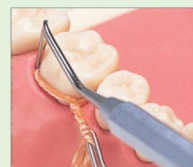

И поправьте нить при помощи пакера 2

Шпатель для изготовления гипсовых моделей

Арт. 11-742

3/5



Короткая лопатка
Позволяет извлекать
гипсовые слепки



Длинная лопатка
позволяет извлечь
слепочный материал
из матрицы



Длина 200 мм

Рукоятка из ABS-пластика, до 80°C

Шпатель для альгинатных материалов

Арт. 11-741

Позволяет с легкостью извлекать альгинатные слепки из матриц

3/5

Ложечка

Лопатка



Длина 185 мм

Материал PS, до 80°C

Стойка для слепочных ложек

Арт. 13-508

Позволяет сушить ложки с гипсовыми слепками, не занимая много места

1/4



Пример

Размеры 123x180x165
Вместимость 6 матриц
Не дезинфицировать в автоклаве

Герметичный бокс для стойки под слепочные ложки

Арт. 13-509

Предотвращает изменение формы, благодаря
поддержанию необходимого уровня влажности

1/5



Размеры 123x180x165
Вместимость 6 матриц
Не дезинфицировать в автоклаве



№22
Арт. 11-522



№24
Арт. 11-524



№36
Арт. 11-536



№1
Арт. 11-551



№2
Шпатель большой
Арт. 11-552

Длина 210 мм



№3
Арт. 11-553



Ножницы для фольги



Ножницы универсальные






Стандартный
Арт. 11-251



Стандартный

Offset

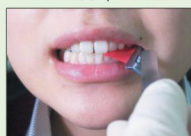

Offset
Арт. 11-256

Обеспечивают хороший обзор
и качественный оттиск



Перфорированный с зубцами
Арт. 11-250



Зажим для артикуляционной бумаги
Арт. 11-252

Инструмент
для измерения
межзубных
промежутков.
Удобен для
использования в
боковых отделах.




№1
Арт. 11-254



№2
Арт. 11-255


Набор из 2-х
держателей
Арт. 11-253

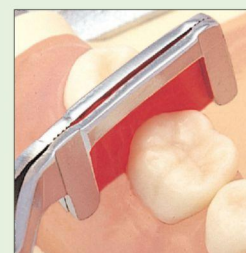

Измерители межзубных промежутков с ручками

Измерительная полоса и ручка представляют собой цельную конструкцию. С помощью сжимания/разжимания ручек, регулируется натяжение ленты, что облегчает измерение. Выполнены разного цвета, в зависимости от толщины ленты.


4/5

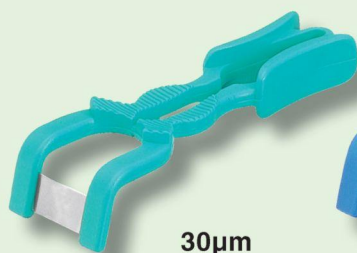

30µm
Арт. 21-161



50µm
Арт. 21-162

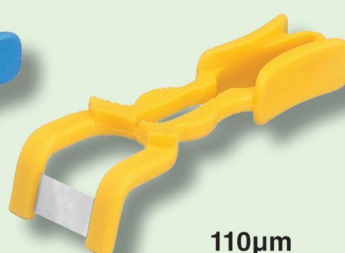

110µm
Арт. 21-163



PAT.


Длина 67 мм
Материал ручек PP, до 155°C

Измеритель межзубных промежутков двухсторонний

Инструмент позволяет выполнять измерения в области нескольких групп зубов.
Держатель, ленты (30 мкм – 2 шт, 50 мкм – 2 шт, 110 мкм – 1 шт)

4/5

Арт. 21-147

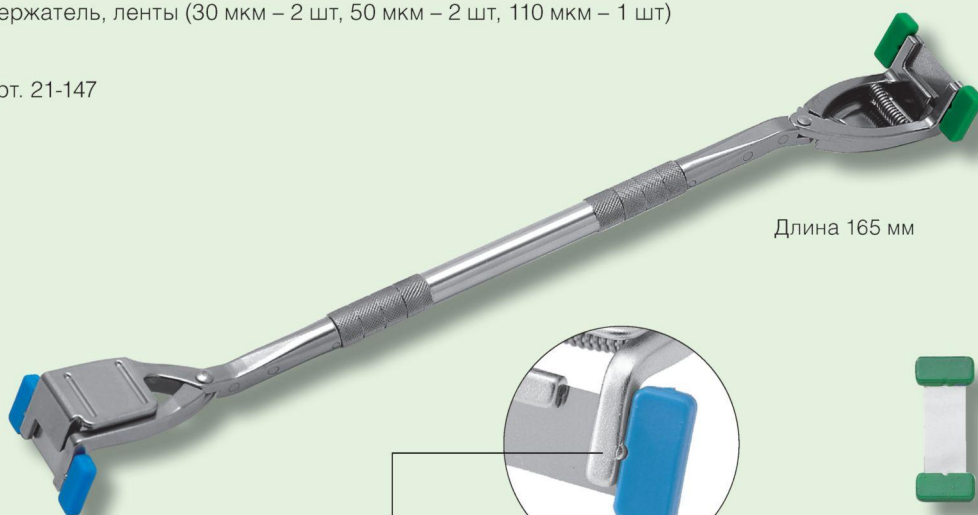

Длина 165 мм

Имеет надежный механизм удержания ленты



30µm



50µm



110µm



150µm

Насадки

Арт.	Лента
21-142	30µm зеленая
21-136	50µm голубая
21-137	110µm желтая
21-138	150µm красная
21-146	Держатель двойной
21-131	Держатель одинарный

Ленты подходят для обоих типов держателей.
Пластик. Части – POM, до 162°C
Избегайте чрезмерного нагрева

Измеритель межзубных промежутков односторонний

Держатель, ленты (30 мкм – 2 шт, 50 мкм – 2 шт, 110 мкм – 1 шт)

Арт. 21-148

4/5




Длина 140 мм

Элеваторы для снятия ортопедических конструкций

Работают по принципу рычага
Облегчают работу благодаря зацепам на концах инструмента,
а также благодаря алмазному напылению на рабочей части.

1/1

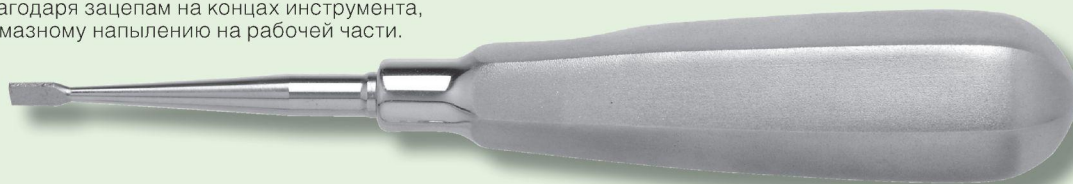


S

Арт. 21-073



C

Арт. 21-074

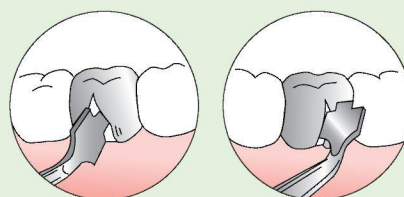

Ножницы для снятия коронок

Арт. 21-060

1/1



Щипцы для удаления штифтов

1/1



Прямые


Арт. 21-078



Изогнутые

Арт. 21-076

Пример

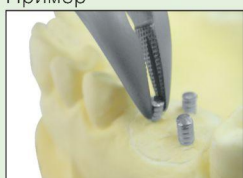


Рукоять, насадки (S, W по 1 шт)

Арт. 21-010

Возможность использования одной рукой. Удобная регулировка силы снятия коронки. Используется как для нижней, так и для верхней челюсти

4/5

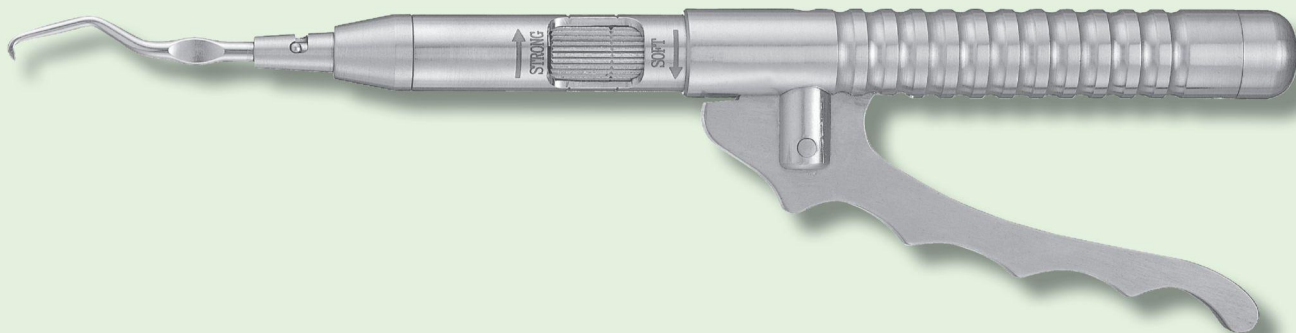

Набор для снятия коронок Set

Данный набор позволяет снимать одиночные коронки различной размерности. Рукоять, насадки (S, W по 1 шт)

Арт. 21-020




Насадки



Насадки

Рукоятка
Арт. 21-021

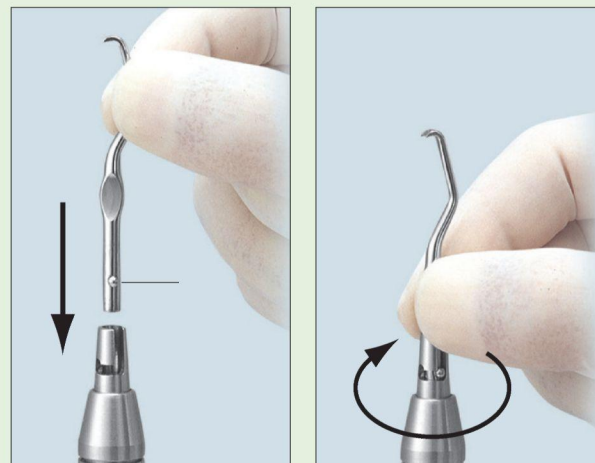

Для смены насадки достаточно вставить ее вертикально и повернуть по часовой стрелке

При помощи этого набора можно легко выполнить съем мостовидных конструкций и в том числе одиночных коронок. Рукоятка, кольца проволочные – 3 шт (S), 1 шт (L), крючок для проволоки, насадки для удаления W и S, насадки для установки.

Арт. 21-030




Может использоваться для съема временных коронок, мостовидных конструкций и т. д.

Насадки

Арт.	Обозначения
21-021	Насадка для удаления пломб
21-022	Кольцо проволочное S
21-023	Кольцо проволочное L
21-024	Крючок для проволоки


Арт.	Обозначения
21-013	Насадка для удаления S
21-012	Насадка для удаления W
21-025	Насадка для установки №1
21-026	Насадка для установки №2
21-027	Насадка для установки №3

Способ установки петли

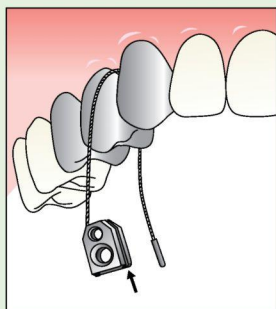


Пропустите проволоку между зубами, затем вставьте в отверстие, на которое указывает стрелка

Способ установки малых колец

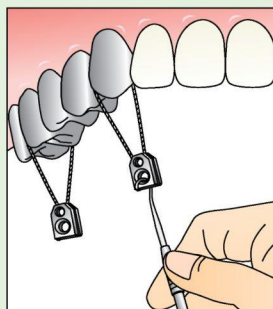

В случае, если вы имеете дело с длинным мостом, используйте несколько маленьких колец

Способ установки больших колец

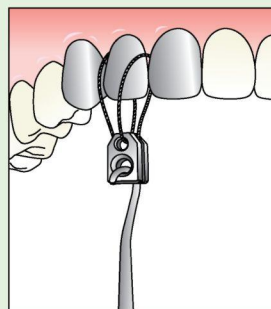

Большое кольцо используется в случае, если необходимо обвязать зуб с 2х сторон, что позволяет приложить усилия к двум местам

Насадки для установки выполнены из POM, до 162°C
Не дезинфицировать в автоклаве кейс и порошковую подложку

Насадки для установки




№1
Арт. 21-025



№2
Арт. 21-026



№3
Арт. 21-027

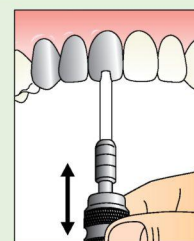

Насадки для установки выполнены из POM, до 162°C


Щипцы для удаления штифтово-культевых вкладок

Арт. 21-070

1/1



пример

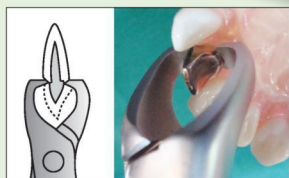

Облегчает удаление вкладок, благодаря специальной конструкции щечек инструмента, имеющих желобок.

Щипцы для разжимания коронок

Арт. 18-593


1/1

Щечки щипцов раскрываются на одинаковое расстояние, что позволяет аккуратно разжать коронку, с минимальным вредом для зуба. Рабочая часть имеет алмазное напыление, что предотвращает скольжение рабочей части по поверхности коронки. Облегчает снятие конструкций.



Губки расходятся в противоположные стороны относительно друг друга

пример

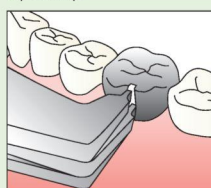

Щипцы вставляются в прорезь на коронке шириной 1,2-1,5мм. Затем коронка разжимается. Для коренных зубов: рекомендуется делать прорезь на углу, со стороны щеки, максимально близкому к центру коронки

Щипцы для снятия временных коронок

Арт. 21-077

1/1

Конструкция позволяет передавать максимальную концентрацию усилия на концы щечек, обеспечивая надежный захват коронок в пришеечной области, что уменьшает риск повреждения десны и соседних зубов

пример



Держатель для лент (штрипс)

Различные варианты держателя позволяют работать как в переднем, так и в боковых отделах.
С шестигранными болтами
Ключ к болтам поставляется в комплекте

1/1



Длина 100 мм

**Для передних
зубов**
Арт. 13-166

пример



Длина 115 мм



Для задних зубов
Арт. 13-167

пример



Максимальная ширина ленты 5 мм

Инструмент для удаления избытков цемента

пример

1/1



№1
Арт. 13-205




№2 Для коренных зубов
Арт. 13-206


Из нержавеющей стали
Легко различимы, благодаря рукояткам
5 разных цветов




110
Арт. 18-410

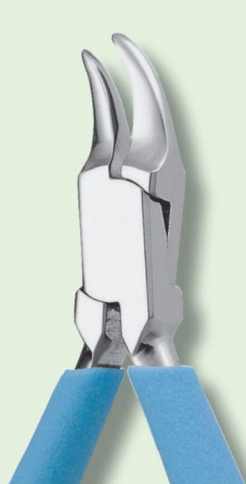


Raynold 115
Арт. 18-415

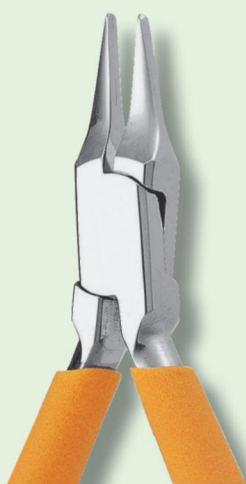

Piso 118
Арт. 18-418

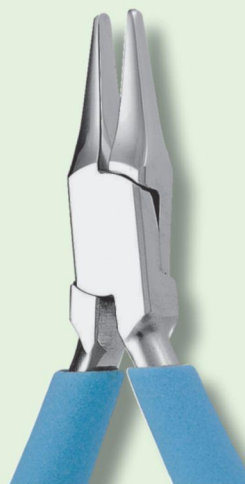

Robinson 120
Арт. 18-420

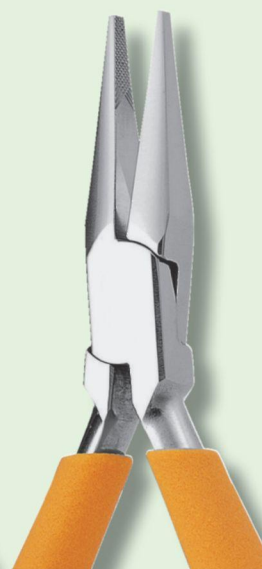


С нарезкой 121
Арт. 18-421




Гладкие 122
Арт. 18-422



Guaslee 136
Арт. 18-436

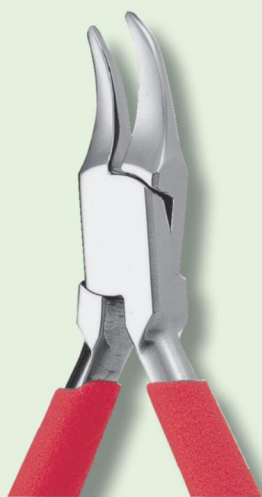

Gordon 137
Арт. 18-437

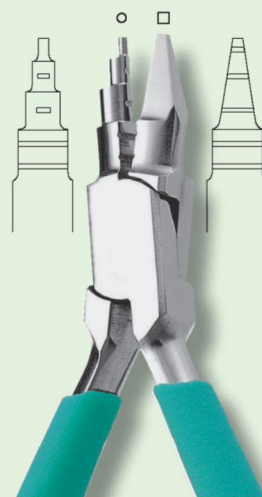


Young R74
Арт. 18-474




С желобком
Арт. 18-480

Диаметр проволоки до 1 мм
Не автоклавируют

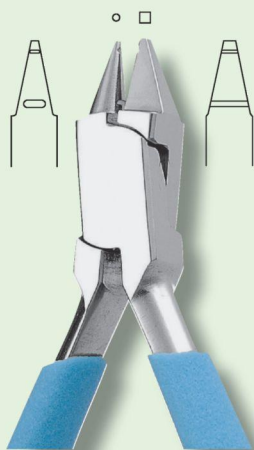

Щипцы бюгельные 1
Арт. 18-481

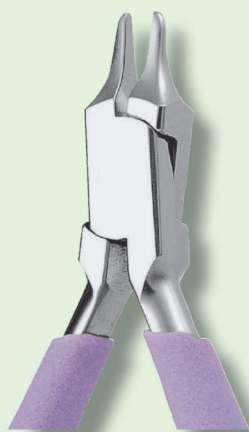

KI
Арт. 18-482



Three jaw
Арт. 18-483

Диаметр проволоки до 1мм
Не автоклавировать

Инструмент для загибания балок/лигатурной проволоки



KI
Арт. 18-701



№2
Арт. 18-702

Не автоклавировать


Щипцы для загибания балок/лигатурной проволоки

Подходят для загибания челюстных дуг

1/1



№1
Арт. 18-751

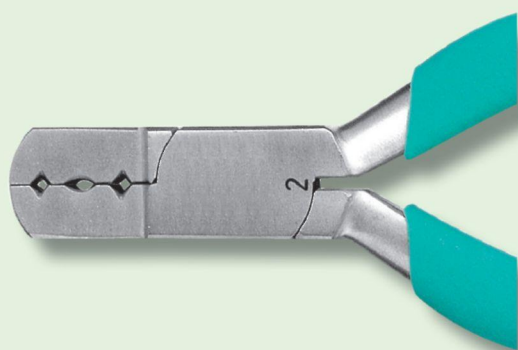

№2
Арт. 18-752

Не автоклавируют

Щипцы для растягивания проволоки

Арт. 18-861

1/1




Не автоклавируют

Щипцы конусообразные для коронок

Арт. 18-640

Применяются для устранения недоделок при подгонке коронок
А так же для проверки внутренних поверхностей

1/1

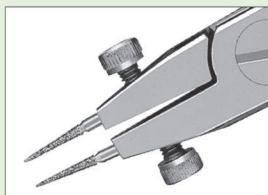


Используются
с алмазными
наконечниками

Не автоклавируют


Держатель коронок

Материал не соскальзывает, благодаря алмазному напылению на кончиках пинцета
3 точки соприкосновения на пинцете для коренных зубов обеспечивают надежный захват

1/1

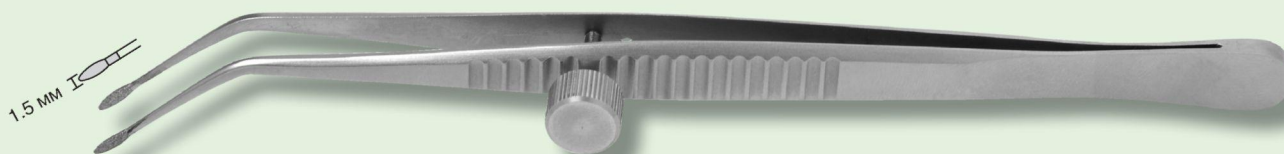

**Изогнутый
(для передних)**
Арт. 18-645

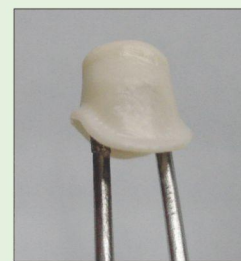


**Изогнутый
(для коренных)**
Арт. 18-646


Не автоклавируют



**YS-602
KI**
Арт. 22-602
Максимальный
диаметр
проволоки 1,1 мм

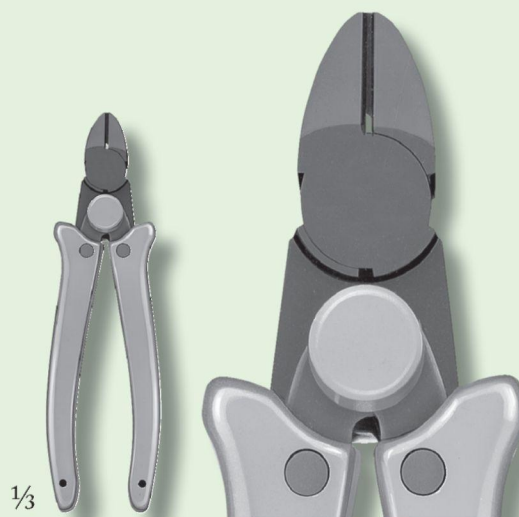


**YS-603
Стандартные**
Арт. 22-603
Максимальный
диаметр
проволоки 1,2 мм

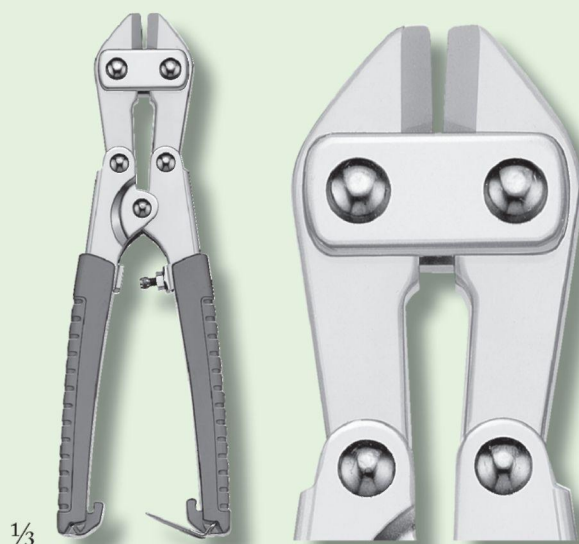

Усиленные
Арт. 18-590
Максимальный диаметр
Жесткая проволока 2,9мм
Мягкая проволока 3,2мм



Прямые
Арт. 20-905

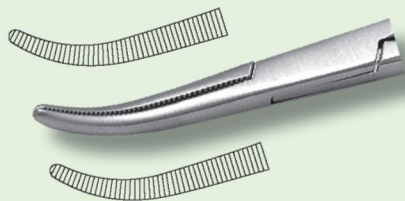

Изогнутые
Арт. 20-906



Щипцы с подставкой
Арт. 20-908

Отлично подходят для работ
со смолами и керамикой

Арт. 19-730

2/3



Расстояние между верхней и нижней рамой	100 мм
Треугольник Бонвиля	110 мм
Угол сагитального суставного пути	0–60° цена деления 5°
Трансверзальный суставной путь (угол Беннета)	0–30° цена деления 5°
Угол Балквилья	20°
Столик направляющий	Латеральная 10° 15° 20°
	Сагитальная 10° 15° 20°

Комплектация
Цокольное кольцо 2 шт.
Ретенционные пластины 10 шт.
Направляющие столики 15 и 20 град.
(10 град. установлен на артикуляторе)

Благодаря зажимному рычагу можно с легкостью снимать и закреплять верхнюю раму
Широкая область на нижней раме обеспечивает удобство в работе
Сохраняет устойчивое положение даже при откинутой верхней раме
Будучи перевернутым, остается стабильным, благодаря наличию 3-х ножек
На приборе имеется табличка для записи данных (название, номер)

Не автоклавируются

Кейс для хранения

Арт. 24-030

В кейс помещается артикулятор вместе с лицевой дугой

Кейс подходит для следующих моделей артикуляторов:

Wing, Mobile, Arcon, Condylar

А так же для дополнительных принадлежностей:

Лицевая дуга (тип 2), прикусная вилка, опора для верхней челюсти, Регулируемый окклюзионный столик, столик для Arcon, направляющие столики, цокольные пластины, накладные пластины



Размеры 370x285x165

Кейс: пластик

Перегородки: вспененный полиэтилен

Не дезинфицировать в автоклаве



Red
Арт. 19-726

Расстояние между верхней и нижней рамой	100 мм
Треугольник Бонвиля	110 мм
Угол сагитального суставного пути	25
Трансверзальный суставной путь (угол Беннета)	15
Угол Балквилля	20°
Столик направляющий	Латеральная 10°
	Саггитальная 10°

В комплекте:
2 цокольных кольца
10 ретенционных пластин

Удобен при послойном формировании
Благодаря зажимному рычагу можно с легкостью снимать и закреплять верхнюю раму
Широкая область на нижней раме обеспечивает удобство в работе
Сохраняет устойчивое положение даже при откинутой верхней раме
Будучи перевернутым, остается стабильным, благодаря наличию 3-х ножек
На приборе имеется табличка для записи данных (название, номер)



Green
Арт. 19-724



Blue
Арт. 19-722

Артикулятор полурегулируемый Spacy Mobile

Арт. 19-660

Широкая область на нижней раме обеспечивает удобство в работе. Будучи перевернутым, остается стабильным, благодаря наличию 3 ножек



Расстояние между верхней и нижней рамой	94 мм
Треугольник Бонвиля	110 мм
Угол саггитального суставного пути	5–15°
Трансверзальный суставной путь (угол Беннета)	0–20°
Угол Балквиля	20°
Столик направляющий	Латеральная 10° 15° 20°
	Саггитальная 10° 15° 20°

Столик направляющий 10° установлен на артикуляторе

Не автоклавируются

2/3

Артикулятор Spacy Condylar

Широкая область на нижней раме обеспечивает удобство в работе. Будучи перевернутым, остается стабильным, благодаря наличию 3 ножек



А
Арт. 19-635

Простота работы с моделями, при использовании магнитной системы фиксации цоколей 2 цокольные пластины в комплекте

Не автоклавируются



В
Арт. 19-640


Система фиксации с помощью цокольных колец

Расстояние между верхней и нижней рамой	94 мм
Треугольник Бонвиля	110 мм
Угол саггитального суставного пути	25°
Трансверзальный суставной путь (угол Беннета)	15°
Угол Балквиля	20°
Столик направляющий	Латеральная 10°
	Саггитальная 10°

2/3

Комплектующие для артикуляторов


1. Лицевая луга тип 2

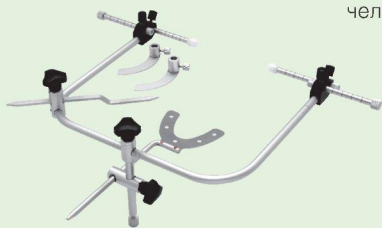

2. Прикусная ложка для полной челюсти (при отсутствии зубов)




3. Суппорт для верхней челюсти

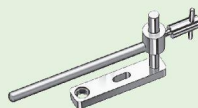

4. Регулируемый окклюзионный столик




5. Окклюзионный столик Condylar

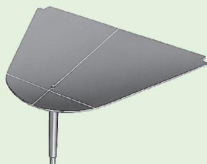

6. Окклюзионный столик Arcon




7. Цокольные пластины А (фиксация спицами)

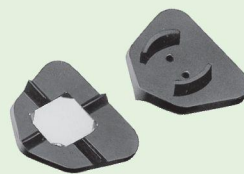

10 мм I 5.5 мм

8. Цокольные пластины В (фиксация винтом)

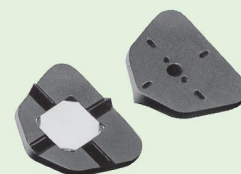


10 мм I 5.5 мм

9. Цокольные пластины Spacer



Толщина 5 мм

10. Диски ретенционные для магнитной площадки

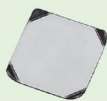

11. Цокольное кольцо




Толщина 5 мм

12. Спица



13. Рамка для разборной модели Die Lock Tray

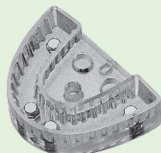


2 шт.

4 шт.




В комплекте с отверткой


14. Столик направляющий 10

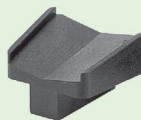

15. Столик направляющий 15

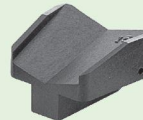

16. Столик направляющий 20

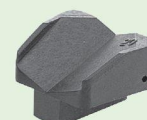

	Арт.	Наименование	Wing	Arcon	Condylar A	Condylar B	Mobile
1	19-682	Лицевая луга тип 2	+	+	+	+	+
2	19-681	Прикусная ложка для полной челюсти (при отсутствии зубов)	+	+	+	+	+
3	19-677	Суппорт для верхней челюсти	+	+		+	+
4	19-680	Регулируемый окклюзионный столик	+	+		+	+
5	19-649	Окклюзионный столик Condylar			+	+	
6	19-729	Окклюзионный столик Arcon	+	+			
7	19-650	Цокольные пластины А (фиксация спицами)			+		
8	19-655	Цокольные пластины В (фиксация винтом)	+	+		+	+
9	19-656	Цокольные пластины Spacer	+	+		+	+
10	19-645	Диски ретенционные для магнитной площадки	+	+	+	+	+
11	19-646	Цокольное кольцо	+	+		+	+
12	19-648	спица			+		
13	19-689	Рамка для разборной модели Die Lock Tray (2 шт./уп.)	+	+		+	+
14	90-136	Столик направляющий 10	+	+	+	+	+
15	90-152	Столик направляющий 15	+	+	+	+	+
16	90-153	Столик направляющий 20	+	+	+	+	+

Не дезинфицировать в автоклаве (кроме лицевой дуги и прикусной вилки)

Модель А

Арт. 19-501



Модель В

Арт. 19-502

Раздвижные верхние и нижние части обеспечивают легкое извлечение моделей




Не автоклавировать

Артикулятор для фиксации без гипса

Арт. 19-621

Для установки моделей не требуется гипс

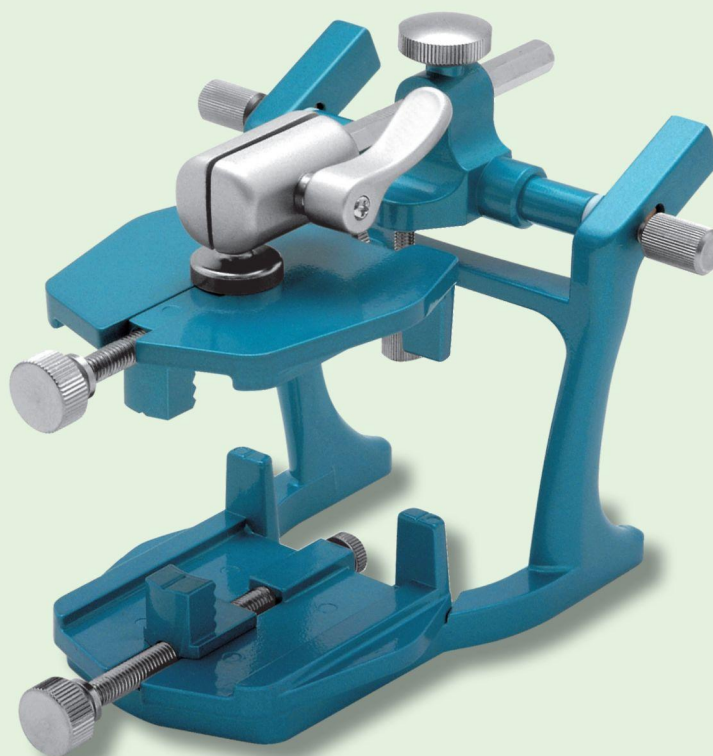

Не автоклавировать

Артикулятор простой

Арт. 19-601

3/5



Расстояние между верхней и нижней рамой	53 мм
Треугольник Бонвилля	70 мм
Угол саггитального суставного пути	20°

Не автоклавировать

Артикулятор простой тип 2

По сравнению с артикулятором, 19601 расстояние между рамками больше на 8 мм

1/2



Red
Арт. 19-611

Расстояние между верхней и нижней рамой	61 мм
Треугольник Бонвилля	70 мм
Угол саггитального суставного пути	25°



Green
Арт. 19-612

Не автоклавировать. Не дезинфицировать в автоклаве.

Арт. 19-622

Накладные пластины с магнитом позволяют с легкостью снимать протез
Прост в использовании, предназначен для перебазировки съёмных протезов

1/2



Размеры 170x80x130
Не автоклавируют



Evan
Арт. 07-160



Evan № AT1
Арт. 07-165



Evan № AT2
Арт. 07-166



Evan Slim
Арт. 07-164



Reglon
Арт. 07-161

Не автоклавировать

Инструменты Р. К. Thomas тип JM

1/1

Drop-on Insrtument



№1

Арт. 07-201



№5

Арт. 07-205

Не автоклавируют

Инструменты Р. К. Thomas тип YS

1/1

Drop-on Insrtument



№1

Арт. 07-211



№2

Арт. 07-212

Не автоклавируют

Пинцет Р. К. Thomas

Арт. 07-206

1/1




Не автоклавируют

Шпатель

Арт. 11-650

1/2

Для формирования восковых заготовок
Так же применяется для удаления остатков
воска со станков для работы с восковыми
формами

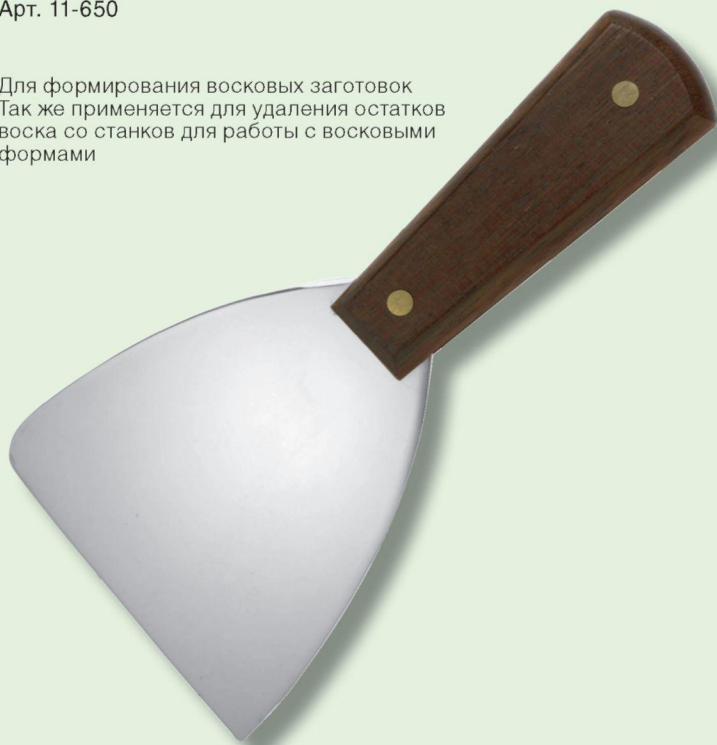

Не автоклавировать

Замок Fuji bite lock


Арт. 21-421
Комплект 12 шт.

Пример

1/1



Не автоклавировать

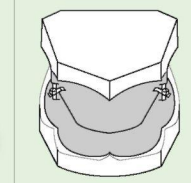

Устанавливается
между заготовками
предварительно
нагретым

Точилка алмазная для силиконовых и карборундовых полиров

Арт. 13-055

2/3

Алмазное покрытие с обеих сторон
Покрывание разной зернистости



Размер 110x17x3
Не автоклавировать

Шпатели восковые

1/1




№1

Арт. 11-601




№2

Арт. 11-602

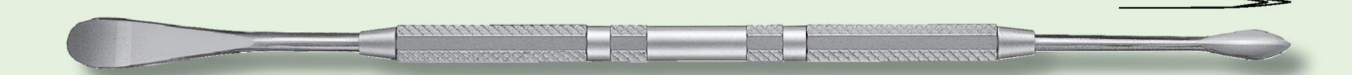

№7A

Арт. 11-607

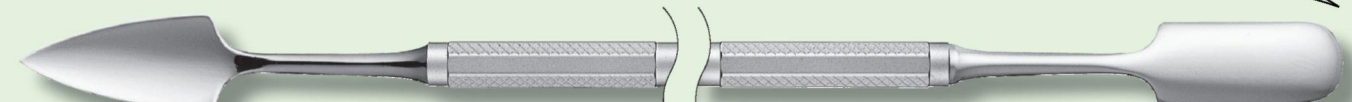

№31

Арт. 11-631

Длина 195 мм

Не автоклавировать

Наконечники можно комбинировать с любой из рукояток 7 цветов

Длина 105 мм

Черный



Длина ручки 95 мм

Красный



Голубой



Зеленый



Серебристый



Золотистый



Фиолетовый



Не автоклавируют

**Насадки для работы с пластмассами и композитами.
Титан-алюминиевое покрытие**

Насадки обладают высокой износостойкостью и твердостью



RA4



RA7



RA8



RA9



RB3



RB4

Без заточки



RC1



RC2



RC4



RD1



RD3



RD4




RD7



RD8

**Способ
заказа**

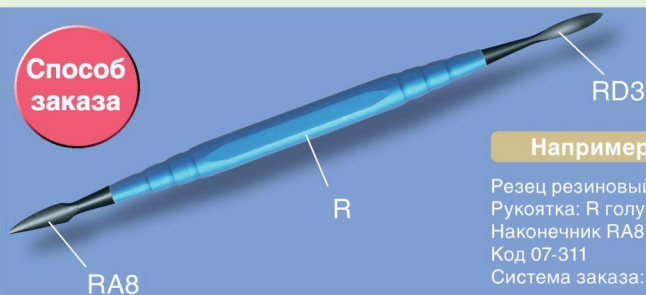


Например

Резец резиновый
Рукоятка: R голубая
Наконечник RA8 RD3
Код 07-311

Система заказа: инструмент+ R голубая+ RA8+ RD3

Арт.	Цвет
07-310	Красный
07-311	Голубой
07-312	Зеленый
07-313	Серебристый
07-314	Черный
07-315	Золотистый
07-316	Фиолетовый

Наконечники

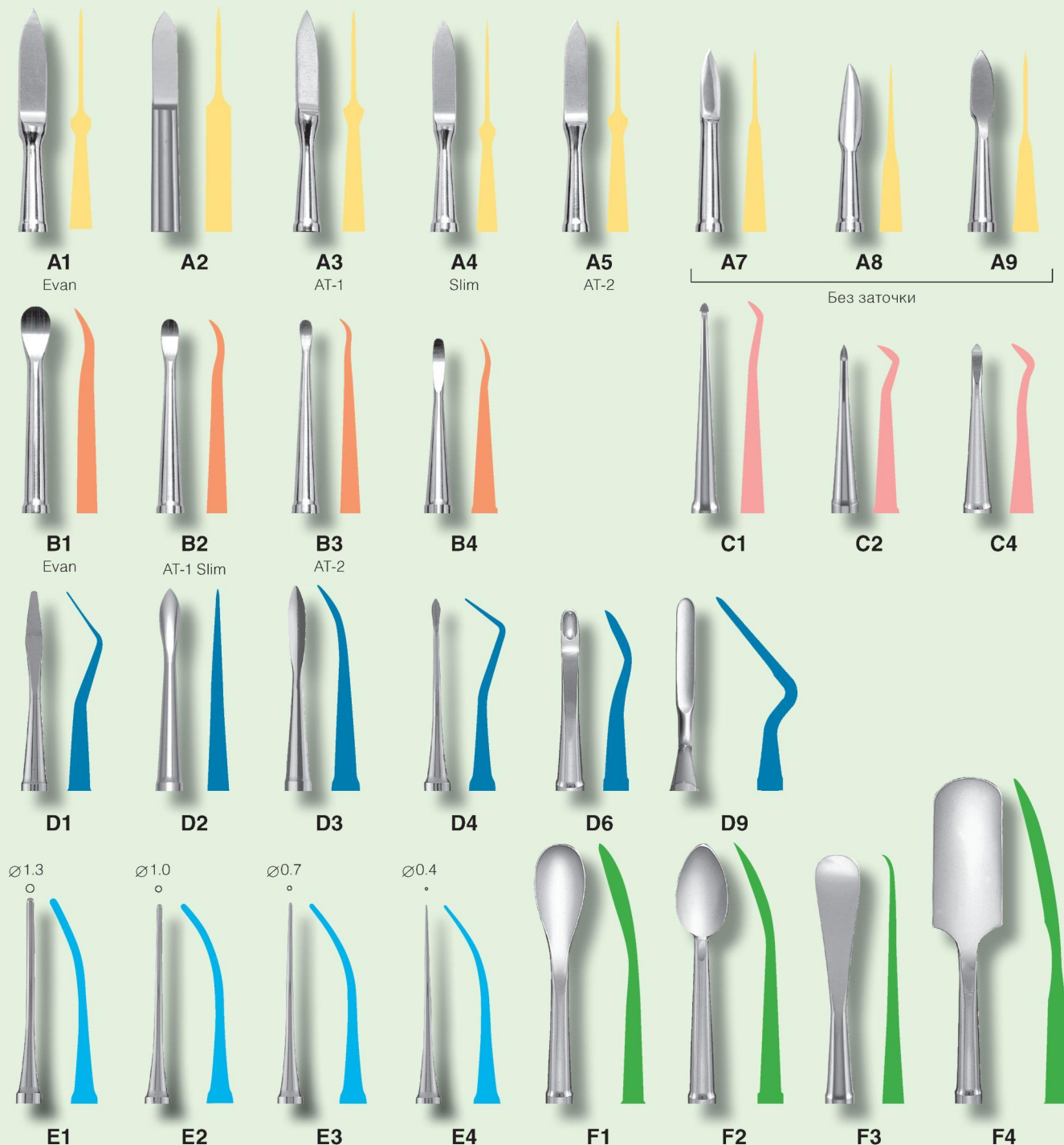

Способ
заказа

D1

Например

Резец по воску
Рукоятка: красная
Наконечник: D1+F2
Код 07-311

Система заказа: резец по воску R голубая + D1 + F2

F2

Арт.	Цвет рукоятки
07-300	Красный
07-301	Голубой
07-302	Зеленый
07-303	Серебристый
07-304	Черный
07-305	Золотистый
07-306	Фиолетовый




Jiscoid-creoid

Арт. 07-151



Carbon

Арт. 07-163

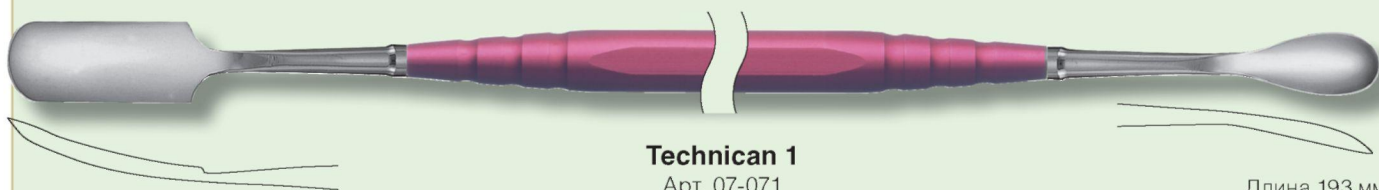

Technican 1

Арт. 07-071

Длина 193 мм



Holenback 3

Арт. 07-113



Holenback 1/2

Арт. 07-114


AY

Набор из 3-х предметов
Арт. 07-050




1

Арт. 07-051

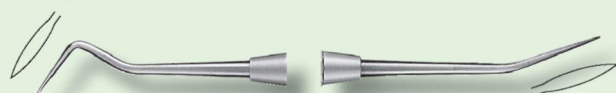

2

Арт. 07-052

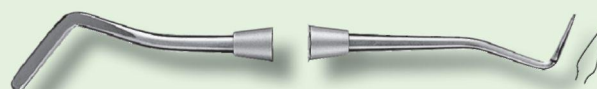

3

Арт. 07-053

Не автоклавируют



1
Арт. 07-011



Hyodo type 1
Арт. 07-041



Hyodo type 2
Арт. 07-042

Не автоклавируют

Молоточек деревянный

Арт. 21-511

¾



Не автоклавировать

Сеточка защитная лабораторная

Арт. 21-551


¾

Сетка выполнена из мягкой проволоки, поэтому пригодна для использования с керамическими коронками



Внутренний Ø64
Внешний Ø73

Не автоклавировать

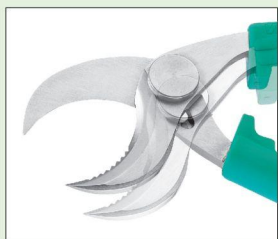

2 положения,
в зависимости
от величины
гипсовой модели



Универсальные

Арт. 18-815

Зубцы на режущей кромке уменьшают нагрузку на запястье



Изогнутые

Арт. 18-814



**Изогнутые
(с тремя губками)**

Арт. 18-813

Пример:



Удаление излишек гипса
происходит просто,
благодаря узким краям



Delicate

Арт. 18-816

Щипцы для гипса

2/3



L
Арт. 18-811



S
Арт. 18-812

Не автоклавировать

Лобзик для гипса

Комплект: ила, 3 полотна
Арт. 13-210

Полотно сохраняет остроту долгое время

4/5



Длина 210 мм

Дополнительно возможно
приобрести 6 полотен
Арт. 13-213



Длина 100 мм, толщина 0,2 мм

Не автоклавировать

Нож по гипсу

Арт. 21-340

1/1



Не автоклавировать

Пинцеты лабораторные

4/5



Прямые
Арт. 11-401



Изогнутые
Арт. 11-402



С виниловым покрытием

**Для работы
с кислотами**
Арт. 11-403

Не автоклавировать

Пинцеты с замком

1/1



YS-707 S
Арт. 22-707




YS-708 L
Арт. 22-708

Пинцет для фольги

Арт. 11-451

1/1

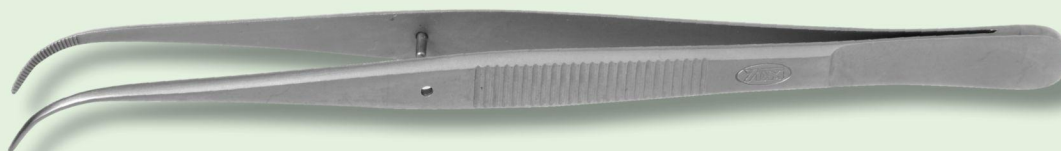


Не автоклавировать

Микрометр зуботехнический

Арт. 21-100

2/3

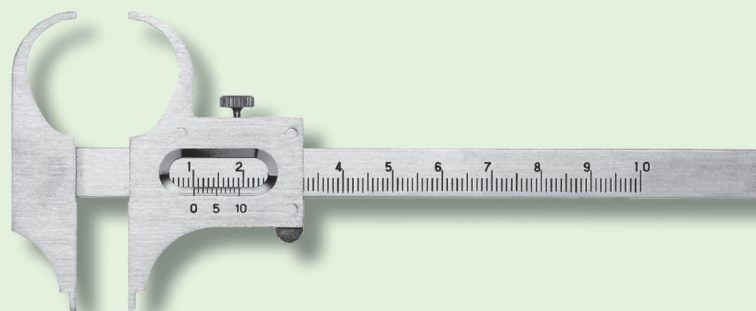


Не автоклавируют

Микрометр для стоматолога - ортопеда

Арт. 21-101

Для измерения протезов(внутренний и внешний диаметр, высота и ширина, вертикальные окклюзионные габариты)

2/3

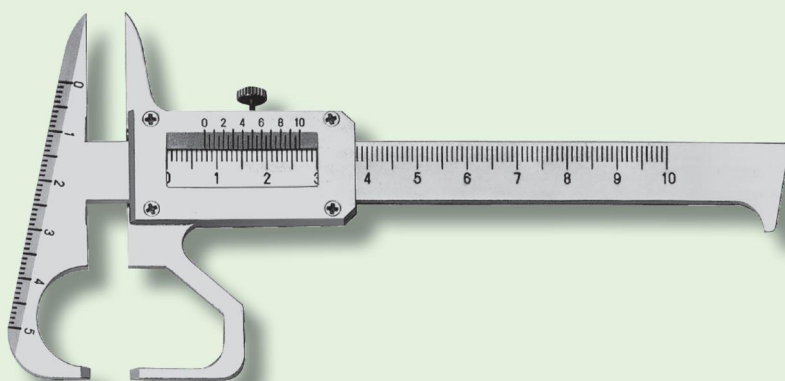


Не автоклавируют

Микрометр для определения прикуса

Арт. 21-121

2/3

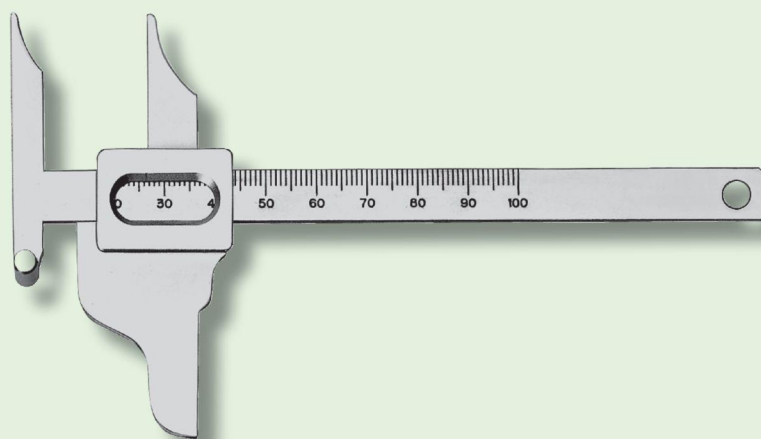

Не автоклавируют

Параллелометр ортопедический

Арт. 21-122

2/3




Не автоклавируют

Микрометр для протезов

Арт. 21-102

Используется в протезировании для измерения глубины/толщины прикусного шаблона.
Измеряет расстояние между центром основания носовой кости и полночелюстным зубным протезом

2/3

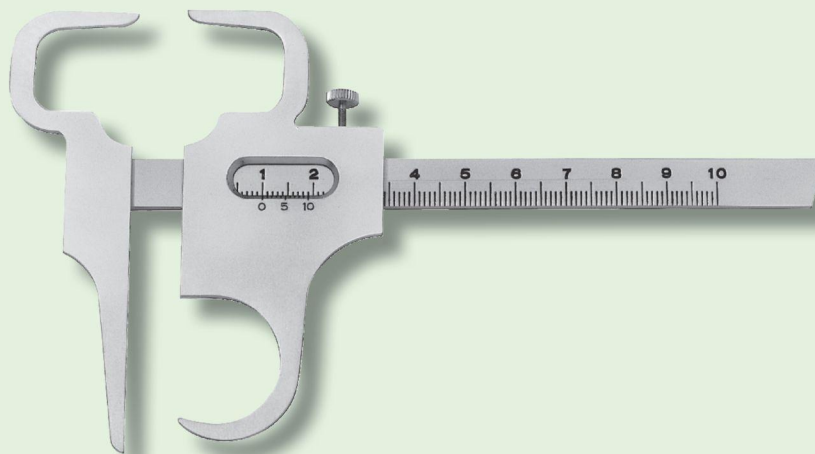

Не автоклавируют

Микрометры пружинные

Шкала нанесена с двух сторон

1/1



По металлу
Арт. 21-111



По воску
Арт. 21-112



Для металлических коронок
Арт. 21-113

Не автоклавируют



Для одной кюветы
Арт. 21-403
Максимальная высота 65 мм



Для двух кювет
Арт. 21-404
Максимальная высота 120 мм



Крючок для прессы
Арт. 21-418

Длина 500 мм

Не автоклавировать

Кюветы



Для верхней челюсти
Арт. 21-411



Для нижней челюсти
Арт. 21-412

Размеры ШГВ 100x95x57
Допускается горячая заливка
Со съемной средней крышкой
Не автоклавировать

Конструкция не позволяет засорить сопло воском. Сконструирована для манипуляций одной рукой. Возможность регулировки интенсивности пламени. Стабильное горение.

2/3



Labo

Арт. 22-771

Благодаря мощному пламени идеально подходит для грубых операций



Ortho

Арт. 22-772

Благодаря тонкому пламени идеальна для исправлений и деликатных операций

Характеристики

Вес 245 г (вместе с фоновым экраном)
Объем газа 15 г
Время горения Labo 35 мин, Ortho 80 мин
Температура пламени 1300°C



Сопло расположено под углом 70 градусов, что не позволяет пламени изгибаться вертикально и предотвращает засорение сопла воском

Конструкция



Дополнительно

Газовый баллон 130 г
Арт. 22-767

Размеры ШГВ 76,6x54,5x154
Не дезинфицировать в автоклаве

Стойка для пайки с фиксаторами

Арт. 21-552

Удерживает заготовки при помощи 2-х пинцетов в процессе пайки
Справа и слева имеется по 4 отверстия для перестановки держателей пинцетов



Размеры стойки 320x205
Не автоклавируют

1/4



Зеркало стоматологическое

Арт. 28-102
Упаковки по 50 шт.



Зонд

Арт. 28-101
Упаковки по 50 шт.



Зонд (для зубодесневых карманов)

Арт. 28-107
Упаковки по 50 шт.

Нестерильный
Дезинфекция в растворе и в ЕОГ
Не дезинфицировать в автоклаве

Сепараторы



Модель «Ivory»
(Для передних зубов)
Арт. 13-161




Модель «Eliot»
(Для коренных зубов)
Арт. 13-162

Набор разделительных пластинок

В комплекте по 10 шт.
каждого типа
Арт. 13-175

Позволяют защитить режущиеся зубы

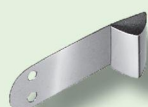


**Для передних
зубов**



**Для коренных
зубов**

Нержавеющая сталь
Толщина: 50 микрон
Не продаются по отдельности для передних или коренных зубов

Пример

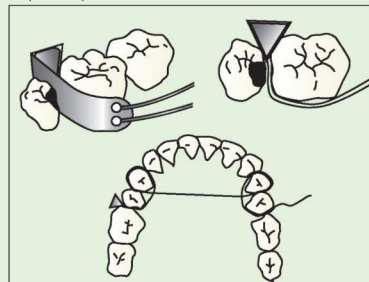

Закрепляются при помощи нити,
пропущенной сквозь межзубное
пространство

Роторасширители с блокировкой языка


Роторасширитель 1 шт.;
фиксатор для языка лев/пр - по 1 шт.

Набор (роторасширитель пр/лев - по 1 шт.;
фиксатор для языка пр/лев - по 2 шт.
Арт. 14-675

2/3



L
Арт. 14-676

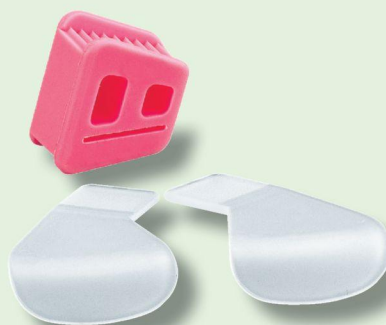

S
Арт. 14-677

Пример



В собранном состоянии




SS
Арт. 14-678

Таблица размеров (мм)

Наименование		W	D	H
Роторасширитель	L	40	35	17
	S	35	29	16
	SS	30	25	16
Фиксатор языка	L/S	52	34	—
	SS	39	24	—

Роторасширитель: выдерживает до 260 градусов, благодаря наличию кремния в составе материала
Фиксатор: Полипропилен (до 155 градусов)

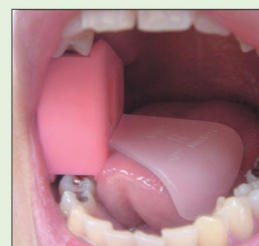

Позволяют поддерживать язык и держать ротовую полость открытой

Роторасширители универсальные

Роторасширитель - 1 шт.,
наконечники - 4 шт.

Взрослый
Арт. 14-666



Насадки выдерживают до 260 градусов




Детский
Арт. 14-668

Комплект насадок
для роторасширителя - 10 шт.

2/3

Арт.	Наименование	Размер а x b
90-187	Насадки для взрослого	21x13 мм
90-188	Насадки для детского	17x11 мм

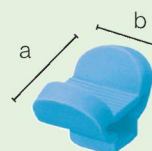

Роторасширитель детский

Арт. 14-665
Комплект - 2 шт.

Не позволяют случайно прикусить палец



Насадки выдерживают до 260 градусов



Насадки - 10 шт.
Арт. 90-186

2/3

Зеркала для фотографирования



Материал: нерж. сталь
Формируют четкое изображение

Набор из 3-х зеркал
Арт. 13-570




Благодаря изгибу, рука не попадает в кадр


Прочные зеркала, выполненные из нержавеющей стали. Сделаны с учетом анатомического строения челюстного аппарата. Изображение не удваивается, благодаря прямому отражению.

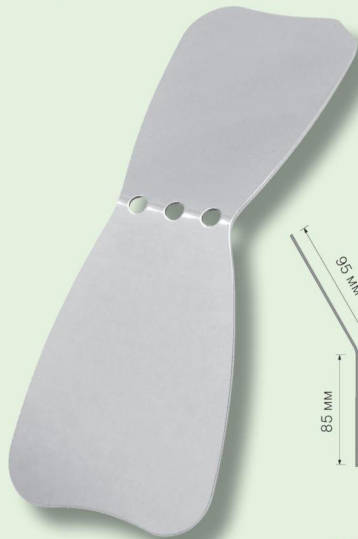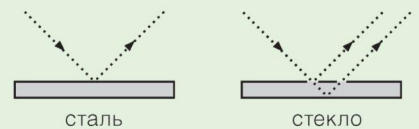


Зеркало для прикуса L
Арт. 13-576

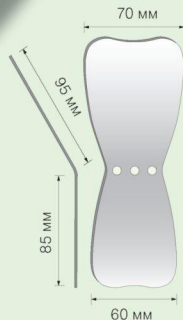

Зеркало для прикуса S
Арт. 13-577

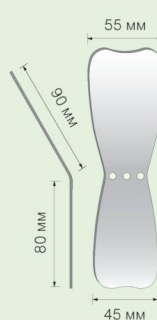

Зеркало для прикуса
Арт. 13-571

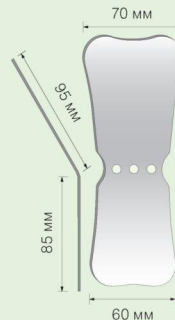


Зеркало для языка
Арт. 13-572



Зеркало для щек
Арт. 13-573

Контрастеры

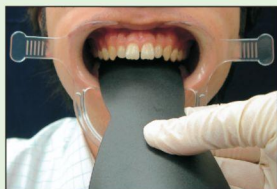

Набор (для передних зубов L; для коренных зубов)
Арт. 13-640




Для передних L
Арт. 13-641



Для передних S
Арт. 13-643





Для коренных
Арт. 13-642

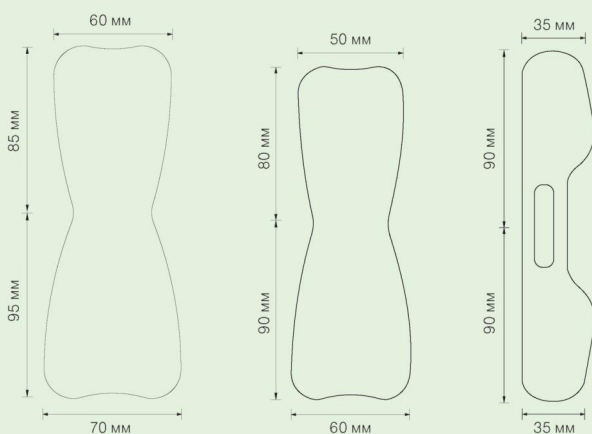

Передние верхние L Передние верхние S Для коренных


Благодаря тому, что фон съемки черный, можно четко определить форму и оттенок зубов

	С контрастером	Обычная съемка
Передние верхние		
Коренные нижние		

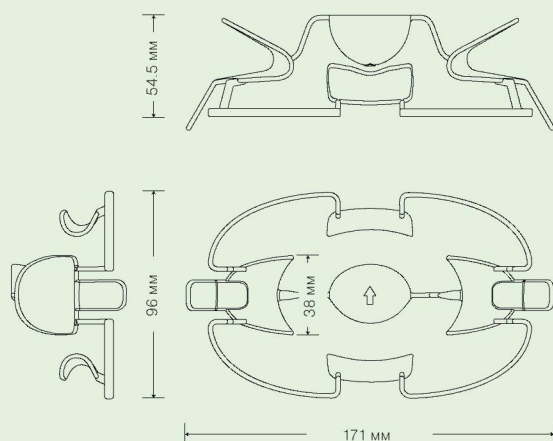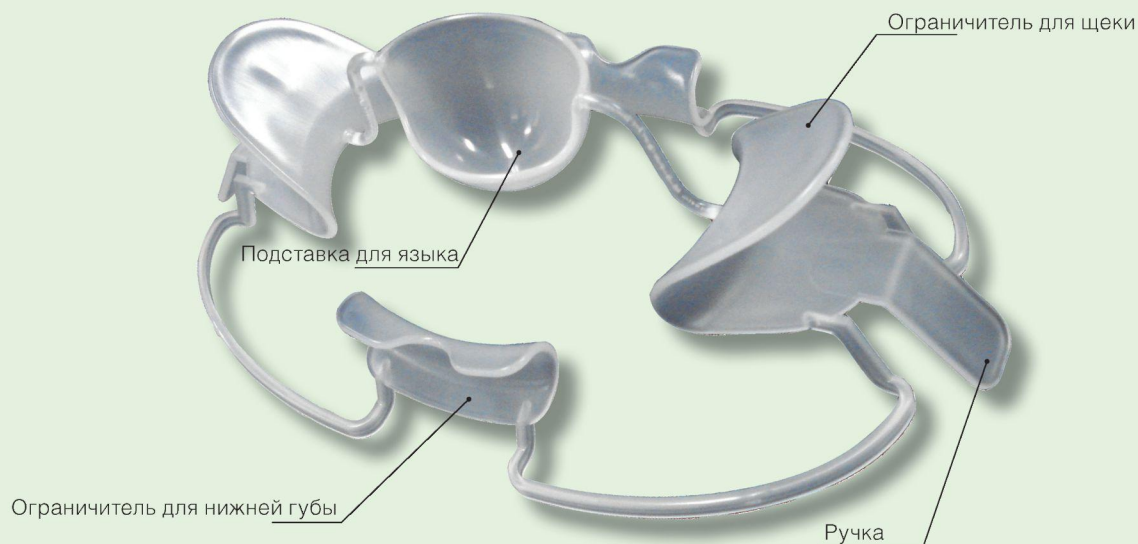

L


Арт. 22-750
Размеры 171x96x54,5

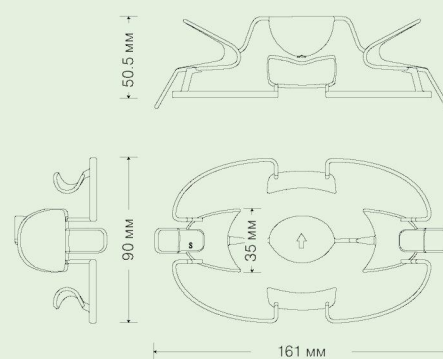


S

Арт. 22-749
Размеры 161x90x50,5

Способ использования

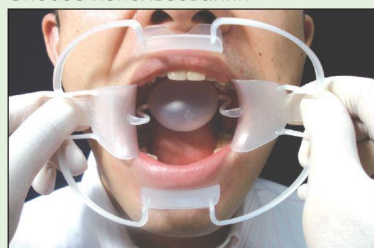


Поверните стрелкой на подставке для языка кверху, сожмите за ручки, и установите с обеих сторон

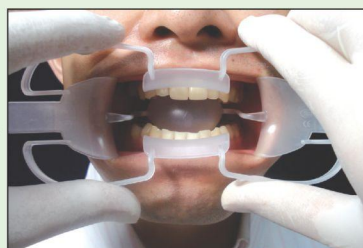


Прикрепить на верхнюю и нижнюю щеки

Хорошо балансирует давление на губы и язык
Эффективен при манипуляциях с брекетами, отбеливании и эстетической коррекции

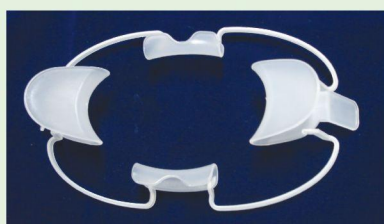

Можно использовать, удалив подставку под язык

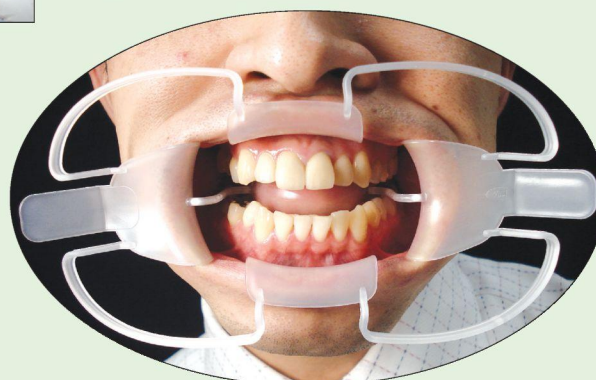

Материал: РР. Выдерживает до 120°C
Избегайте высокой температуры и попадания ультрафиолетовых лучей



A
Арт. 22-731
Комплект – 2 шт.




B
Арт. 22-732
Комплект – 2 шт.




C
Арт. 22-733
Комплект – 2 шт.

Материал: TPX. Выдерживает до 160°C
Избегайте высокой температуры и попадания ультрафиолетовых лучей


Модель "Pigeon"

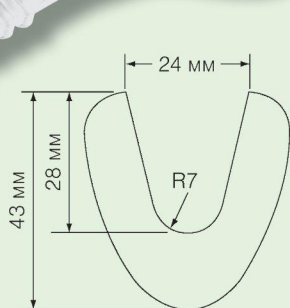

SS
Арт. 22-741

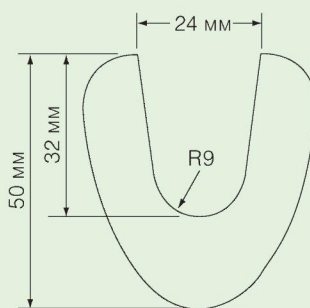

S
Арт. 22-740

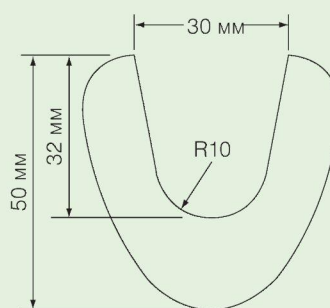

M
Арт. 22-739

Материал: TPX. Выдерживает до 160°C
Избегайте высокой температуры и попадания ультрафиолетовых лучей

Блокиратор щеки 2-х сторонний

Комплект – 2 шт.


В меру мягкий материал блокиратора не растягивает ротовую полость слишком сильно. А так же, будучи установленным у пациента, сводит к минимуму неприятные ощущения.



Арт. 22-745



**Мягкий
(голубой)**
Арт. 22-729

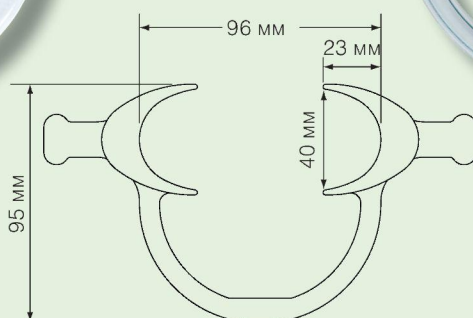

Модель выполнена из мягкого пластика

Материал: TPX. Выдерживает до 160°C
Избегайте высокой температуры и попадания ультрафиолетовых лучей


Боры можно рассортировать по типу, длине, назначению и т. д.
Обеспечивают надежный захват и удобный доступ к борам



Размеры ШхГхВ 69х10х41,5-56,5
С высокой дужкой: 69х10х55-70

Подходящие боры 17-38,5
С высокой дужкой 32-52
Вместимость 12 шт.
Материал POM (до 162°C)
Дезинфекция в растворе
Боры в комплект не входят

Арт.	Цвет
13-471	Желтая
13-472	Оранжевая
13-473	Розовая
13-474	Голубая
13-475	Зеленая

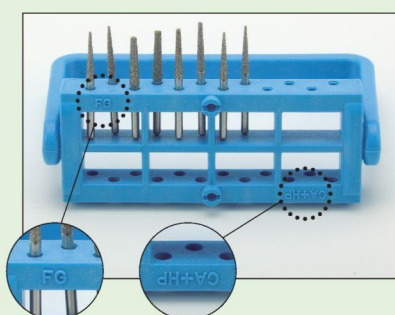

Перевернув подставку другой стороной можно использовать для боров FG и CA-HP



Может устанавливаться в 3-х положениях



Могут соединяться между собой



С высокой дужкой вмещают боры HP для протезирования

Подставки с высокой дужкой

Арт.	Цвет
13-481	Желтая
13-482	Оранжевая
13-483	Розовая
13-484	Голубая
13-485	Зеленая

Кейс для подставок
Арт. 08-439



Вместимость 18 шт.
Размеры 167х126х62
Не использовать в автоклаве
Дезинфекция в растворе
Подставки в набор не входят

Стерилизационный кейс
Арт. 08-440



Вместимость 12шт.
Размеры: 161х104х59
Перегородки: PP (до 155°C)
Подставки в набор не входят

Safety 2

При закрытой крышке боры не выпадут, даже будучи перевернутыми
Допускается стерилизация, дезинфекция и ультразвуковая чистка с установленными борами

2/3



FG
Арт. 13-631



CA
Арт. 13-632



FG-CA
Арт. 13-630



FG
Для коротких FG
Арт. 13-633

Вместимость 17 шт. (11 FG и 6 CA)
Боры FG; CA; и FG и CA 21-25
Короткие FG 17-21
Размеры 40x25x29
Для коротких FG 40x25x25
Боры в комплект не входят

Кейс для подставок
Арт. 13-583




Вместимость 6 шт.
Размеры 125x80x30
Не использовать в автоклаве
Дезинфицировать в растворе
Подставки в комплект не входят

Комплект – 2 шт.
В одно отверстие помещается до 12 шт.
Выполнены из антибактериального материала

3/3

Арт.	Цвет
13-302	Розовый (2 шт.)
13-303	Голубой (2 шт.)

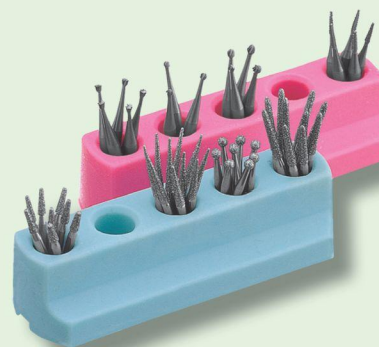


Размеры: 60x20x15
Выдерживают до 260°C
Боры в комплект не входят

Подставки для боров

Набор блоков

(CA – 3 шт.; HP и FG по 2 шт.; кейс)

1/3

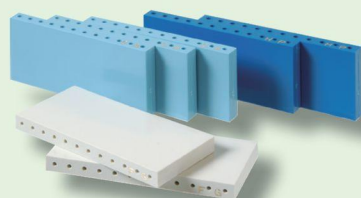

Арт.	Наименование
13-441	Светло-голубые блоки
13-442	Синие блоки
13-443	Блоки цвета Слоновой кости
13-444	Контейнер для блоков

Размер кейса 100x70x50
Не использовать в автоклаве

Магнитный держатель

1/3

Арт. 13-301

Магнит позволяет легко
снимать и прицеплять боры



Размеры 82x25x28
Можно использовать для боров HP
Не использовать в автоклаве
Боры в комплект не входят


ST

Арт. 13-406

Крышка используется в качестве подставки



Размеры 94x56x40
Вместимость CA 22 шт. (5 исп для длинных боров)
Боры FG – 22 шт.
Зеленые и розовые части из PP (выдерживают до 155°C)
Боры в комплект не входят

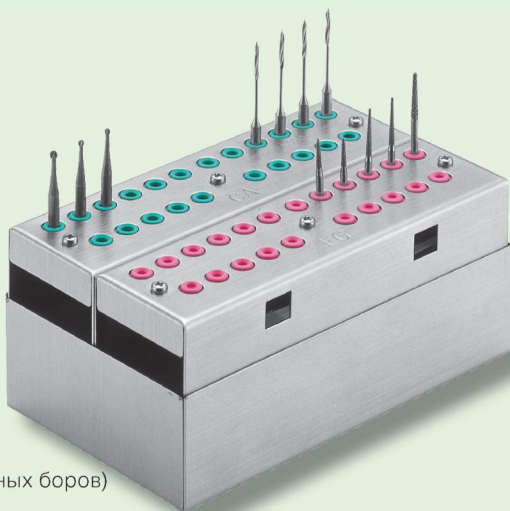


Арт.	Наименование
13-407	Вставки CA (зел.)
13-408	Вставки FG (роз.)
13-409	Крышка

1/2

Private

Держатели для боров FG и CA по 5 шт.
Стойки – 5 шт.
Лоток

Можно свободно комбинировать держатели для боров FG и CA

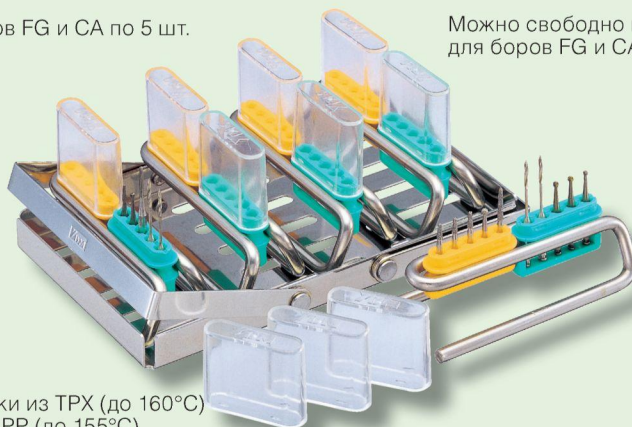

Размеры:
Лоток – 121x74
CA вставки 28x9x36
FG вставки 28x9x34
Прозрачные колпачки из TPX (до 160°C)
Цветные вставки из PP (до 155°C)
Избегайте ультрафиолета
Боры в комплект не входят

Арт.	Наименование
13-465	Зелён – 5 шт.
13-466	Желт – 5 шт.
13-467	Стойки – 5 шт.
13-468	Лоток

2/3

Новая модель

Арт. 13-401

На фото крышка в качестве подставки




Размеры 100x69x49
Вместимость 108 (по 54 FG и CA)
Не использовать в автоклаве

1/3

Обычная модель

Арт. 13-402

На фото крышка в качестве подставки
Вместимость 144 (HP 48 и CA 96)

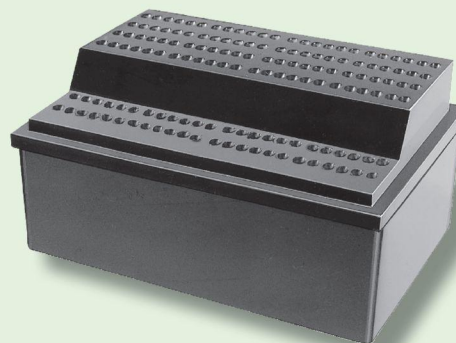

Размеры 115x80x55
Не использовать в автоклаве

1/3

Камни из природного материала для заточки инструментов

Точильный камень; тестер – по 1 шт.

2/3



Профиль

6A

Арт. 13-030

Размер Д.100/В.50/Т.10



Профиль

6AS

Арт. 13-032

Размер Д.76/В.50/Т.10

Тестер для проверки остроты
Арт. 53-016



Тестер используемый для проверки остроты во время заточки
Размер 100x8
Материал: РС (до 115°C)
Очищать спиртовым раствором

Т. к. камень выполнен из природного материала,
может отличаться от фото. Не использовать в автоклаве

Камни из керамики для заточки инструментария

Точильный камень; тестер – по 1 шт.
Арт. 13-044

2/3



Профиль

Пример



Во время заточки не требуется масло или вода
Выполнен из керамики, поэтому можно использовать в автоклаве
Используется для правки кюрет и зондов благодаря наличию 2-х канавок соответствующей формы

Размер Д.80/В.40/Т.8

Карандаш для заточки

Арт. 13-416

2/3



Пример



Изготовлен из вольфрамового сплава

Тестер для проверки остроты инструмента

Арт. 13-415

2/3



Не автоклавировать

Камни для заточки

2/3



А (Клиновидный) Вид сбоку
Размер Д.100/В.26./Ш.6
Арт. 13-001



Ф (Прямоугольный) Вид сбоку
Размер Д.102/В.26./Ш.6
Арт. 13-006
Для финишной заточки



В (Овальный) Вид сбоку
Размер Д.100/В.13./Ш.7
Арт. 13-002
Для внутренних поверхностей



Г (Клиновидный) Профиль
Размер Д.100/В.50./Ш.10
Арт. 13-041



С (Квадратный) Вид сбоку
Размер Д.100/В.13./Ш.13
Арт. 13-003

Не автоклавируют

Боры для заточки инструментов

1/1



L
Арт. 13-051



M
Арт. 13-053



S
Арт. 13-052

Не автоклавируют

Инструментальное масло

Для заточки, смазки, защиты

Арт. 13-093

Нанесите небольшое количество на инструмент, перед дезинфекцией в автоклаве, для предотвращения коррозии
Эффективно для смазки подвижных частей щипцов
А так же при заточке зондов и кюрет.



20 мл

Арт. 13-539
Комплект - 5 уп. в коробке

Отличается высокой очищающей, дезинфицирующей и защищающей способностью

Z-1 eco

1/2



Состав:
Ионные ПАВ
Неорганические в-ва (производные кремниевой кислоты, соли уголекислоты, фосфаты, сульфаты)
Органические в-ва (карбоновая кислота и др.)

5 уп. По 30гр. На 2л раствора

Размер:
Коробка 125x35x88
Упаковка 120x80

Щипцы с бороздками

3/5




Прямые
Арт. 13-412

Изогнутые
Арт. 13-411

Пинцет хирургический

Арт. 13-414

4/5

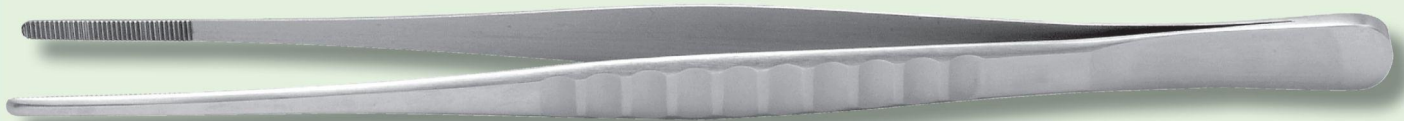


Длина 230 мм



2-х секционный
Арт. 13-555

Размер 100x50x60

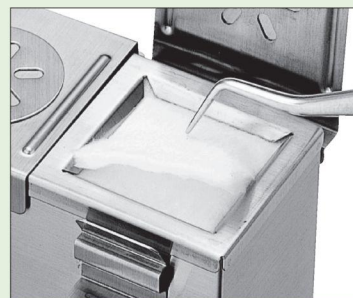

Рамка, прикрепленная на боксе позволяет вынимать по одной салфетке



С дополнительной задней крышкой для наполнения тампонами



3-х секционный
Арт. 13-557

Размер 150x50x60

Ватные тампоны в комплект не входят

Бокс для спиртового раствора системы One touch

Бокс для спиртового раствора

S

Арт. 13-621

Размер 80x57


L

Арт. 13-622

Размер 98x80



Предотвращает испарение спирта

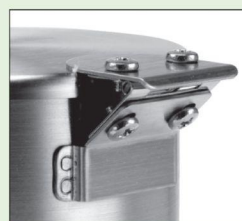

Возможна замена шарнира

Шарниры

Арт.	Наименование
90-347	Шарниры S
90-348	Шарниры L

Для ватных шариков

Арт. 13-559



Сменный блок устанавливается через заднюю крышку (размер блока 35x35x40). Благодаря перфорированной рамке можно вынимать по одному ватному шарiku.



Размер 46x46x50
Ватные шарики в комплект не входят

1/3

Для ватных роликов

Арт. 13-620

Благодаря наличию перегородки можно помещать 2 типа роликов. Перегородка позволяет устанавливать ролики как в длину, так и в ширину. Для легкого вынимания прикреплена рамка.



Размер 75x68x65
Ватные ролики в комплект не входят


1/3

Набор резервуаров системы One push

В наборе 3 бутылки (зеленые, серые, цвета слоновой кости)
Арт. 13-510



Размер 100x52x55
Материал блюдец содержит кремний и выдерживает до 260°C
Материал бутылок: PP (до 155°C)
Подставка так же выдерживает до 260°C

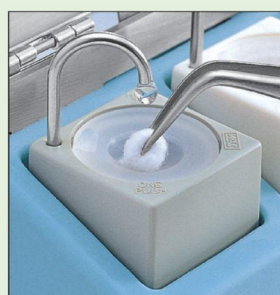

Достаточно слегка надавить на площадку, для подачи раствора по 1 капле. Можно менять бутылки в зависимости от нужд конкретного пациента.

1/3

Арт.	Наименование
13-511	Стойка под бутылки
13-512	5 бутылок (слоновая кость)
13-513	5 бутылок (голубой)
13-514	5 бутылок (зеленый)
13-515	5 бутылок (коричневый)
13-516	5 бутылок (серый)
13-517	Блюдца (5 шт.)
90-329	Краники (5 шт.)

Непригодны для использования:
Медикаменты, содержащие хлороформ, гипохлорид натрия, йод.
В случае их использования, тщательно промыть сосуды и насадки во избежание засорения и коррозии.

Арт. 13-520

Во время осмотра, вместо надоедливого откручивания и закручивания крышек, достаточно лишь откинуть крышку подставки назад
Бутылочки, использовавшиеся ранее(26x26) так же подходят для данной подставки

3/5



Размер 100x52x55
Цвет: голубой. Выдерживает до 260°C
благодаря наличию кремния
Баночки в комплект не входят

Шприц ирригационный

Арт. 13-227

Удобен в использовании и при стерилизации,
имеет разборную конструкцию.

4/5



Наконечник и корпус изготовлены из
PFA, выдерживает до 260°C
Ручки из PP (до 155°C)

Стойка для инструментов

Арт. 13-547

2/3

Имеет прочную конструкцию.
Устойчива к появлению ржавчины
Может использоваться для
щипцов, пинцетов и т. д.



Пример


Размеры: вн. диаметр 90, высота 135
Инструмент в комплект не входит

Стойка для щипцов комбинированная

Арт. 13-544

2/5

Имеет 2 ступеньки разной высоты (115 и 140 мм),
может использоваться и для длинных щипцов

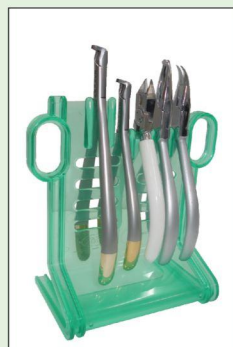


Размер 110x76x140
Не автоклавируются

Силиконовые насадки на инструмент

Комплект – 2 шт.
Снимает усталость с пальцев рук
Облегчает захват

3/5

Пример

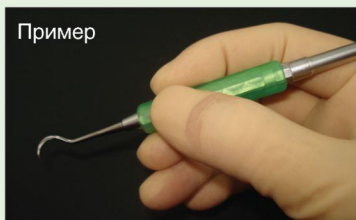

Внутренний диаметр 6,2 мм.
Внешний диаметр 9,0 мм. Длина 42 мм
Выдерживает до 260°C

Арт.	Наименование
13-590	Голубой (2 шт.)
13-591	Зеленый (2 шт.)
13-592	Розовый (2 шт.)

Щеточки для очистки

Комплект - 12 шт.

Применяется для чистки внутренних частей вакуумных наконечников и насадок пылесоса

2/3



S(Ø4)
Арт. 13-651

Для насадок слюноотсоса

Длина 200 мм



L(Ø12)
Арт. 13-653

Для насадок пылесоса

Длина 180 мм

Не автоклавируются


Проволока для чистки

Арт. 13-654

Комплект - 12 шт.

Используется для чистки тонких (30°) всасывающих трубок (сравни со стр. 85)

2/3

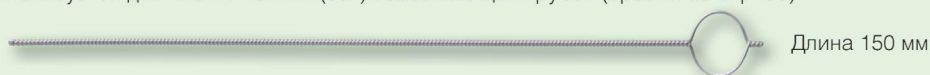

Длина 150 мм

Ø1.1

Цветная маркировочная лента

Гигиенична, благодаря закрывающемуся кейсу

1/2



Арт.	Наименование
13-661	Красный
13-662	Желтый
13-663	Голубой
13-664	Зеленый
13-665	Белый
13-666	Черный
13-667	Серый



Стоика для ленты
Арт. 13-669
Вместимость: 7 катушек.
Лента в комплект не входит

1 катушка – 3 м
Ширина – 3 мм
Размеры: 8x72x44

Кольца маркировочные цветные

S

Комплект – 20 шт.



Арт.	Наименование
13-523	Красный
13-524	Зеленый
13-525	Коричневый
13-526	Синий
13-527	Чёрный
13-528	Желтый
13-529	Серый
13-530	Белый
13-671	Розовый
13-672	Оранжевый
13-673	Salmon Pink
13-674	Sky Blue
13-675	Фиолетовый
13-676	Хаки

L

Комплект – 10 шт.



Арт.	Наименование
13-531	Желтый
13-532	Красный
13-533	Синий
13-534	Зеленый
13-535	Розовый
13-681	Коричневый
13-682	Черный
13-683	Серый
13-684	Белый
13-685	Оранжевый
13-686	Salmon pink
13-687	Sky blue
13-688	Фиолетовый
13-689	Хаки

Используется для зондов с тонкой рукояткой
Внешн. диаметр 6 мм, внутр. диаметр – 4 мм;
ширина 3 мм
Выдерживают до 260°C


Может использоваться для круглых рукояток инструмента, сетчатых лотков, щипцов для удаления зубов
Внешн. диаметр 10мм, внутр. диаметр – 8мм; ширина 5мм
Выдерживают до 260°C

Лотки стерилизационные

Для стерилизации ручного инструмента

Силиконовый коврик на дне лотка позволяет исключить перемещение инструмента внутри лотка при транспортировке.


1/3

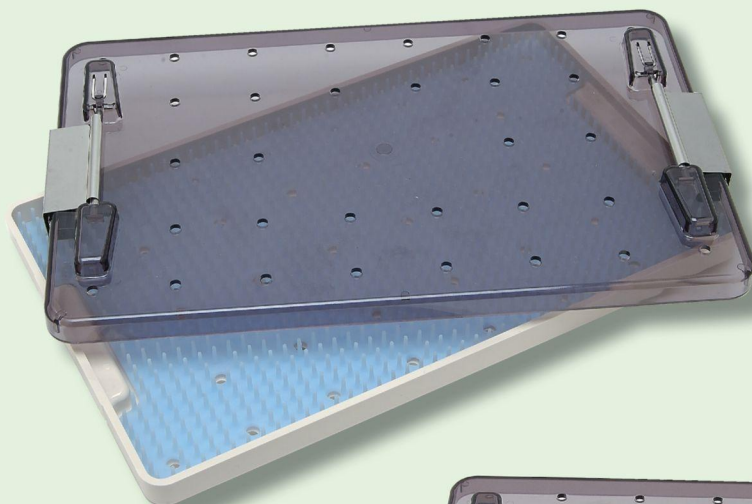

№1

Арт. 24-021

Размеры:
Внутренние: 257х169х16
Внешние: 285х175х33

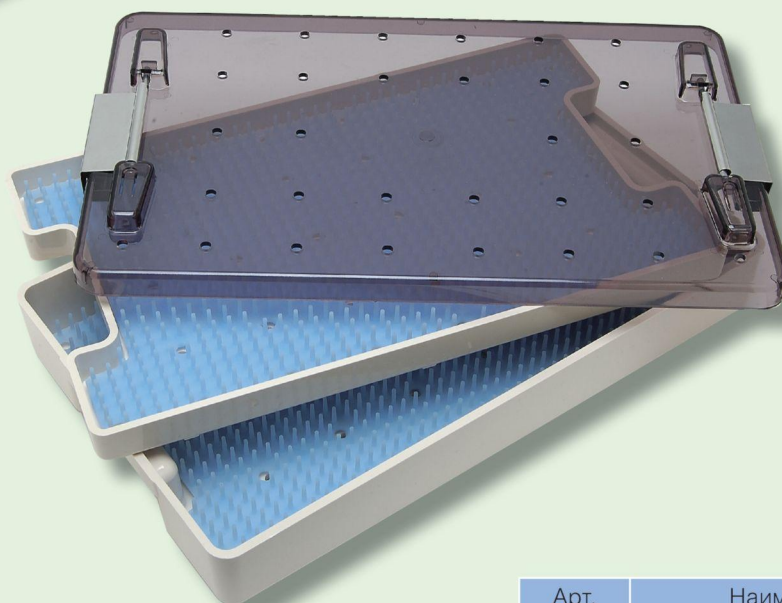

№2

Арт. 24-022

Размеры:
Внутренние: 267х159х35
Внешние: 285х175х52

Лоток изготовлен из PEC (до 200°C)
Коврик выдерживает до 260°C

Арт.	Наименование
90-373	Коврик для лотка №1
90-374	Коврик для лотка №2, верхн.
90-375	Коврик для лотка №2, нижн.


Кассета стерилизационная

Арт. 24-004

Не занимают много места, благодаря тому, что могут составляться одна на одну. Инструмент надежно фиксируется в кассете, благодаря зажимам


1/2

Пример

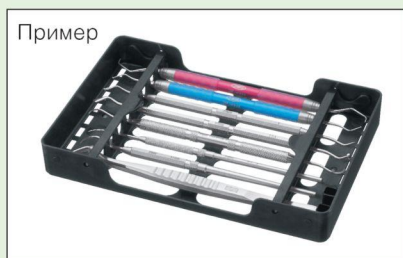

Вместимость: 8 предметов
Размеры 185х120х25
Материал: PPC (до 260°C)
Избегать ультрафиолета

Форма перегородок лотка предотвращает движение инструмента во время стерилизации.


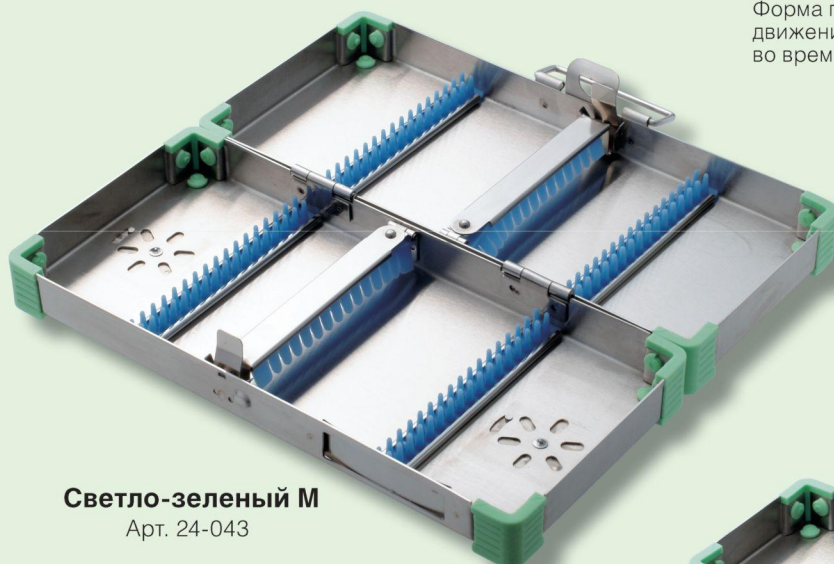


Светло-зеленый М
Арт. 24-043

Размер 202x92x40

Светло-зеленый S
Арт. 24-042

Размер 202x65x40

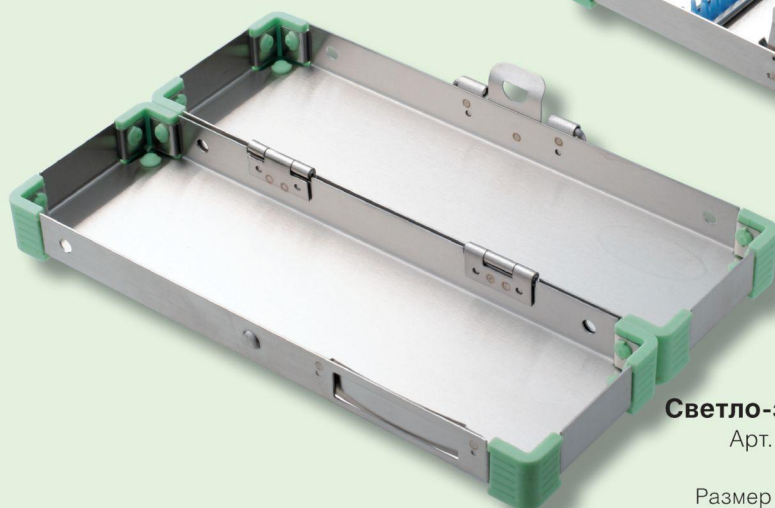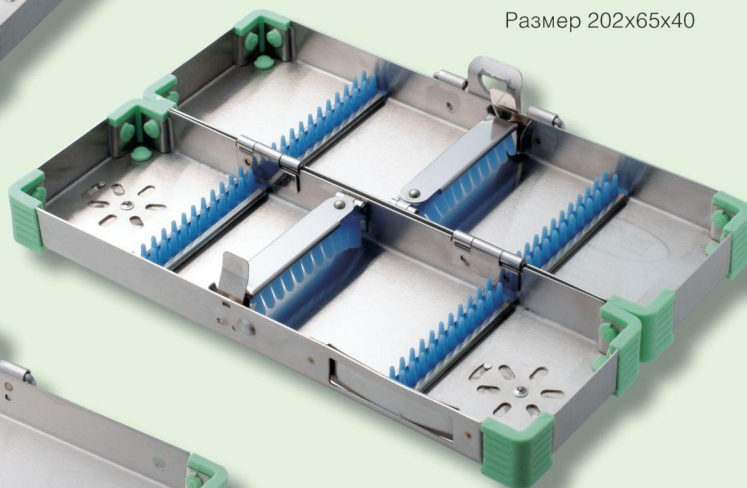

Светло-зеленый S
Арт. 24-041

Размер 202x65x40

Пластиковые части выдерживают до 260°C

Стерилизационный кейс

Контейнер, решетка
Арт. 24-005

Набор



Пригоден для автоклавирования
Имеет новые габариты, в отличие от старых моделей

Ёмкость стальная для стерилизации боров


Ёмкость – 1 шт.
Корзинка – 2 шт.

Может использоваться в следующей последовательности:
Дезинфекционный раствор, ультразвуковой очиститель, автоклав

4/5

Арт. 13-304

Пример

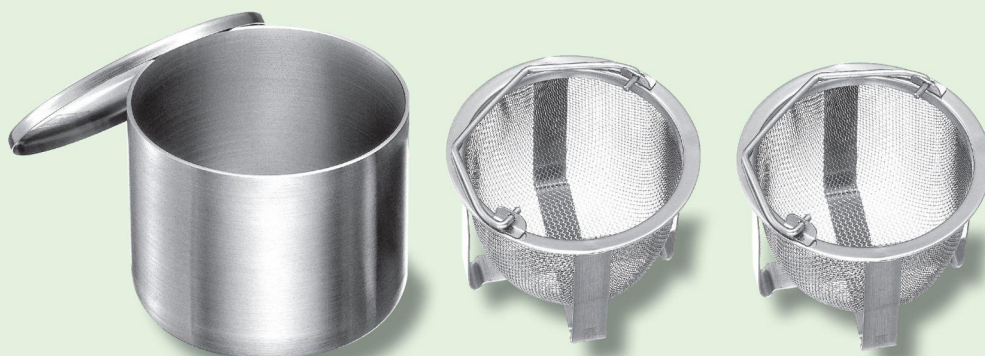

Размеры:
Стакан 75х55
Корзинка 70х45

Стерилизационная сетка для боров

Арт. 13-445

1/2



Размер: Ø60, высота 73

Контейнер для стерилизации в жидких растворах

Контейнер, лоток Лоток выполнен из мелкоячеистой стальной сетки, для предотвращения выпадения насадок
Арт. 24-018

2/5



Набор



Размеры контейнера: 319х230х113
Размеры лотка: 297х195х80
Вместимость: 4,5 л

Надевается на рабочую часть инструмента
Применяется для защиты, стерилизации,
дезинфекции
2 типа размеров в зависимости от
инструментов
S для зондов и кюрет
L для экскаваторов и долото



S

Арт. 13-542
Комплект – 20 шт.
Ø2 мм, длина 20 мм

L

Арт. 13-541
Комплект – 20 шт.
Ø4 мм, длина 30 мм

Выдерживают до 260°C

Пример




S



L

1/1

L 3.5 mm
S 2.6 mm

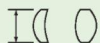

**ND-202 L
ND-202 S**
Для выравнивания
проволоки
L Арт. 22-102
S Арт. 22-103



ND-204
Для придания
формы проволоке
Арт. 22-104



ND-303
Для удаления
проволоки
Арт. 22-133



Для удаления
композита после
съёма брекетов

ND-304 A
Для удаления композита
с передних зубов
Арт. 22-134



ND-304 P
Для удаления
композита
с задних зубов
Арт. 22-135

Дополнительно



**Вставка для
удаления
проволоки**
Арт. 90-081
Комплект – 3 шт.



**Вставка для
удаления
композита**
Арт. 90-336
Комплект – 3 шт.



ND-304 A
Сменный
наконечник для
удаления композита
(для передних зубов)
Арт. 90-337



ND-304 P
Сменный
наконечник для
удаления композита
(для задних зубов)
Арт. 90-338




ND-306
Для снятия
брекетов.
Твердосплавные
Арт. 22-137



**ND-401
Peeso**
Арт. 22-141



**ND-402
Young**
Арт. 22-142
Диаметр проволоки 0.04"

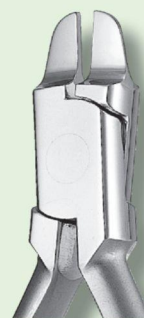

**ND-403
Tweed Arch**
Арт. 22-143
Диаметр
проволоки 0.022" – 0.028"

Периодически необходимо смазывать места соединения



**ND-405
Tweed Loop**

Арт. 22-145
Диаметр проволоки
0.022" – 0.028"



**ND-406
Adams**

Арт. 22-146
Диаметр проволоки
0.036"



**ND-407
Three Jaw**

Арт. 22-147
Диаметр проволоки
0.036"



**ND-409
Bird Beak**

Арт. 22-149
Диаметр проволоки
0.036"



**ND-410
Для мягкой проволоки**

Арт. 22-150
Диаметр проволоки
0.02"



**ND-411
Closing Loop**

Арт. 22-151
Диаметр проволоки
0.022"



**ND-418
Arch Shaping
Твердосплавные**

Арт. 22-158
Диаметр проволоки
0.02"



**ND-419
Kim
Твердосплавные**

Арт. 22-159
Диаметр проволоки
0.016" – 0.022"



**ND-420
Для мягкой проволоки
(с кусачками)**

Арт. 22-160
Диаметр проволоки
0.02"



**ND-502
How**

Арт. 22-152

**ND-502
How
твердосплавные**

Арт. 22-162



**ND-502 S
How**

Арт. 22-155



**ND-504
Utility**

Арт. 22-154

**ND-504
Utility
твердосплавные**

Арт. 22-164



**ND-504 W
Weingart**


Арт. 22-153

**ND-504 W
Weingart
твердосплавные**

Арт. 22-163

Щипцы Adams

1/1

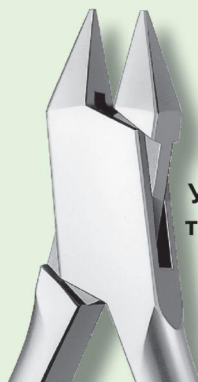

**Универсальные,
твердосплавные**
Арт. 22-001



Spring forming
Арт. 22-002

Периодически необходимо смазывать места соединения

Кусачки лигатурные

1/1



YS-605
Твердосплавные
Арт. 22-605

Диаметр проволоки до 0,3 мм



YS-605A
Твердосплавные
Арт. 22-655

Не дезинфицировать в автоклаве
Диаметр проволоки до 0,35 мм



YS-605B
Твердосплавные
Арт. 22-665

Диаметр проволоки до 0,35 мм

Периодически необходимо смазывать места соединения

Кусачки для обрезания концов лигатурной проволоки

1/1



YS-606S
Твердосплавные
Арт. 22-656

Диаметр:
Круглая проволока 0.012"-0.026"
Квадратная проволока 0.016"x0.016"- 0.022"x0.028"
Длина 124 мм




YS-606L
**Удлиненные,
твердосплавные**
Арт. 22-657

На 23 мм длиннее
обычной модели 10

Диаметр:
Круглая проволока 0.016"-0.26"
Квадратная проволока 0.016"x0.016"- 0.22"x0.028"
Длина 147мм

Периодически необходимо смазывать места соединения

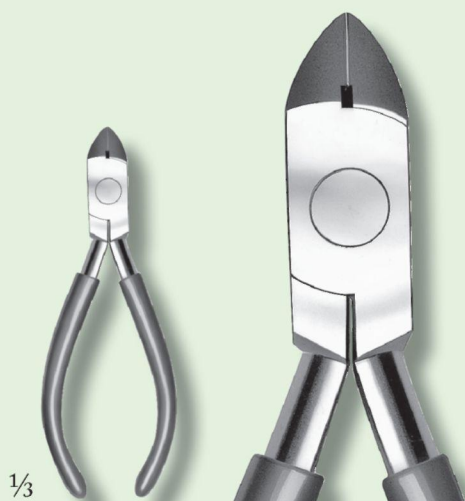


YS-601
Новинка
Арт. 22-601

Диаметр проволоки 0,8 мм



YS-602
KI
Арт. 22-602

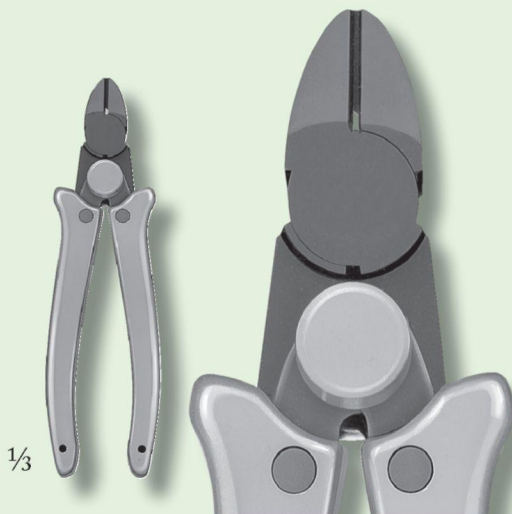


YS-603
Стандартные
Арт. 22-603

Диаметр проволоки 1,2 мм



YS-506
Арт. 22-506

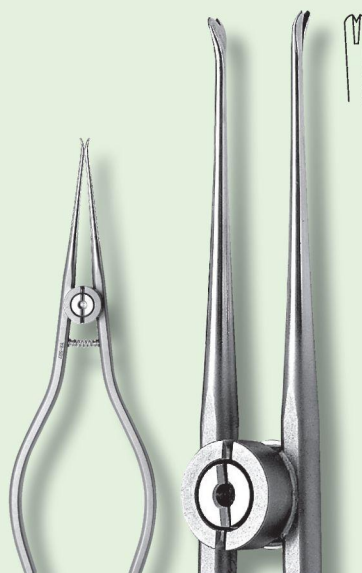

YS-507
Арт. 22-507



YS-508
Арт. 22-508

Щипцы модульные



Прямые
Арт. 22-509



**Прямые с перекрестными
насечками**
Арт. 22-511

С расширением
на конце



Изогнутые
Арт. 22-510



**С разделителем
YS-551**
Арт. 22-551

Инструмент для установки дуги в паз брекета

1/1



YS-704 A (Twister)

Арт. 22-754



YS-704 B

Арт. 22-755



YS-704

Арт. 22-704

Инструмент для установки проволоки

Арт. 22-753

1/1



Инструмент для установки брекетов

Арт. 22-703

1/1



Зеленые части из PP, до 155°C

Пинцет для установки брекетов

Арт. 22-761

1/1



Надежно захватывает скользкие брекеты



Крючок для
выравнивания



Шкала для выравнивания
от 3,5 до 5,0

Пинцеты с замком

1/1



**YS-707
S**

Арт. 22-707



**YS-708
L**

Арт. 22-708

Скребок

Арт. 22-706

1/1



Не дезинфицировать в автоклаве

Артикуляторы для моделирования прикуса

1/2



YS-714

Арт. 22-714



MH

Арт. 22-715

Не автоклавировать

Макеты зубов для формирования моделей

Арт. 22-834

1/1



Образец



Макеты не составлены вместе в модель, а поставляются по отдельности

Не автоклавировать

Артикулятор для коррекции прикуса

Арт. 22-822

3/5



Не дезинфицировать в автоклаве

Измеритель натяжения

Инструмент для определения степени натяжения и эластичности

2/3



YS-31
2N
Арт. 22-952

5N
Арт. 22-955



YS-31D
Двойной (5N)
Арт. 22-930

Единица измерения – Ньютон (=100 г)
Не автоклавировать

1/1

Штангенциркуль ортодонтический

2/3



YS-32
20cm
Арт. 22-932


YS-33
15cm
Арт. 22-933

Не автоклавировать

Приспособление для измерения моделей

Арт. 22-934

2/3

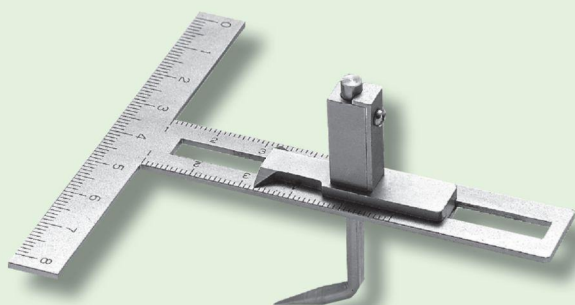


25 табличек для
измерения моделей
Арт.90-095

Не автоклавировать

Линейка 3-х лучевая Boone

Арт. 22-939

2/3

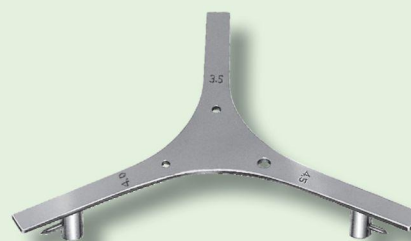

отметки
4,5 мм
4,0 мм
3,5 мм

Горелки

Арт. 22-772

2/3

Конструкция не позволяет засорить сопло воском
Сконструирована для манипуляций одной рукой
Возможность регулировки интенсивности пламени
Стабильное горение



Характеристики

Вес 245 г (вместе с фоновым экраном)
Объем газа 15 г
Время горения Labo 35min,
Ortho 80min
Температура пламени 1300°C


Дополнительно

Газовый баллон 130 г
Код 22-767


Размеры ШГВ 76,6x54,5x154
Не автоклавировать

Пластины для фиксации подбородка

3/4

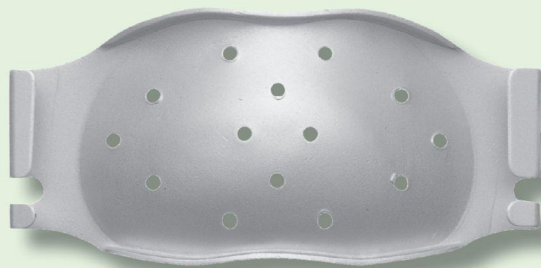

Арт. 22-868

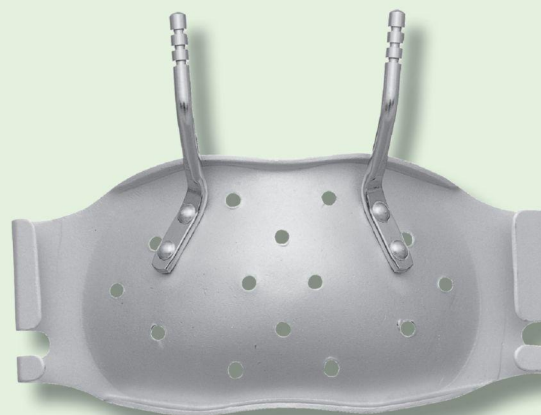


**Пластина для фиксации
подбородка со шкалами для
верхнечелюстных движений**

Арт. 22-869

Разметочная пластина

Арт. 22-940

1/4

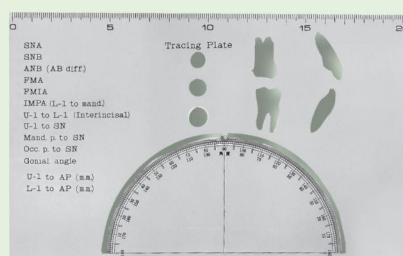

Размеры 210x130
Не автоклавировать

Стойка для пайки с фиксаторами

Арт. 21-552

1/4

Удерживает заготовки при помощи 2х пинцетов в
процессе пайки
Справа и слева имеется по 4 отверстия для
перестановки держателей щипцов



Размеры стойки 320x205
Не автоклавировать

Способы дезинфекции и стерилизации

Следуйте указаниям инструкции для поддержания инструментов в рабочем состоянии. Если инструменты сильно загрязнены, необходимо замочить их в дезинфицирующем средстве.

5. Сушка и хранение

- Периодически смазывайте места соединений щипцов, зажимов, держателей для игл, ножниц, инструментальным маслом, для защиты от коррозии и для снижения трения.
- Инструменты, подвергшиеся коррозии храните отдельно от остальных.
- Не храните химические средства вместе с инструментами.

4. Стерилизация и дезинфекция

Обратите внимание

- Перед дезинфекцией удалите загрязнения с инструментов.
- Избегайте автоклавирования с применением спиртовых растворов. Это может стать причиной появления коррозии.
- Для металлических инструментов используйте дезинфицирующее средство, которое воздействует на металл щадящим образом.
- Избегайте контакта со следующими веществами: гипохлорид натрия, хлорид бензалкония, хлорид бензетония, йодоформ, настойки йода, хлоргексидин, т.к. они могут стать причиной коррозии.
- Вода с высоким уровнем кислотности также может стать причиной коррозии.
- По возможности используйте для промывки, как можно более чистую водопроводную воду.
- Не во всех автоклавах можно использовать очищенную воду. Внутри автоклава имеется сенсор уровня воды. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

* Не оставляйте инструменты в растворе на долгое время.

* После дезинфекции как следует помойте и высушите инструмент.



Инструментальное масло
(Арт. 13-093)

1. Промывание

- Промойте инструмент под проточной водой

2. Ультразвуковая чистка и замачивание

Обратите внимание

- Обязательно промывайте инструмент перед дезинфекцией и стерилизацией. Грязь на инструментах снижает эффективность дезинфекции, и увеличивает возможность появления коррозии.
- Инструменты которые контактировали с кровью и тканями, обрабатывайте в антикоррозионном очищающем растворе (перед использованием различных дезинфицирующих средств, ознакомьтесь с особенностями их применения).
- Не очищайте зонды и зеркала при помощи ультразвука. Во время очистки избегайте контакта инструментов между собой.
- Не применяйте при очистке абразивные средства, проволочные щетки, и губки из стальной проволоки.
- Не используйте средства, предназначенные для домашнего использования. Применяйте стоматологические антикоррозионные очищающие растворы.

3. Промывание

- После дезинфекции и стерилизации в растворе, тщательно промойте инструмент под проточной водой и высушите его. Будьте внимательны при дезинфекции с помощью ультрафиолета, он может испортить материал, из которого изготовлен инструмент.

Меры предосторожности



- Используйте инструмент по прямому назначению во избежание его поломки, изменения формы и т. д.
- Если на инструменте имеются загрязнения, удаляйте их незамедлительно. Химикаты и вещества биологического происхождения являются главной причиной появления коррозии и ухудшают функции инструментов.
- Внимательно осматривайте внутренние и внешние стороны, места сочленения инструмента на наличие сколов, трещин, коррозии до и после использования.
- Не царапайте, и не наносите на инструменты гравировку, это может стать причиной появления коррозии.
- Не подвергайте инструмент воздействию открытого огня в течение долгого времени, это может привести к изменению его формы.

Утилизация инструмента

- Перед утилизацией инструмента примите соответствующие меры по очистке и дезинфекции (кроме инструментов и материалов предназначенных для стерилизации).
- Предметы, предназначенные для утилизации, помещайте в специальные контейнеры, во избежание заражения. Будьте осторожны с острыми предметами.
- При утилизации зараженных материалов, соблюдайте соответствующие законы.


Способ заточки

Скалеры

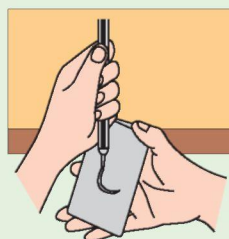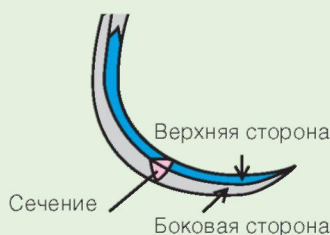


- 1 Добавьте небольшое количество масла на точильный камень. Зажмите скалер в руке и прижмите к столу, так, чтобы верхняя часть резца была параллельна полу


Новый инструмент
Верхняя сторона

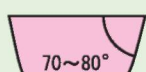


Сечение

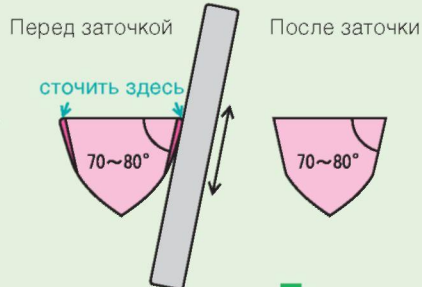


- 2 Установите камень под углом 70-80 градусов у задней части, и начинайте затачивать аккуратными движениями вверх и вниз. По мере заточки на лезвии начнет скапливаться масло с металлическими частицами, в виде осадка черного цвета.

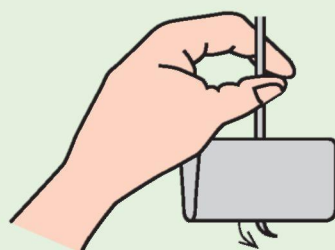

- 4 В конце заточите внутреннюю часть лезвия о круглую часть камня 2-3 раза

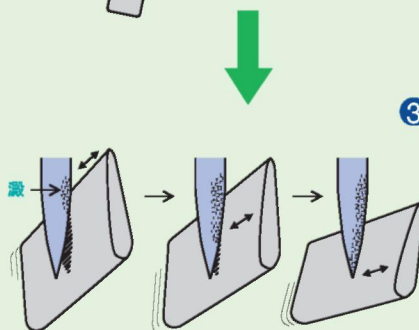

- 3 Продолжайте заточку, постепенно продвигаясь к кончику лезвия. Таким же образом заточите другую сторону, перевернув скалер, другой стороной.

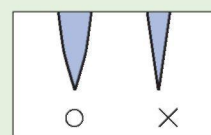

Придерживайтесь формы, обозначенной кружочком. Если заточить лезвие прямо, оно потеряет режущую способность

Цель заточки

- Для более легкого удаления зубного камня
- Чтобы не травмировать корни зубов и ткани зуба
- Для облегчения манипуляций врачу и комфорта пациента.

Основные моменты

- Затачивайте инструмент после использования
- Не роняйте инструмент

Важно

- Не прижимайте инструмент слишком сильно во время заточки
- Не добавляйте слишком много масла на камень.
- Прижимайте скалер к столу или устойчивому основанию во время заточки.
- Соблюдайте угол заточки.
- Держите верхнюю поверхность лезвия параллельно полу.
- Надежно удерживайте инструмент во время заточки.

О точильных камнях

Виды камней

Название	Материал	Добавка	Зернистость
Арканзас	натуральный	Масло	Мелкая/средняя
Комбинированный	искусств.	Вода/масло	Крупная
Керамический	искусств.	Не требуется	Мелкая/средняя


Камень Арканзас используется для окончательной доводки
Комбинированный для заточки краёв и для придания формы

Нанесите 2 – 3 капли масла на камень, распределите салфеткой и приступайте к заточке




Инструментальное масло
Арт.13-093

Заточка кюрет

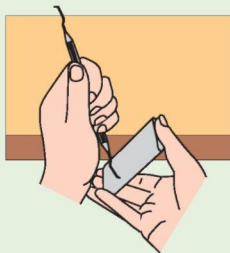


1

Добавьте небольшое количество масла на точильный камень. Зажмите кюрету в руке и прижмите к столу, так, чтобы верхняя часть резца была параллельна полу

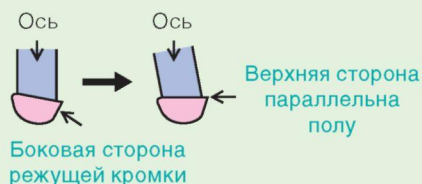

Новый инструмент
Верхняя сторона

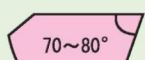

Сечение

Перед заточкой




После заточки



2

Установите камень под углом 70-80 градусов у задней части, и начинайте затачивать аккуратными движениями вверх и вниз.


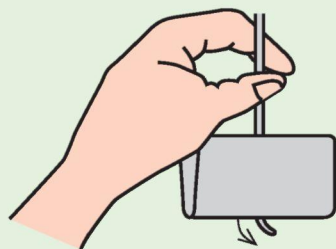


4

В конце заточите внутреннюю часть лезвия о круглую часть камня 2-3 раза

3

Во время заточки кончика, располагайте камень под углом 45 градусов

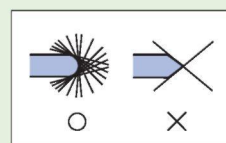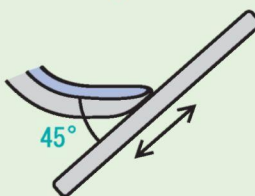

Работайте легкими движениями, чтобы не переточить инструмент

Проверка остроты инструмента

При помощи тестера


Если заточка произведена хорошо, то вы будете чувствовать, как инструмент «въедается» в модель зуба.



Тестер для проверки качества заточки
Код 13-415

Проверка «на глаз»

Поверните лезвие к себе, и внимательно посмотрите есть ли от него отражение в виде линии. При плохой заточке поверхность будет блестеть на подобии зеркала. Если скалер заточен правильно, отражения не будет.

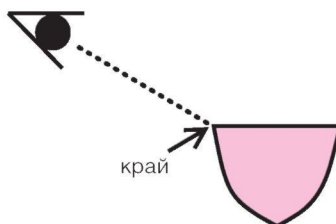

При правильной заточке скалеров и кюрет, облегчается работа и увеличивается срок их службы.

Будьте осторожны!

При периодической заточке инструмент истончается и может поломаться или погнуться во время использования. Производите своевременную замену инструмента.

Здесь приведен лишь один из способов заточки.